


PREPARACIÓN

Paso 1

Una vez que el paciente está intubado, seleccione la NeoBar del tamaño adecuado con la tira de la cinta métrica de NeoBar suministrada.

Coloque la línea central de la tira en el tabique nasal y envuélvala hacia la oreja. El color que queda en la apertura del canal del oído corresponde al tamaño de NeoBar.

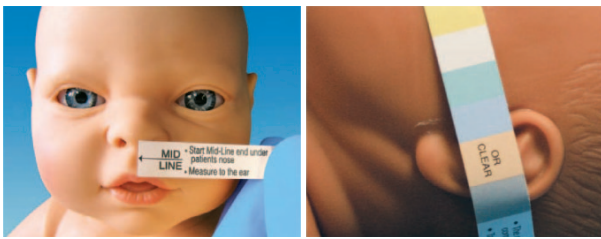

Paso 2

Para garantizar que se ajuste correctamente, coloque el NeoBar por el centro de la boca, entre los labios superior e inferior. El NeoBar no debe entrar en contacto con los labios. Las lengüetas deben quedar en la parte delantera de la oreja.



Paso 3

Limpie y seque la piel conforme al protocolo del hospital.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas no se adhieren correctamente a piel húmeda o al cabello. Los aceites y lociones perjudicarán la adhesión.

NO UTILICE ALCOHOL.

APLICACIÓN

Paso 1

Antes de retirar los papeles de forro, caliente las lengüetas en las manos durante 60 segundos. Pueden sostenerse también bajo un calentador radiante o de talón de 10 a 15 segundos.

Paso 2

Quite y tire los papeles de forro. Coloque las lengüetas en la parte delantera de la oreja, en el hueso, y sosténgalas en posición 60 segundos para que se adhieran correctamente.

Nota: Asegúrese de que el tubo ET quede por debajo de la plataforma, para reducir la presión en el paladar o las encías.



Paso 3

Envuelva cinta blanca o esparadrapo de 1/2 pulgada completamente alrededor de la plataforma del NeoBar primero, y luego continúe alrededor de la plataforma y el tubo.



RETIRADA

Paso 1

Cámbielo cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que suceda primero.

Paso 2

Desenvuelva la cinta para separar el tubo ET de la plataforma del NeoBar.

Paso 3

Sature las lengüetas con agua o solución salina.

Paso 4

Retire lentamente las lengüetas a la vez que humedece con agua o solución salina.



RETIRADA DE EMERGENCIA

Corte cuidadosamente la parte fina del NeoBar con tijeras romas en la unión de la barra y la lengüeta.

Retire el NeoBar y el tubo ET sujeto.

Retire las lengüetas posteriormente. (Vea la sección de Retirada)

