


NeoBar®

Soporte de Tubo ET

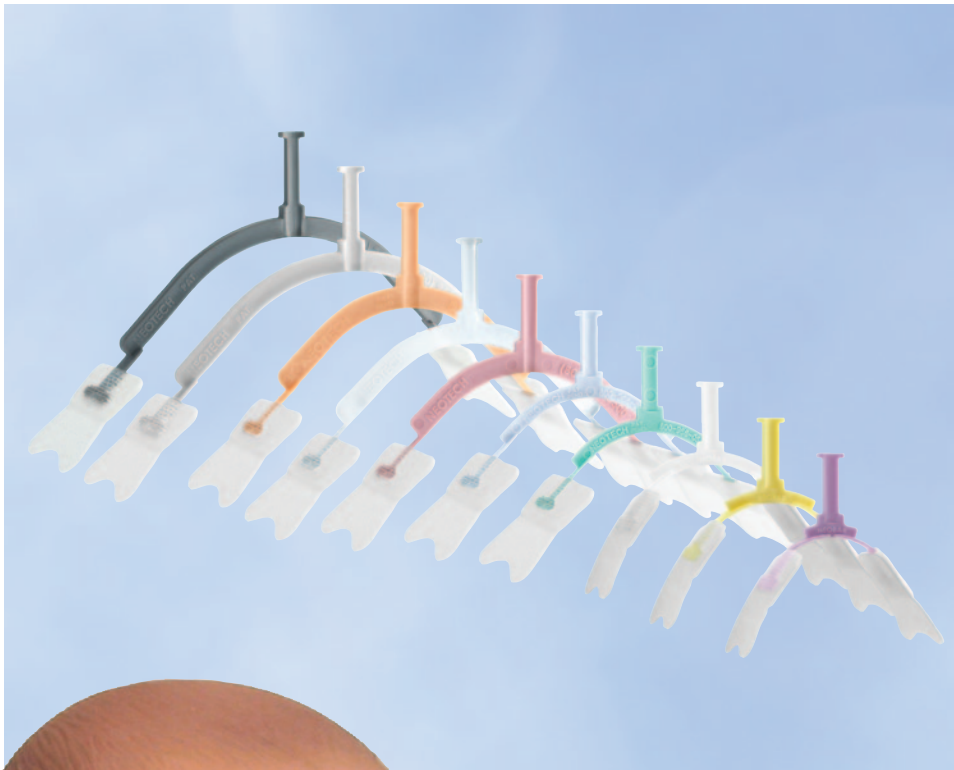

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lengüetas hidrocoloides NeoBond®, cómodas para la piel
- Tamaños macro y gigante disponibles con adhesivo acrílico médico
- Diseñadas para reducir las extubaciones, contribuir a prevenir el trauma palatal y permitir un mejor cuidado oral
- Elimina la necesidad de poner cinta cerca de la nariz o la boca
- Pueden cortarse para retirada de emergencia
- Tamaños codificados por colores
- No hechas con látex de goma natural ni DEHP plastificador
- Empaquetadas individualmente

Cat No.	Tamaño	Color	Cant/Unidad
N709	Mini	Púrpura	5/ caja
N710	Ultra	Amarillo	5/ caja
N711	Micro	Blanco	5/ caja
N712	Pequeño	Verde	5/ caja
N713	Grande	Azul	5/ caja
N714	XL	Rose	5/ caja
N715H	Macro	Transparente	5/ caja
N716H	Jumbo	Gris	5/ caja
Con Adhesivo Acrílico Testeado Clínicamente			
N715F	Macro	Durazno	5/ caja
N716F	Jumbo	Carbón	5/ caja



U.S. Patent
#D434,496; #6,050,263

NeoBar®

Soporte de Tubo ET

INDICACIONES DE USO

El NeoBar está indicado para fijar un tubo endotraqueal. Ha sido creado para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Paso 1

Una vez que el paciente está intubado, seleccione la NeoBar del tamaño adecuado con la tira de la cinta métrica de NeoBar suministrada.

Coloque la línea central de la tira en el tabique nasal y envuélvala hacia la oreja. El color que queda en la apertura del canal del oído corresponde al tamaño de NeoBar.

Paso 2

Para garantizar que se ajuste correctamente, coloque el NeoBar por el centro de la boca, entre los labios superior e inferior. El NeoBar no debe entrar en contacto con los labios. Las lengüetas deben quedar en la parte delantera de la oreja.

Paso 3

Limpie y seque la piel conforme al protocolo del hospital.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas no se adhieren correctamente a piel húmeda o al cabello. Los aceites y lociones perjudicarán la adhesión.

NO UTILICE ALCOHOL.

Aplicación

Paso 1

Antes de retirar los papeles de forro, caliente las lengüetas en las manos durante 60 segundos. Pueden sostenerse también bajo un calentador radiante o de talón de 10 a 15 segundos.

Paso 2

Quite y tire los papeles de forro. Coloque las lengüetas en la parte delantera de la oreja, en el hueso, y sosténgalas en posición 60 segundos para que se adhieran correctamente.

Nota: Asegúrese de que el tubo ET quede por debajo de la plataforma, para reducir la presión en el paladar o las encías.

Paso 3

Envuelva cinta blanca o esparadrapo de 1/2 pulgada completamente alrededor de la plataforma del NeoBar primero, y luego continúe alrededor de la plataforma y el tubo.

Retirada

Paso 1

Cámbielo cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que suceda primero.

Paso 2

Desenvuelva la cinta para separar el tubo ET de la plataforma del NeoBar.

Paso 3

Sature las lengüetas con agua o solución salina.

Paso 4

Retire lentamente las lengüetas a la vez que humedece con agua o solución salina.

Retirada de emergencia

Corte cuidadosamente la parte fina del NeoBar con tijeras romas en la unión de la barra y la lengüeta.

Retire el NeoBar y el tubo ET sujeto.

Retire las lengüetas posteriormente. (Vea la sección de Retirada)

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

NeoBar está contraindicada para pacientes con zonas de la piel infectadas o excoriadas que no permite una adecuada colocación de las lengüetas.

No está diseñada para su uso en adultos.

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta de este dispositivo exclusivamente por parte de médicos o bajo prescripción facultativa.

NeoBar solo se debería utilizar en pacientes bajo la supervisión continua y directa de profesionales sanitarios formados.

Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce irritación cutánea.

NeoBar no debería entrar en contacto con los labios.

Las lengüetas no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al pelo. Los aceites y las lociones evitan una perfecta adhesión.

No utilice alcohol para limpiar la piel antes de su aplicación.

Para retirarlo de forma inmediata, consulte las INSTRUCCIONES DE USO: Retirada de emergencia.

Uso para un solo paciente.



Hecho en EEUU

Para información o muestras GRATIS
1-800-966-0500 or visit neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy • Valencia, CA 91355, USA