


NeoShades[®] con Cinta para la Cabeza

Protectores Oculares para Fototerapia

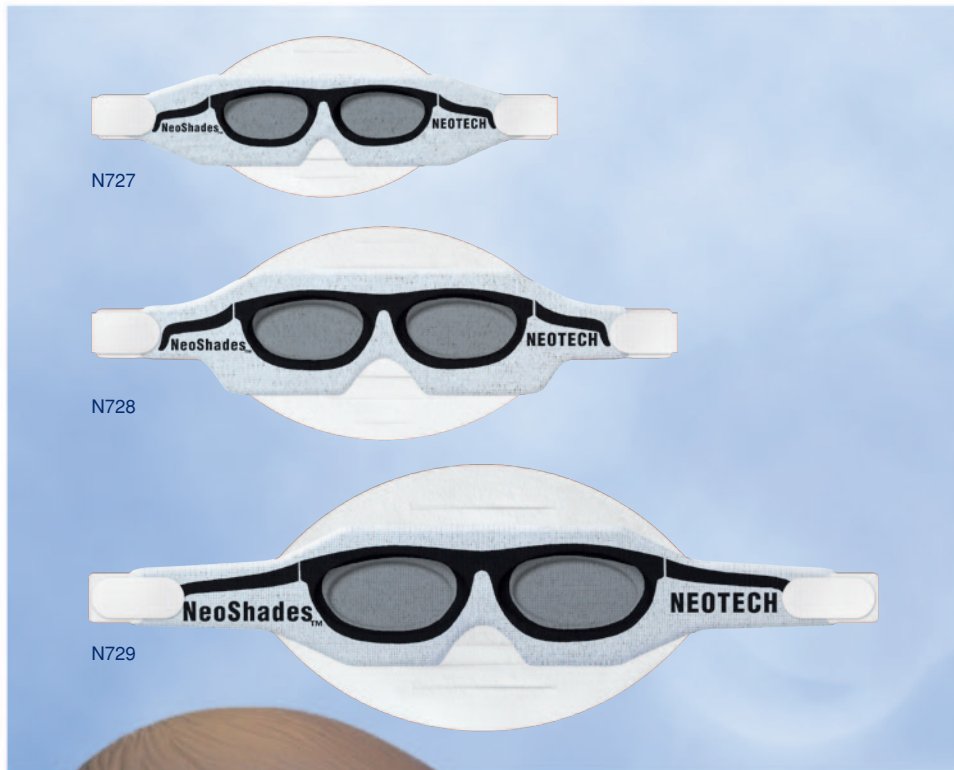

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño bonito de gafas de sol
- Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente
- La cinta para la cabeza NeoFoam[®], suave y patentada, sostiene las NeoShades en posición
- Cinta ajustable para la cabeza, diseñada para minimizar el deslizamiento y reducir el moldeado a la cabeza
- Forma única de la cinta de la cabeza diseñada para garantizar un ajuste ideal
- No hecho con látex de goma natural ni DEHP plastificador
- Empaquetado individualmente

Cat No.	Tamaño	Cant/Unidad
N727	Micro	50/caja
N728	Pequeño	50/caja
N729	Grande	50/caja



Hecho en EEUU

Patente #D410,021; #8,070,288;
Otras Patentes Pendientes

NeoShades® con Cinta para la Cabeza

Protectores Oculares para Fototerapia

INDICACIONES DE USO

Las NeoShades son indicadas para uso como protectores oculares durante sesiones de fototerapia. Han sido creadas para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1

Seleccione el tamaño correcto.

Paso 2

Coloque la cinta para la cabeza por detrás de la cabeza, con el lado suave de la espuma contra la cabeza.

Paso 3

Cubra los ojos con NeoShades.

Paso 4

Sujete cuidadosamente la tela con el gancho en el extremo de la cinta para la cabeza a las NeoShades.

Repita en el otro lado.

Nota: Pueden recortarse las tiras para un ajuste adecuado.

INFORMACIÓN GENERAL

Bloqueo de luz

99.9%

Materiales del producto

NeoShades: nailon, poliuretano

Cinta para la cabeza: NeoFoam, tela de gancho

Hecho con látex de caucho natural: no

Hecho con plastificante DEHP: no

Tamaño

N727 Micro: 108 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza <26 cm)

N728 Pequeño: 127 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 26 y 34 cm)

N729 Grande: 178 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza >34 cm)

Envasado

Envasado individual: sí

Tipo de envase: bolsa de polietileno

Caja dispensadora: sí

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las NeoShades no han sido creadas para uso en adultos.

La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o cuando lo ordene un médico.

Solamente deben utilizarse las NeoShades cuando el paciente esté siendo supervisado continua y directamente por profesionales médicos.

Para uso en un solo paciente.

Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 o visite neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy • Valencia, CA 91355, USA



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (0086),
Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, MK5 8PP, UK.