

## NeoBar<sup>®</sup>

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

- 1 Una vez que el paciente está intubado, seleccione la NeoBar del tamaño adecuado con la tira de la cinta métrica de NeoBar suministrada.

Coloque la línea central de la tira en el tabique nasal y envuélvala hacia la oreja. El color que queda en la apertura del canal del oído corresponde al tamaño de NeoBar.

*Nota: Si no está seguro entre dos tamaños, pruebe primero el tamaño más pequeño.*

- 2 Para garantizar un ajuste adecuado, coloque NeoBar en el centro de la boca, entre los labios superior e inferior. NeoBar no debe entrar en contacto con los labios. Las lengüetas hidrocoloides deben estar justo en frente de la oreja.

- 3 Limpie y seque la piel de las mejillas conforme al protocolo hospitalario.

*Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas adhesivas hidrocoloides no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al cabello. Los aceites y las lociones afectarán de forma negativa a la adhesión.*

NO UTILICE ALCOHOL.

#### Aplicación

- 1 Antes de quitar los recubrimientos de plástico, las lengüetas adhesivas hidrocoloides deben calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.

- 2 Retire y deseche los recubrimientos de plástico. Aplique las lengüetas adhesivas hidrocoloides frente a la oreja, en el hueso, y sosténgalas en el lugar durante 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada.

*Nota: Asegúrese de que el tubo ET quede por debajo de la plataforma, para reducir la presión en el paladar o las encías.*

- 3 Primero, envuelva cinta blanca o de tela de 1/2" (12.5 mm) completamente alrededor de la plataforma de NeoBar y luego continúe alrededor de la plataforma y el tubo ET.

#### Extracción

- 1 Cámbielo cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que suceda primero.

- 2 Desenvuelva la cinta para separar el tubo ET de la plataforma del NeoBar.

- 3 Sature las lengüetas con agua o solución salina.

- 4 Despegue lentamente las lengüetas adhesivas hidrocoloides de la piel mientras limpia con agua o solución salina.


#### PREPARACIÓN



#### APLICACIÓN



#### EXTRACCIÓN

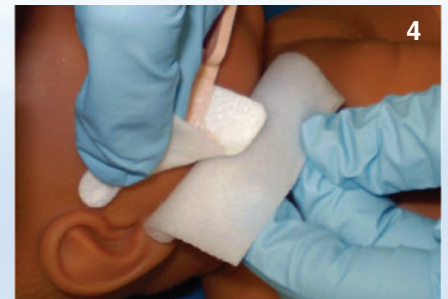

Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

D487 Rev D