


NeoBar[®]

SOPORTE DE TUBO ET

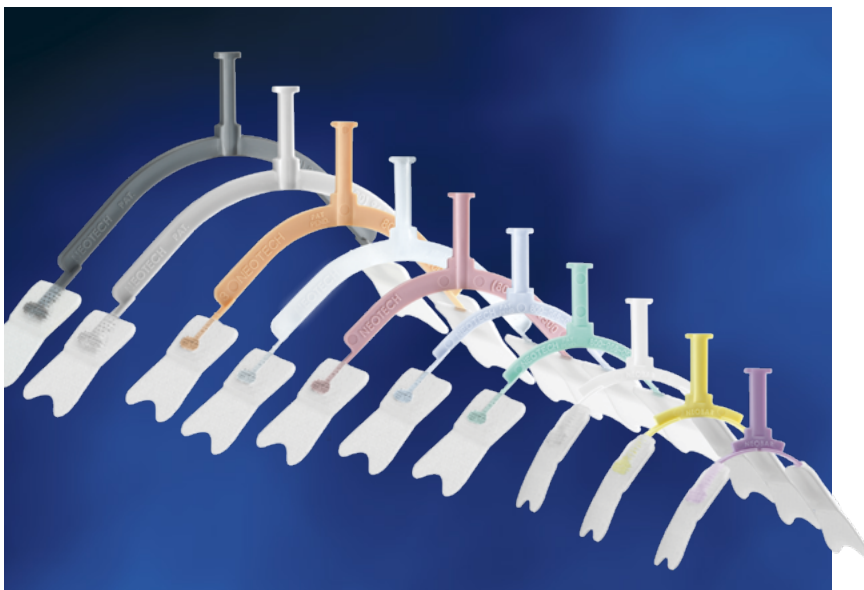

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lengüetas hidrocoloides NeoBond[®], cómodas para la piel
- Tamaños macro y gigante disponibles con adhesivo acrílico médico
- Diseñadas para reducir las extubaciones, contribuir a prevenir el trauma palatal y permitir un mejor cuidado oral
- Elimina la necesidad de poner cinta cerca de la nariz o la boca
- Tamaños codificados por colores
- No hechas con látex de goma natural ni DEHP plastificador
- Empaquetadas individualmente

Cat No.	Tamaño	Color	Cant/Unidad
N709	Mini	Púrpura	5/caja
N710	Ultra	Amarillo	5/caja
N711	Micro	Blanco	5/caja
N712	Pequeño	Verde	5/caja
N713	Grande	Azul	5/caja
N714	XL	Rose	5/caja
N715H	Macro	Transparente	5/caja
N716H	Jumbo	Gris	5/caja
Con Adhesivo Acrílico Testeado Clínicamente			
N715F	Macro	Durazno	5/caja
N716F	Jumbo	Carbon	5/caja
Clasificado			
N718 Transporte (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Patente
#D434,496; #6,050,263



Hecho en EEUU

INDICACIONES DE USO

El NeoBar está indicado para fijar un tubo endotraqueal. Ha sido creado para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

- 1 Una vez que el paciente está intubado, seleccione la NeoBar del tamaño adecuado con la tira de la cinta métrica de NeoBar suministrada.

Coloque la línea central de la tira en el tabique nasal y envuélvala hacia la oreja. El color que queda en la apertura del canal del oído corresponde al tamaño de NeoBar.

Nota: Si no está seguro entre dos tamaños, pruebe primero el tamaño más pequeño.

- 2 Para garantizar un ajuste adecuado, coloque NeoBar en el centro de la boca, entre los labios superior e inferior. NeoBar no debe entrar en contacto con los labios. Las lengüetas hidrocoloides deben estar justo en frente de la oreja.
- 3 Limpie y seque la piel de las mejillas conforme al protocolo hospitalario.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas adhesivas hidrocoloides no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al cabello. Los aceites y las lociones afectarán de forma negativa a la adhesión.

NO UTILICE ALCOHOL.

Aplicación

- 1 Antes de quitar los recubrimientos de plástico, las lengüetas adhesivas hidrocoloides deben calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.
- 2 Retire y deseche los recubrimientos de plástico. Aplique las lengüetas adhesivas hidrocoloides frente a la oreja, en el hueso, y sosténgalas en el lugar durante 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada.
Nota: Asegúrese de que el tubo ET quede por debajo de la plataforma, para reducir la presión en el paladar o las encías.
- 3 Primero, envuelva cinta blanca o de tela de 1/2" (12.5 mm) completamente alrededor de la plataforma de NeoBar y luego continúe alrededor de la plataforma y el tubo ET.

Retirada

- 1 Cámbielo cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que suceda primero.
- 2 Desenvuelva la cinta para separar el tubo ET de la plataforma del NeoBar.
- 3 Sature las lengüetas con agua o solución salina.
- 4 Despegue lentamente las lengüetas adhesivas hidrocoloides de la piel mientras limpia con agua o solución salina.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

NeoBar está contraindicada para pacientes con zonas de la piel infectadas o excoriadas que no permite una adecuada colocación de las lengüetas.

No está diseñada para su uso en adultos.

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta de este dispositivo exclusivamente por parte de médicos o bajo prescripción facultativa.

NeoBar solo se debería utilizar en pacientes bajo la supervisión continua y directa de profesionales sanitarios formados.

Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce irritación cutánea.

NeoBar no debería entrar en contacto con los labios.

Las lengüetas adhesivas hidrocoloides no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al cabello. Los aceites y las lociones afectarán de forma negativa a la adhesión.

No utilice alcohol para limpiar la piel antes de su aplicación.

Uso para un solo paciente.

Certified



Corporation

Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355



Hecho en EEUU