


# NeoShades<sup>®</sup> con Cinta para la Cabeza

## PROTECTORES OCULARES PARA FOTOTERAPIA

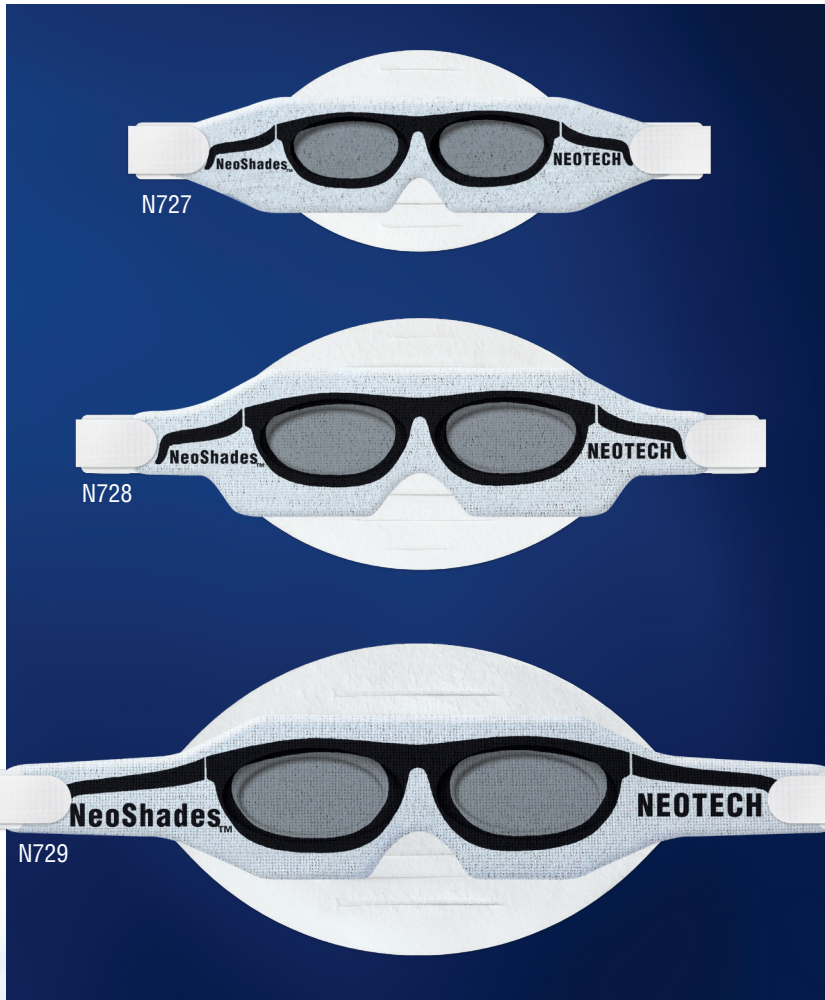

### — CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño bonito de gafas de sol
- Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente
- La cinta para la cabeza NeoFoam<sup>®</sup>, suave y patentada, sostiene las NeoShades en posición
- Cinta ajustable para la cabeza, diseñada para minimizar el deslizamiento y reducir el moldeado a la cabeza
- Forma única de la cinta de la cabeza diseñada para garantizar un ajuste ideal
- No hecho con látex de goma natural ni DEHP plastificador
- Empaquetado individualmente

Cat No.	Tamaño	Cant/Unidad
N727	Micro	50/caja
N728	Pequeño	50/caja
N729	Grande	50/caja



Patente #D410,021; #8,070,288;  
Otras Patentes Pendientes



Hecho en EEUU

# NeoShades® con Cinta para la Cabeza

## PROTECTORES OCULARES PARA FOTOTERAPIA

### INDICACIONES DE USO

Las NeoShades son indicadas para uso como protectores oculares durante sesiones de fototerapia. Han sido creadas para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

### INSTRUCCIONES DE USO

#### 1 Seleccione el tamaño correcto.

Tamaño aproximado:

Micro: 28 semanas y menos

Pequeño: 29-36 semanas

Grande: 37 semanas en adelante


#### 2 Coloque la cinta para la cabeza por detrás de la cabeza, con el lado suave de la espuma contra la cabeza.

#### 3 Cubra los ojos con NeoShades.

#### 4 Sujete cuidadosamente la tela con el gancho en el extremo de la cinta para la cabeza a las NeoShades.

Repita en el otro lado.

*Nota: Pueden recortarse las tiras para un ajuste adecuado.*

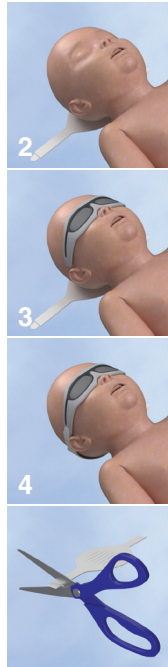

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Bloqueo de luz

99.9%

#### Materiales del producto

NeoShades: nailon, poliuretano

Cinta para la cabeza: NeoFoam, tela de gancho

Hecho con látex de caucho natural: no

Hecho con plastificante DEHP: no

#### Tamaño

N727 Micro: 108 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza <26 cm)

N728 Pequeño: 127 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 26 y 34 cm)

N729 Grande: 178 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza >34 cm)

#### Envasado

Envasado individual: sí

Tipo de envase: bolsa de polietileno

Caja dispensadora: sí

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las NeoShades no han sido creadas para uso en adultos.

La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o cuando lo ordene un médico.

Solamente deben utilizarse las NeoShades cuando el paciente esté siendo supervisado continua y directamente por profesionales médicos.

Para uso en un solo paciente.



For more information or to order your **FREE** sample call  
**1-800-966-0500** or visit **neotechproducts.com**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: **BSI Group (2797)**,  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands