


EZ-Hold®

SUPPORT POUR TUBES ET CANULES

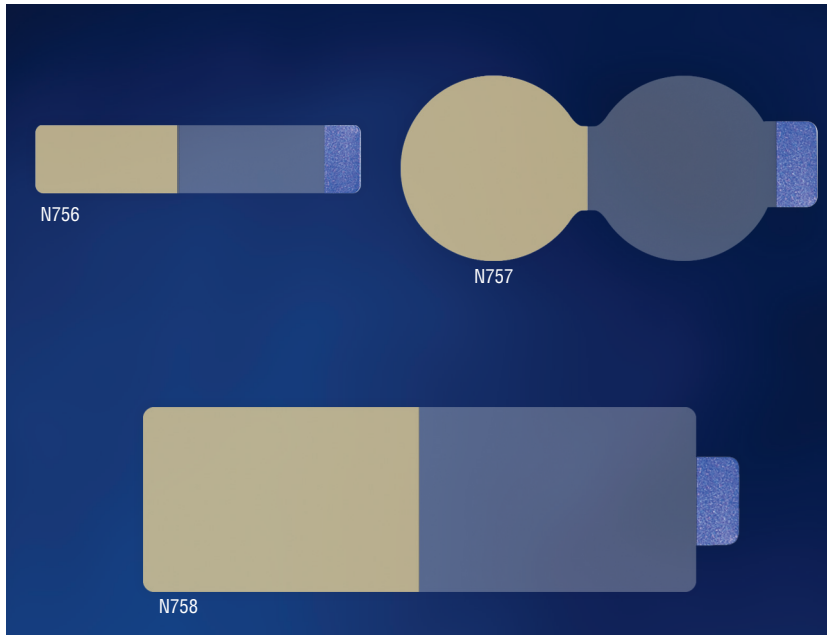

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Base hydrocollaïdale hypoallergénique NeoBond®
- Rabat conçu pour éliminer la contrainte de traction sur les tubes
- Rabat conçu pour supporter les ouvertures et fermetures répétées
- Rabat transparent permettant une meilleure visibilité
- Taille mini et forme idéale pour les grands prématurés
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP

Catalogue	Objet	Quantité/Unité
N756	Mini	100/boîte
N757	la norme	100/boîte
N758	Extra Large	100/boîte

EZ-Hold®

SUPPORT POUR TUBES ET CANULES

INDICATIONS D'UTILISATION

Le dispositif EZ-Hold permet de fixer et de supporter les tubes respiratoires.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

Nettoyer et sécher la peau là où EZ-Hold sera placé conformément au protocole hospitalier.

Remarque : il est important de maintenir la peau aussi propre et sèche que possible. Le dispositif EZ-Hold n'adhère pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent également l'adhérence plus difficile.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL.

Application

- 1 Avant de retirer le film protecteur en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Vous pouvez les réchauffer en utilisant les techniques suivantes : les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, les tenir près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou les tenir contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirer le revêtement de papier blanc, puis ôter et jeter le film protecteur transparent imprimé de la base hydrocolloïde.
- 3 Appliquez la base sur la peau et maintenez-la en place pendant 60 secondes pour garantir une bonne adhérence.
- 4 Retirer et jeter le second film protecteur opaque et replier le rabat sur le tube.

Remarque : relevez le rabat pour le repositionner ou le retirer du tube le cas échéant.

Retrait

- 1 Remplacez le dispositif EZ-Hold tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.
- 2 Relevez le rabat pour le retirer du tube.
- 3 Saturer le dispositif EZ-Hold d'eau ou de solution saline.
- 4 Décoller doucement EZ-Hold de la peau en la tamponnant avec de l'eau ou du sérum physiologique.



PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Cessez l'utilisation immédiatement si une irritation cutanée se produit.

Le dispositif EZ-Hold n'adhère pas correctement à la peau humide ou aux cheveux. Les huiles et lotions rendent également l'adhérence plus difficile.

N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer la peau avant application.

À usage unique.