


NeoBar[®]

ENDOTRACHEALTUBUSHALTER

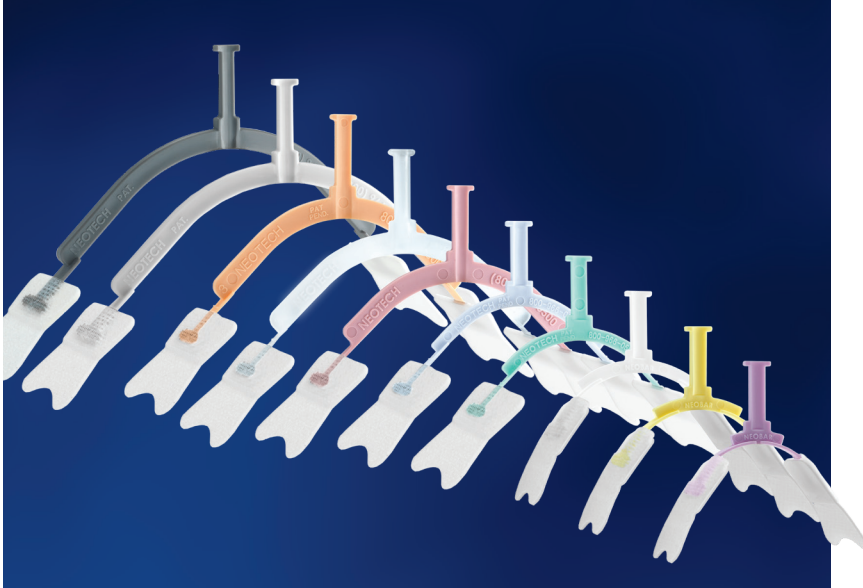

MERKMALE & VORTEILE

- Hautfreundliche NeoBond[®]-Hydrokolloid-Befestigungslaschen
- Makro- und Jumbogrößen mit medizinischem Acrykleber erhältlich
- Entwickelt, um Extubationen zu reduzieren, Gaumenverletzungen zu verhindern und die Mundpflege zu verbessern
- Macht die Verwendung von Klebeband an Nase oder Mund überflüssig
- Farbcodierte Größen
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt
- Einzeln verpackt

Katalog #	Größe	Farbe	Mengeneinheit
N709	Mini	Violett	5/Kasten
N710	Ultra	Gelb	5/Kasten
N711	Mikro	Weiß	5/Kasten
N712	Klein	Grün	5/Kasten
N713	Groß	Blau	5/Kasten
N714	XL	Rose	5/Kasten
N715H	Makro	Klar	5/Kasten
N716H	Jumbo	Grau	5/Kasten
Mit medizinischem Acrykleber			
N715F	Makro	Pfirsich	5/Kasten
N716F	Jumbo	Kohlenstoff	5/Kasten
Sortiert			
N718 Transport (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			
N719N Sortiert (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Patent
#D434,496; #6,050,263

GEBRAUCHSHINWEIS

Das NeoBar eignet sich als Sicherung eines Endotrachealtubus (ET-Tubus). Es ist für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern) vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung

- 1 Nach der Intubation richtige NeoBar-Größe wählen, indem das mitgelieferte NeoBar-Maßband verwendet wird.

Die Mittellinie des Streifens an der Nasenscheidewand ausrichten und den Streifen zum Ohr ziehen. Die Farbe über der Öffnung des Gehörgangs entspricht der richtigen NeoBar Größe.

Hinweis: Probieren Sie zunächst die kleinere Größe, wenn die Indikation zwischen zwei Größen liegt.

- 2 Zur Sicherstellung des richtigen Sitzes NeoBar in der Mitte des Mundes, zwischen Ober- und Unterlippe positionieren. NeoBar sollte die Lippen nicht berühren. Die Hydrokolloid-Pads müssen kurz vor dem Ohr angebracht werden.
- 3 Haut an den Wangen gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und trocknen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so rein und trocken wie möglich ist. Auf feuchter oder behaarter Haut haften die Hydrokolloid-Klebe pads nicht einwandfrei. Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftwirkung.

KEIN ALKOHOL VERWENDEN.

Anwendung

- 1 Vor dem Abziehen der Kunststofffolien müssen die Hydrokolloid-Klebe pads aktiv erwärmt werden. Dazu gibt es u. a. die folgenden Möglichkeiten: Für mindestens 60 Sekunden zwischen den Handflächen wärmen; für 10 - 15 Sekunden an einen Wärmestrahler oder für 10-15 Sekunden an einen chemischen Fersenwärmer halten.
- 2 Kunststofffolien abziehen und entsorgen. Hydrokolloid-Klebe pads auf den Knochen vor dem Ohr legen und für einwandfreien Halt 60 Sekunden lang andrücken.

Hinweis: Sicherstellen, dass sich der ET-Tubus unter der Plattform befindet, um Druck auf Gaumen und Zahnfleisch zu verringern.
- 3 Zunächst die NeoBar-Platte mit 12,5 mm breitem weißem Klebeband oder Gewebeband umwickeln und anschließend die Platte und den ET-Tubus umwickeln.

Entfernung

- 1 NeoBar alle 5 Tage oder nach Krankenhausprotokoll ersetzen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgebend ist.
- 2 Klebeband entfernen, um ET-Tubus von der NeoBar-Plattform zu trennen.
- 3 Laschen mit Wasser oder Kochsalzlösung tränken.
- 4 Hydrokolloid-Klebe pads langsam von der Haut abziehen und dabei weiter mit Wasser oder Kochsalzlösung befeuchten.

GEGENANZEIGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN

& WARNUNGEN

NeoBar ist für Patienten mit infizierten oder wunden Hautbereichen, die eine richtige Platzierung der Laschen verhindern, kontraindiziert.

Es ist nicht für den Einsatz an Erwachsenen vorgesehen.

Nach Bundesgesetz darf dieser Artikel nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

NeoBar sollte nur dann verwendet werden, während der Patient sich unter ständiger, direkter Aufsicht von ausgebildeten Fachleuten befindet.

Bei Hautreizungen Gebrauch sofort unterbrechen.

NeoBar sollte nicht die Lippen berühren.

Auf feuchter oder behaarter Haut haften die Hydrokolloid-Klebe pads nicht einwandfrei. Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftwirkung.

Vor der Verwendung die Haut nicht mit Alkohol reinigen.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.