

NeoShades® avec Bandeau

CACHE-ŒILS DE PHOTOTHÉRAPIE



FONCTIONS ET AVANTAGES

- Matériau de protection oculaire doux et rembourré, dessin représentant des petites lunettes
- Poches oculaires conçues pour le confort et la sécurité du patient
- Bandeau NeoFoam® breveté doux maintenant le masque NeoShades en place
- Bandeau réglable conçu pour réduire les risques de déplacement et permettant de réduire le moulage de tête
- Forme de bandeau unique destiné à assurer un ajustement parfait
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement

Catalogue	Objet	Quantité/Unité
N727	Micro	50/Boîte
N728	Petit	50/Boîte
N729	Grand	50/Boîte

Brevet #8,070,288;
Brevets supplémentaires en instance



NeoShades® avec Bandeau

CACHE-ŒILS DE PHOTOTHÉRAPIE

INDICATIONS D'UTILISATION

Le masque NeoShades est indiqué en tant que protection oculaire lors de sessions de photothérapie. Il est conçu pour une utilisation chez les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Sélectionnez la taille appropriée.

Taille approximative :

Micro – 28 semaines et moins

Petit – 29 à 36 semaines

Grand – 37 semaines et plus


- 2 Placez le bandeau derrière la tête, la partie lisse de la mousse contre la tête.

- 3 Couvrez les yeux avec le masque NeoShades.

- 4 Fixez doucement la bande velcro située à l'extrémité du bandeau sur un côté du masque NeoShades.

Faites la même chose de l'autre côté.

Remarque : Les deux parties du bandeau peuvent être ajustées au besoin.

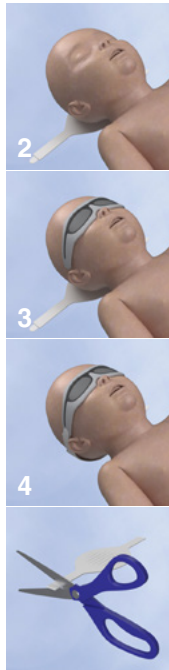

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Le masque NeoShades n'est pas destiné aux adultes.

Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur ordre d'un médecin.

Le bandeau NeoShades doit toujours être utilisé sous la surveillance continue et directe de professionnels qualifiés.

À usage unique.

Certified



Corporation



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.

M670 Rev C

EC REP

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands