

## NeoShades<sup>®</sup> mit Kopfband

### AUGENSCHUTZ FÜR FOTOTHERAPIE



#### MERKMALE & VORTEILE

- Weich gepolstertes Augenschutzmaterial in niedlichem Sonnenbrillen-Design
- Augentaschen entwickelt für den Komfort und die Sicherheit des Patienten
- Weiches, patentiertes NeoFoam<sup>®</sup>-Kopfband hält NeoShades in Position
- Verstellbares Kopfband entworfen, um Verrutschen zu minimieren und Kopfformung zu reduzieren
- Einzigartige Form des Kopfbands, um ideale Passform sicherzustellen
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt
- Einzeln verpackt

Katalog-Nr.	Artikel	Mengeneinheit
N727	Mikro	50/Kasten
N728	Klein	50/Kasten
N729	Groß	50/Kasten

Patent #8,070,288;  
Zusätzliche Patente angemeldet

# NeoShades® mit Kopfband

## AUGENSCHUTZ FÜR FOTOTHERAPIE

### GEBRAUCHSHINWEIS

NeoShades sind als Augenschutz während einer Fototherapie Sitzung einzusetzen. Sie sind für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern) vorgesehen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### 1 Richtige Größe wählen.


Ungefähre Größenangaben:  
Micro – 28 Wochen und jünger  
Small – 29 - 36 Wochen  
Large – 37 Wochen und älter

#### 2 Kopfband hinter dem Kopf mit glatter Schaumstoffseite am Kopf platzieren.

#### 3 Augen mit NeoShades abdecken.

#### 4 Klettverschluss am Ende des Kopfbands sanft an NeoShades befestigen. Mit gegenüberliegender Seite wiederholen.

*Hinweis: Band kann für richtige Passform zugeschnitten werden.*

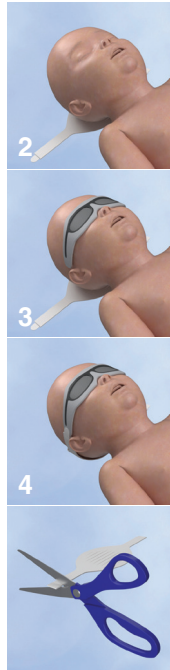

### VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

NeoShades sind nicht für den Einsatz an Erwachsenen vorgesehen.

Nach Bundesgesetz darf dieser Artikel nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

NeoShades sollten nur dann verwendet werden, während der Patient sich unter ständiger, direkter Aufsicht von Gesundheitsfachkräften befindet.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands