


## NeoBar®

### ABRAÇADEIRA ET

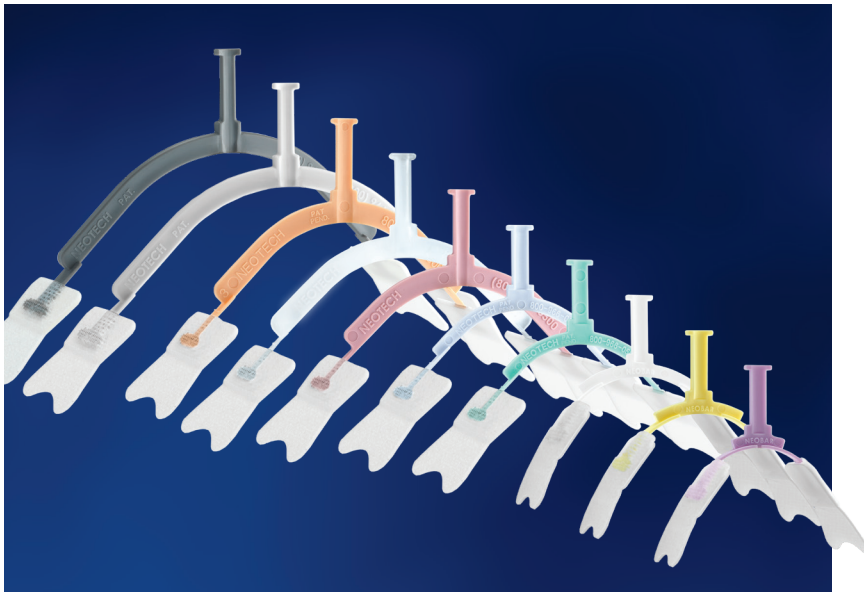

#### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Abas de hidrocolóide NeoBond® que não agriem a pele
- Tamanhos Macro e Jumbo disponíveis com adesivo acrílico de grau médico
- Criado para reduzir extubações, ajudar a prevenir o trauma do palato e permitir melhor higiene bucal
- Elimina a necessidade de fita adesiva perto do nariz ou boca
- Tamanhos codificados por cores
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Cat. #	Tamanho	Cor	Unidade de quantidade
N709	Mini	Roxa	5/caixa
N710	Ultra	Amarela	5/caixa
N711	Micro	Branca	5/caixa
N712	Pequena	Verde	5/caixa
N713	Grande	Azul	5/caixa
N714	XL	Rosa	5/caixa
N715H	Macro	Clara	5/caixa
N716H	Jumbo	Cinza	5/caixa
<b>Com adesivo acrílico de grau médico</b>			
N715F	Macro	Pêssego	5/caixa
N716F	Jumbo	Carbono	5/caixa
<b>Sortida</b>			
N718 Transporte (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			
N719N Sortida (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Patente dos EUA  
#D434,496; #6,050,263



### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoBar é indicado para usar como proteção do tubo endotraqueal. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### Preparação

- 1 Depois de intubar o paciente, selecione o tamanho adequado do NeoBar usando a fita métrica fornecida com este.

Coloque a linha média da banda no septo, cobrindo o ouvido. A cor que ficar sobre a abertura do canal auditivo corresponde ao tamanho do NeoBar.

*Nota: se não tiver a certeza entre dois tamanhos, tente primeiro o tamanho menor.*

- 2 Para garantir um encaixe adequado, posicione o NeoBar no centro da boca, entre os lábios superior e inferior. O NeoBar não deve entrar em contato com os lábios. As alças hidrocolóides devem estar na frente do ouvido.

- 3 Limpe e seque a pele das bochechas, de acordo com o protocolo hospitalar.

*Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. As alças adesivas hidrocolóides não aderem devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.*

NÃO UTILIZAR ÁLCOOL.

#### Aplicação

- 1 Antes de remover os revestimentos plásticos, as alças adesivas hidrocolóides devem ser aquecidas ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a 15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a 15 segundos.

- 2 Descasque e descarte os revestimentos de plástico. Posicione as alças adesivas hidrocolóides na frente do osso da orelha e mantenha-as no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.

*Nota: Certifique-se de que o tubo ET está por baixo da plataforma para reduzir a pressão no palato ou na gengiva.*

- 3 Primeiro enrole 1/2 (12.5 mm) de "fita de tecido branca completamente ao redor da plataforma NeoBar, em seguida, continue a aplicar a fita ao redor da plataforma e do tubo endotraqueal.

#### Remoção

- 1 Substitua o NeoBar a cada 5 dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Desembrulhe a fita para separar o tubo ET da plataforma NeoBar.
- 3 Sature as alças com água ou soro fisiológico.
- 4 Descole lentamente as alças adesivas hidrocolóides da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.

### - CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS -

O NeoBar é contraindicado para pacientes com infecções de pele ou áreas de pele escoriadas que impediriam o correto posicionamento das alças.

Não se destina a ser usado em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

O NeoBar só deve ser usado em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoBar não deve entrar em contato com os lábios.

As alças adesivas hidrocolóides não aderem devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.

Não utilizar álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Utilizar apenas num único paciente.