


NeoBar®

REGGITUBO ENDOTRACHEALE

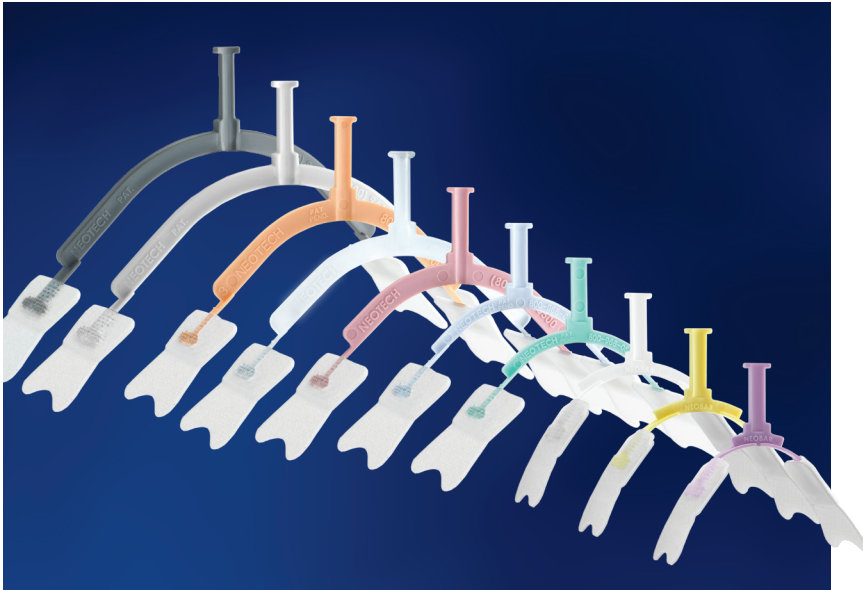

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Le alette NeoBond® sono realizzate in materiale idrocolloidale e rispettano la pelle
- Taglie macro e maxi disponibili con adesivo acrilico a uso medico
- Progettato per ridurre estubazioni, consente di evitare traumi al palato e permette una migliore igiene orale
- Elimina la necessità di applicare nastro adesivo vicino a naso e bocca
- Taglie classificate per colore
- Non contiene lattice di gomma naturale o plastificante DEHP
- Confezionato singolarmente

Cat. #	Dimensione	Colore	Qtà/Unità
N709	Mini	Viola	5/scatola
N710	Ultra	Gialla	5/scatola
N711	Micro	Bianca	5/scatola
N712	Piccola	Verde	5/scatola
N713	Larga	Blu	5/scatola
N714	XL	Rosa	5/scatola
N715H	Macro	Chiara	5/scatola
N716H	Jumbo	Grigio	5/scatola
Con adesivo acrilico di grado medico			
N715F	Macro	Pesca	5/scatola
N716F	Jumbo	Carbonio	5/scatola
Assortite			
N718 Trasporto (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			
N719N Assortite (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Brevetto USA
#D434,496; #6,050,263



INDICAZIONI D'USO

NeoBar è indicato per posizionare saldamente i tubi endotracheali. È destinato all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

- 1 Dopo che il paziente viene intubato, selezionare la taglia adatta utilizzando il nastro adesivo in dotazione.

Posizionare la linea centrale della striscia in corrispondenza del setto nasale e avvolgerla all'orecchio. Il colore sopra l'apertura del condotto uditivo corrisponde alla taglia NeoBar adatta.

Nota: in caso di dubbio tra due taglie, provare prima la più piccola.

- 2 Per garantire un corretto adattamento, posizionare NeoBar al centro della bocca, tra il labbro superiore e quello inferiore. NeoBar non deve venire a contatto con le labbra. Le alette idrocolloidi devono essere posizionate di fronte all'orecchio.

- 3 Pulire e asciugare la pelle delle guance secondo il protocollo ospedaliero.

Nota: è importante che la pelle sia il più possibile pulita e asciutta. Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

- 1 Prima di rimuovere il rivestimento plastico, scaldare direttamente le alette adesive idrocolloidi. Le tecniche di riscaldamento includono: tenere tra i palmi delle mani per almeno 60 secondi, tenere vicino a un riscaldatore radiante per 10-15 secondi o tenere a contatto con un dispositivo chimico di riscaldamento per talloni per 10-15 secondi.

- 2 Staccare e gettare via il rivestimento plastico. Applicare le alette adesive idrocolloidi di fronte all'orecchio sull'osso e tenerle in posizione per 60 secondi per garantire la corretta adesione.

Nota: assicurarsi che il tubo endotracheale si trovi al di sotto della piattaforma per ridurre la pressione sul palato e sulle gengive.

- 3 Avvolgere completamente 1/2" (12,5 mm) di nastro adesivo bianco o di stoffa attorno alla piattaforma NeoBar e successivamente continuare ad applicare il nastro sia su quest'ultima che sul tubo endotracheale.

Rimozione

- 1 Sostituire il prodotto ogni 5 giorni o secondo le indicazioni dell'ospedale, preferendo l'opzione che preveda una maggior frequenza.
- 2 Rimuovere il nastro per separare il tubo endotracheale dalla piattaforma NeoBar.
- 3 Impregnare le alette di acqua o soluzione salina.
- 4 Staccare lentamente le alette adesive idrocolloidi dalla pelle tamponando contemporaneamente con acqua o soluzione fisiologica.

— CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI —

NeoBar è controindicato nei pazienti con infezioni o escoriazioni, le quali impedirebbero la giusta adesione delle alette sulla pelle.

Non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o consentita su prescrizione medica.

NeoBar deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Evitare il contatto del prodotto con le labbra.

Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

Non utilizzare alcol per pulire la pelle prima dell'applicazione del prodotto.

Esclusivamente monouso.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC, 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Fabbricato
Negli USA

M695 Rev B