

NeoShades® con alette

SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA



N724



N725



N726



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Schermi protettivi realizzati in materiale morbido e imbottito, design simile a occhiali da sole
- Tasche oculari progettate per offrire comfort e sicurezza al paziente (N724, N725, N726)
- Le alette NeoBond® sono realizzate in materiale idrocolloidale, rispettano la pelle e mantengono NeoShades in posizione
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionato singolarmente

Cat #	Elemento	Qtà/Unità
N720	Micro	50/scatola
N721	Piccola	50/scatola
N722	Larga	50/scatola
Con tasche oculari		
N724	Micro	50/scatola
N725	Piccola	50/scatola
N726	Larga	50/scatola

Brevetto USA #8,070,288;

Ulteriori brevetti in corso di registrazione



NeoShades® con alette

SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA

INDICAZIONI D'USO

I prodotti NeoShades sono indicati per proteggere gli occhi durante le sedute di fototerapia. Sono destinati all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

- 1 Selezionare la taglia corretta.

Taglia indicativa:

Micro: 28 settimane o meno


Small: 29-36 settimane

Large: 37 settimane o più

- 2 Pulire e asciugare la pelle delle tempie secondo il protocollo ospedaliero.

Nota: è importante che la pelle sia il più possibile pulita e asciutta. Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

NON USARE ALCOL.

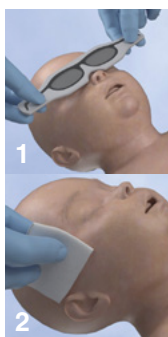


Applicazione

- 1 Rimuovere con attenzione le alette idrocolloidi dagli schermi protettivi per gli occhi.

Prima di rimuovere il rivestimento plastico, scaldare direttamente le alette adesive idrocolloidi. Le tecniche di riscaldamento includono: tenere tra i palmi delle mani per almeno 60 secondi, tenere vicino a un riscaldatore radiante per 10-15 secondi o tenere a contatto con un dispositivo chimico di riscaldamento per talloni per 10-15 secondi.

- 2 Staccare e gettare via il rivestimento plastico. Posizionare le alette adesive idrocolloidi sulle tempie e tenerle in posizione per 60 secondi per garantire la corretta adesione.
- 3 Coprire gli occhi con NeoShades e fissare con delicatezza alle alette adesive idrocolloidi.

Nota: lasciare esposta una parte dell'aletta per semplificarne la rimozione.

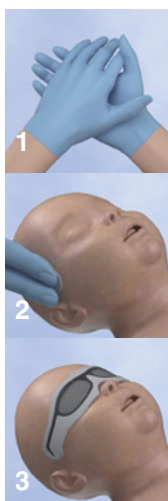

Rimozione

- 1 Sostituire le alette adesive idrocolloidi NeoShades sulla pelle ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, se quest'ultimo indica di sostituirle prima.
 - 2 Tenere in posizione il bordo dell'aletta adesiva idrocolloide e separare lentamente NeoShades dalla aletta.
 - 3 Saturare la aletta adesiva idrocolloide con acqua o soluzione fisiologica.
 - 4 Staccare lentamente la aletta adesiva idrocolloide dalla pelle tamponando contemporaneamente con acqua o soluzione fisiologica.
- Ripetere l'azione sul lato opposto.



CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il prodotto è controindicato nei pazienti con deformazioni facciali, infezioni o escoriazioni alla pelle, le quali impedirebbero la giusta adesione delle alette sulla pelle. Il prodotto non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

NeoShades deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

In caso di utilizzo discontinuo di NeoShades, verificare sempre l'integrità delle alette idrocolloidi alla rimozione degli schermi protettivi per gli occhi. Se le alette idrocolloidi si staccano dalla pelle, rimuoverle secondo le istruzioni per l'uso e applicare nuove alette idrocolloidi prima della ripresa della fototerapia.

Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

Prima dell'applicazione, non usare alcol per detergere la pelle.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e magazzinaggio.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands

M701 Rev C