


## NeoShades® con cinghia di sostegno

SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA



N727

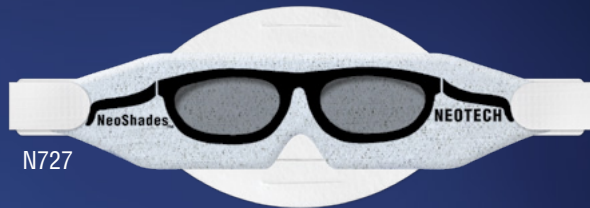

N728



N729

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Schermi protettivi realizzati in materiale morbido e imbottito, design simile a occhiali da sole
- Tasche oculari progettate per offrire comfort e sicurezza al paziente
- La morbida cinghia di sostegno autorizzata NeoFoam® mantiene NeoShades in posizione
- Cinghia di sostegno rimovibile progettata per evitare che gli schermi scivolino
- Forma della cinghia progettata per garantire un'adattabilità ottimale
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionato singolarmente

Cat. #	Elemento	Qtà/Unità
N727	Micro	50/scatola
N728	Piccola	50/scatola
N729	Larga	50/scatola



Brevetto USA #8,070,288;  
Ulteriori brevetti in corso di registrazione



# NeoShades® con cinghia di sostegno

## SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA

### INDICAZIONI D'USO

I prodotti NeoShades sono indicati per proteggere gli occhi durante le sedute di fototerapia. Sono destinati all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

### ISTRUZIONI PER L'USO

**1** Selezionare la taglia corretta.

Taglia indicativa:

Micro: 28 settimane o meno

Small: 29-36 settimane


Large: 37 settimane o più

**2** Posizionare la cinghia sotto la testa con il lato liscio in gommapiuma rivolto verso quest'ultima.

**3** Coprire gli occhi con NeoShades.

**4** Collegare delicatamente il tessuto del gancio presente all'estremità della cinghia a NeoShades. Ripetere l'azione sul lato opposto.

*Nota: le cinghie possono essere tagliate per adattarsi al paziente.*

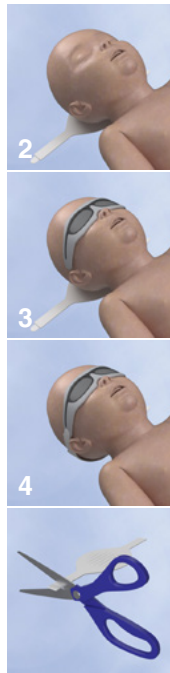

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

NeoShades non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

NeoShades deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e magazzinaggio

È possibile vedere la Dichiarazione di conformità sul sito Web di Neotech: [www.neotechproducts.com](http://www.neotechproducts.com)

La data di scadenza è riportata sull'imballaggio esterno e sulla scatola del prodotto



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands

M702 Rev C