

NeoShades[®] con cinghia di sostegno

SCHEMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Schermi protettivi realizzati in materiale morbido e imbottito, design simile a occhiali da sole
- Tasche oculari progettate per offrire comfort e sicurezza al paziente
- La morbida cinghia di sostegno autorizzata NeoFoam[®] mantiene NeoShades in posizione
- Cinghia di sostegno rimovibile progettata per evitare che gli schermi scivolino
- Forma della cinghia progettata per garantire un'adattabilità ottimale
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionato singolarmente

Cat. #	Elemento	Qtà/Unità
N727	Micro	50/scatola
N728	Piccola	50/scatola
N729	Larga	50/scatola

Brevetto USA #8,070,288;
Ulteriori brevetti in corso di registrazione



NeoShades® con cinghia di sostegno

SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA

INDICAZIONI D'USO

I prodotti NeoShades sono indicati per proteggere gli occhi durante le sedute di fototerapia. Sono destinati all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

1 Selezionare la taglia corretta.

Taglia indicativa:

Micro: 28 settimane o meno

Small: 29-36 settimane


Large: 37 settimane o più

2 Posizionare la cinghia sotto la testa con il lato liscio in gommapiuma rivolto verso quest'ultima.

3 Coprire gli occhi con NeoShades.

4 Collegare delicatamente il tessuto del gancio presente all'estremità della cinghia a NeoShades. Ripetere l'azione sul lato opposto.

Nota: le cinghie possono essere tagliate per adattarsi al paziente.

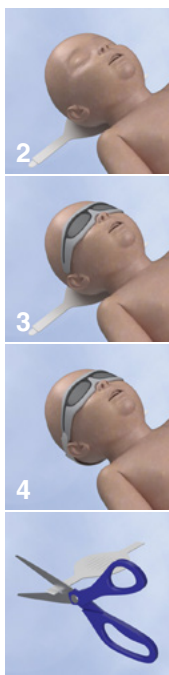

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

NeoShades non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

NeoShades deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e magazzinaggio

È possibile vedere la Dichiarazione di conformità sul sito Web di Neotech: www.neotechproducts.com

La data di scadenza è riportata sull'imballaggio esterno e sulla scatola del prodotto



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands