


NeoBar[®]

STABILIZATOR RURKI INTUBACYJNEJ

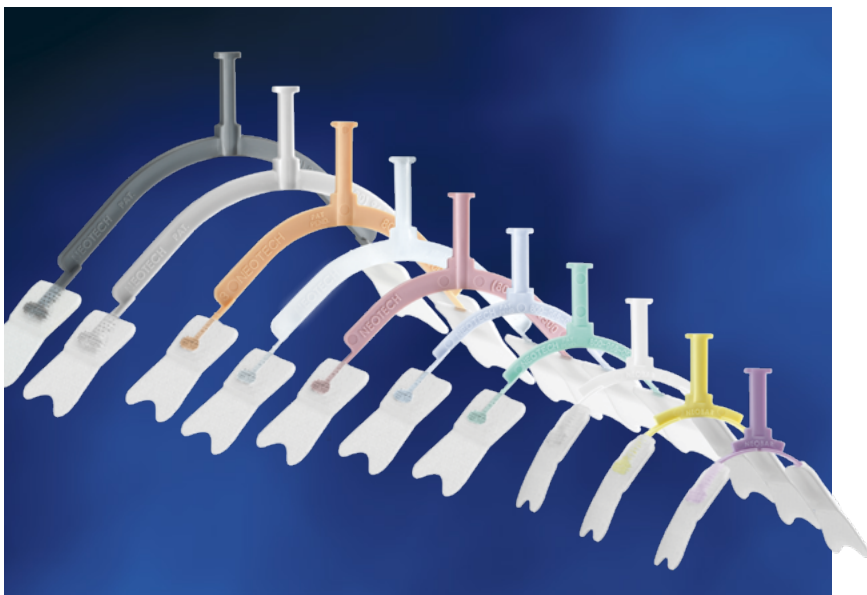

CECHY PRODUKTU

- Hydrokoloidowe plastry NeoBond[®] nieszkodliwe dla skóry
- Rozmiary Macro i Jumbo z przylepną warstwą akrylową przeznaczoną do zastosowań medycznych
- Produkt ogranicza ryzyko samoistnej ekstubacji, pomaga zapobiegać urazom podniebienia i zapewnia lepszą higienę jamy ustnej
- Zastępuje taśmę mocowaną w pobliżu nosa lub ust
- Oznaczenie rozmiarów kolorami
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog nr	Rozmiar	Kolor	Ilość/jednostka
N709	Mini	Fioletowy	5/skrzynka
N710	Ultra	Żółty	5/skrzynka
N711	Mikro	Biały	5/skrzynka
N712	Mały	Zielony	5/skrzynka
N713	Wielki	Niebieski	5/skrzynka
N714	XL	Róża	5/skrzynka
N715H	Makro	Jasne	5/skrzynka
N716H	Landara	Szary	5/ skrzynka
Z klejem akrylowym klasy medycznej			
N715F	Makro	Brzoskwinia	5/skrzynka
N716F	Landara	Węgiel	5/skrzynka
Mieszany			
N718 Transport (1 każdy N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Patent USA
#D434,496; #6,050,263



ZASTOSOWANIE

Stabilizator NeoBar służy do unieruchamiania rurki intubacyjnej. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

- 1 Po zaintubowaniu pacjenta wybierz odpowiedni rozmiar stabilizatora NeoBar, korzystając z dostarczonej taśmy pomiarowej NeoBar.

Umieścić środkową linię paska na przegrodzie nosowej i zawinąć w stronę ucha. Kolor, który wypada nad otworem przewodu słuchowego, odpowiada prawidłowemu rozmiarowi NeoBar.

Uwaga: w przypadku braku pewności co do wyboru jednego z dwóch rozmiarów należy najpierw przymierzyć mniejszy rozmiar.

- 2 Aby zapewnić właściwe dopasowanie, należy umieścić NeoBar na środku ust, pomiędzy górną i dolną wargą. NeoBar nie powinien dotykać ust. Plastry hydrokoloidowe muszą znajdować się tuż przed uchem.
- 3 Oczyszczyć i wytrzeć skórę na policzkach zgodnie z procedurą szpitalną.

Uwaga: skóra powinna być możliwie jak najczystsza i jak najbardziej sucha. Plastry hydrokoloidowe nie będą prawidłowo przylegać do wilgotnej skóry i włosów. Olejki i balsamy niekorzystnie wpływają na przywieranie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

- 1 Plastry hydrokoloidowe muszą być aktywnie ogrzewane przed usunięciem plastikowych osłonek. Techniki rozgrzewania obejmują: trzymanie między dłońmi przez co najmniej 60 sekund, trzymanie w pobliżu ogrzewacza promiennikowego przez 10-15 sekund lub trzymanie przy chemicznym ogrzewaczu pięt przez 10-15 sekund.
- 2 Oderwać i zutylizować plastikową osłonkę. Nałożyć plastry hydrokoloidowe z przodu ucha na kość i przytrzymać w miejscu przez 60 sekund, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
Uwaga: Należy się upewnić, że rurka intubacyjna znajduje się poniżej ramki, aby zmniejszyć nacisk na podniebienie lub dziąsła.
- 3 Najpierw owiń 1,2 cm taśmy przylepnej z papieru lub tkaniny całkowicie wokół ramki NeoBar, a następnie kontynuuj owijanie ramki i rurki.

Usuwanie

- 1 Wymieniaj stabilizator Neobar na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
- 2 Odwiń taśmę, aby odłączyć rurkę intubacyjną od ramki NeoBar.
- 3 Nasącz plastry wodą lub solą fizjologiczną.
- 4 Powoli oderwać plastry hydrokoloidowe od skóry, przecierając ją wodą lub solą fizjologiczną.

— PRZECIWWSKAZANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA —

Stabilizator NeoBar nie powinien być stosowany w przypadku infekcji skórnej lub uszkodzenia skóry uniemożliwiającego prawidłowe przymocowanie plastrów.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Stabilizator NeoBar powinien być używany wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust.

Plastry hydrokoloidowe nie będą prawidłowo przylegać do wilgotnej skóry i włosów. Olejki i balsamy niekorzystnie wpływają na przywieranie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.