

## NeoShades<sup>®</sup> z Opaską Mocującą

OKULARKI OCHRONNE DO FOTOTERAPII



### CECHY PRODUKTU

- Miękki materiał zapewniający ochronę oczu z estetycznym wzorem okularów
- Okularki zapewniające komfort i bezpieczeństwo pacjentów
- Miękka, opatentowana opaska NeoFoam<sup>®</sup> umożliwiająca prawidłowe zamocowanie okularków NeoShades
- Regulacja opaski minimalizuje ryzyko zsunęcia się i ucisku na główkę pacjenta
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog nr	Przedmiot	Ilość/Jednostka
N727	Mikro	50/skrzynka
N728	Mały	50/skrzynka
N729	Wielki	50/skrzynka

Patent USA #8,070,288;  
Dodatkowe patenty w toku



# NeoShades® z Opaską Mocującą

## OKULARKI OCHRONNE DO FOTOTERAPII

### ZASTOSOWANIE

Okularki NeoShades służą do ochrony oczu podczas fototerapii. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

**1** Wybierz odpowiedni rozmiar produktu.

Przybliżone rozmiary:

Mikro – Do 28 tygodni

Mały – 29-36 tygodni

Duży – 37 tygodni i więcej


**2** Ułóż opaskę na potylicy pacjenta, tak aby strona pokryta pianką przylegała do skóry.

**3** Osłoń oczy okularkami NeoShades.

**4** Ostrożnie przymocuj rzep na zakończeniu opaski do okularków NeoShades.

Wykonaj ponownie powyższe czynności po drugiej stronie.

*Uwaga: Opaski można regulować w celu prawidłowego zamocowania.*

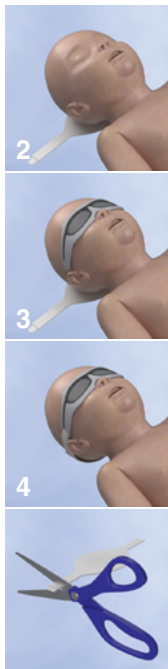

### PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Okularki NeoShades nie są przeznaczone dla osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Okularki NeoShades powinny być używane wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Zastosowanie mają ogólne zasady transportu i przechowywania.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2023 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands

M709 Rev C