


NeoShades[®] z Opaską Mocującą

OKULARKI OCHRONNE DO FOTOTERAPII

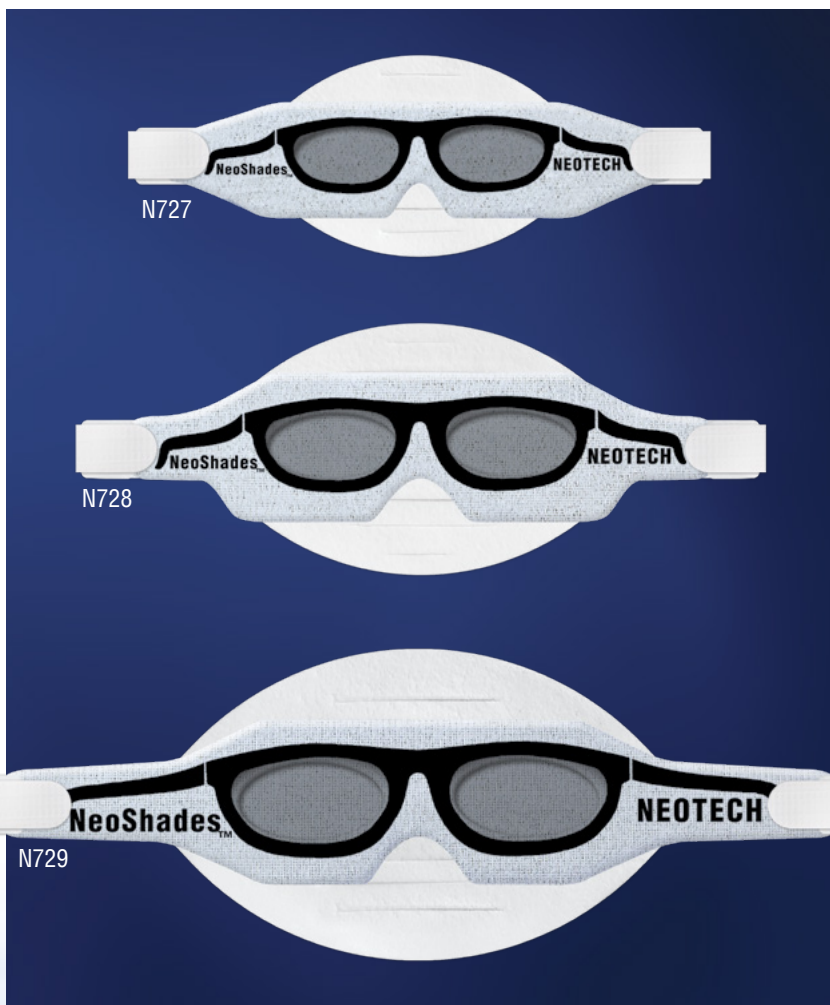

CECHY PRODUKTU

- Miękki materiał zapewniający ochronę oczu z estetycznym wzorem okularów
- Okularki zapewniające komfort i bezpieczeństwo pacjentów
- Miękka, opatentowana opaska NeoFoam[®] umożliwiająca prawidłowe zamocowanie okularków NeoShades
- Regulacja opaski minimalizuje ryzyko zsunięcia się i ucisku na główkę pacjenta
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog nr	Przedmiot	Ilość/Jednostka
N727	Mikro	50/skrzynka
N728	Mały	50/skrzynka
N729	Wielki	50/skrzynka

Patent USA #8,070,288;
Dodatkowe patenty w toku

NeoShades® z Opaską Mocującą

OKULARKI OCHRONNE DO FOTOTERAPII

ZASTOSOWANIE

Okulary NeoShades służą do ochrony oczu podczas fototerapii. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1 Wybierz odpowiedni rozmiar produktu.

Przybliżone rozmiary:

Mikro – Do 28 tygodni

Mały – 29-36 tygodni

Duży – 37 tygodni i więcej


2 Ułóż opaskę na potylicy pacjenta, tak aby strona pokryta pianką przylegała do skóry.

3 Osłoń oczy okularkami NeoShades.

4 Ostrożnie przymocuj rzep na zakończeniu opaski do okularków NeoShades.

Wykonaj ponownie powyższe czynności po drugiej stronie.

Uwaga: Opaski można regulować w celu prawidłowego zamocowania.

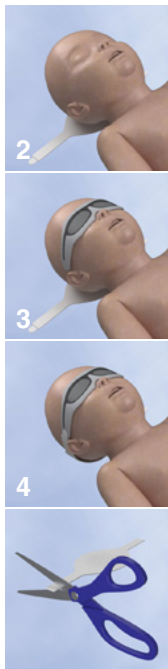

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Okulary NeoShades nie są przeznaczone dla osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Okulary NeoShades powinny być używane wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Zastosowanie mają ogólne zasady transportu i przechowywania.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands