


# NeoBar<sup>®</sup>

## DRŽÁK ENDOTRACHEÁLNÍ KANYLY

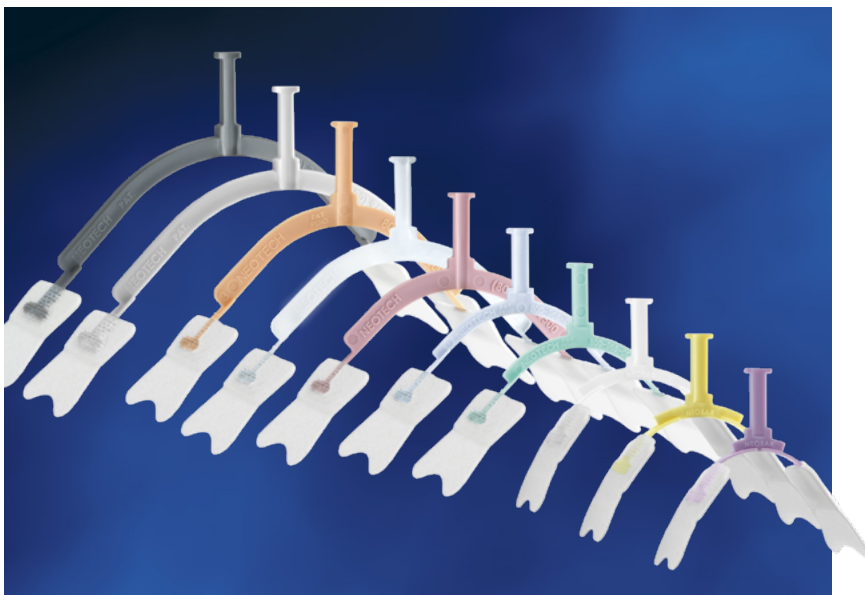

### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Materiál NeoBond<sup>®</sup> šetrný k pokožce na hydrokoloidní bázi
- K dispozici jsou velké velikosti „makro“ a „jumbo“ s akrylátovým lepidlem s lékařským stupněm čistoty
- Navrženo pro snížení extubace, pomáhá zabránit poranění patra a umožňuje lepší péči o dutinu ústní
- Eliminuje nutnost použití pásky v blízkosti nosu nebo úst
- Barevně odlišené velikosti
- Nejen vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog #	Velikost	Barva	Množství/Jednotka
N709	Mini	Nachový	5/krabice
N710	Ultra	Žlutá	5/krabice
N711	Micro	Bílý	5/krabice
N712	Malý	Zelená	5/krabice
N713	Velký	Modrý	5/krabice
N714	XL	Růžové	5/krabice
N715H	Makro	Průhledná	5/krabice
N716H	Jumbo	Šedá	5/krabice
<b>S akrylovým lepidlem lékařské kvality</b>			
N715F	Makro	Broskev	5/krabice
N716F	Jumbo	Uhlík	5/krabice
<b>Roztříděný</b>			
N718 Doprava (1 každý N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

US Patent  
#D434,496; #6,050,263



### INDIKACE PRO POUŽITÍ

Držák NeoBar je určen k použití pro zajištění endotracheální kanyly. Je určen pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Příprava

- 1 Pomocí dodávané měřicí pásky NeoBar vyberte po zaintubování pacienta správnou velikost držáku NeoBar.

Střední linii pásky položte na nosní přepážku a rozviňte k uchu. Barva, která překrývá otvor zvukovodu, odpovídá správné velikosti držáku NeoBar.

*Poznámka: pokud se nevíte rozhodnout mezi dvěma velikostmi, zkuste nejprve menší velikost.*

- 2 Abyste zajistili, že bude držák NeoBar správně sedět, umístěte jej přes střed úst, mezi horní a dolní ret. Držák NeoBar by se neměl rtů dotýkat. Hydrokoloidní připevňovací proužky musejí být jen v přední části uší.
- 3 Pokožku na hýždích očistěte a osušte dle postupů nemocnice.

*Poznámka: Je důležité, aby pokožka byla co nejčistší a nejsušší. Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a masti nepříznivě ovlivňují přilnutí.*

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

#### Použití

- 1 Před odstraněním plastových fólií se musí hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky aktivně zahřát. Techniky zahřívání zahrnují: podržení mezi dlaněmi po dobu minimálně 60 sekund, podržení v blízkosti sálavého ohřívače po dobu 10-15 sekund nebo podržení proti chemickému ohřívači nohou po dobu 10-15 sekund.
  - 2 Sloupněte a vyhodte plastové fólie. Aplikujte hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky před ucho na kosti a po dobu 60 sekund je podržte na místě, abyste zajistili správnou přilnavost.
- Poznámka: Přesvědčte se, že endotracheální kanyla je pod platformou, aby se snížil tlak na patro nebo na dásně.*
- 3 Nejprve oviňte 1/2" (12,5 mm) bílé nebo textilní pásky zcela kolem platformy NeoBar, potom pokračujte jak kolem platformy, tak kolem kanyly ET.

#### Odstranění

- 1 Držák NeoBar vyměňujte každých 5 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.

- 2 Odviňte pásku a oddělte endotracheální kanylu od platformy NeoBar.
- 3 Nasákněte připevňovací proužky vodou nebo fyziologickým roztokem.
- 4 Pomalu odlupujte hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky z pokožky a přitom otírejte vodou nebo fyziologickým roztokem.

### KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Držák NeoBar je kontraindikován u pacientů s obličejovou deformací, kožní infekcí nebo s oblastmi s odřenou kůží, které by bránily správnému umístění připevňovacích proužků.

Není určen pro použití u dospělých pacientů.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Držák NeoBar by měl být použit jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým dohledem proškolených zdravotníků.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Držák NeoBar by se neměl rtů dotýkat.

Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a masti nepříznivě ovlivňují přilnutí.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Pouze pro jednoho pacienta.