


# Neotech ChinStrap™

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODPORU PŘI RESPIRAČNÍ TERAPII

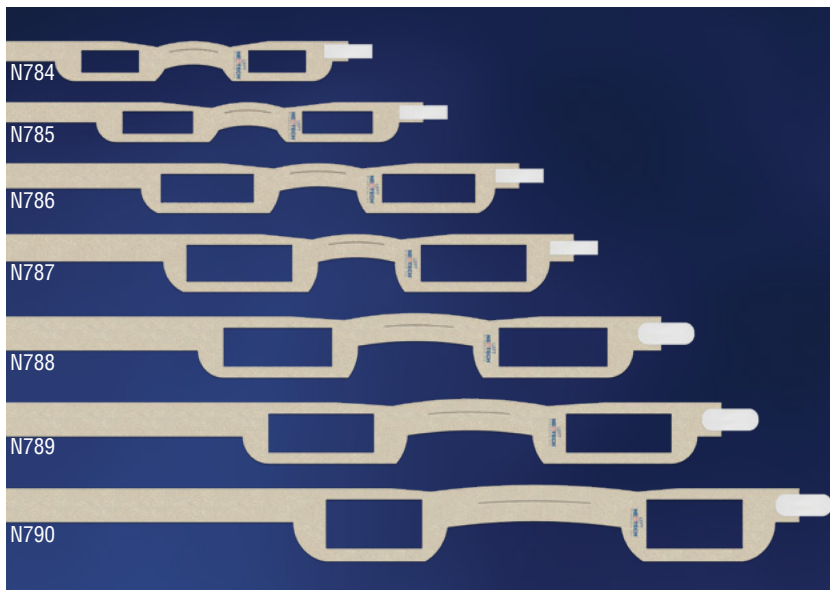

### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Měkký, prodyšný materiál NeoFoam<sup>®</sup>, šetrný k pokožce, odvádí pot
- Flexibilita umožňuje minimální pohyb úst
- Padnoucí a nastavitelné
- Provedení s rozdělenou bradou pro pohodlí a stabilitu
- Otvory na uši zabraňují přeložení
- Navrženo pro snížení rizika vzniku vředů či nekrotů
- Jedinečný materiál pomáhá zabraňovat klouzání
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog #	Položka	Množství/jednotka
N784	Nano	20/krabice
N785	Micro	20/krabice
N786	Malý	20/krabice
N787	Velký	20/krabice
N788	X-velký	20/krabice
N789	Makro	20/krabice
N790	Jumbo	20/krabice

U.S. Patent #10,342,693



Vyrobeno  
v USA

# Neotech ChinStrap™

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODPORU PŘI RESPIRAČNÍ TERAPII

### INDIKACE PRO POUŽITÍ

Účelem podpěry Neotech ChinStrap je pomoci udržovat během respirační terapie zavřená ústa pacienta. Je určena k použití u pediatrických (novorozenců, kojenců, dětí a adolescentů) a dospělých pacientů.

### NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Vyberte správnou velikost na základě změření obvodu od středu brady přes ucho k zadní části hlavy.
- 2 Umístěte podpěru Neotech ChinStrap přes bradu s prohlubní směřující ke krku a s hladkou bílou stranou proti pokožce.
- 3 Širší, spodní část rozděleného bradového popruhu umístěte pod bradu a horní část přes přední část brady
- 4 Zatáhněte popruh směrem k zadní části hlavy, přičemž uši jsou umístěné uvnitř ušních otvorů, a jemně přitiskněte připevňovací proužek k popruhu. Strana označená „LEFT“ (levá strana) by měla být pod levým uchem pacienta.



*Poznámka: Lze zkrátit tak, aby vše správně sedělo. Ujistěte se, že popruh není příliš těsný ani netlačí na uši. Připevňovací proužek by měl zcela popruh překrývat.*

- 5 Vyměňujte každých 5 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.

Vyměňte okamžitě, pokud je podpěra opotřebovaná nebo viditelně špinavá.

### UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M715 Rev C 2025.01.10

