


NeoBridge[®]

FIXIERPFLASTER FÜR NABELKATHETER

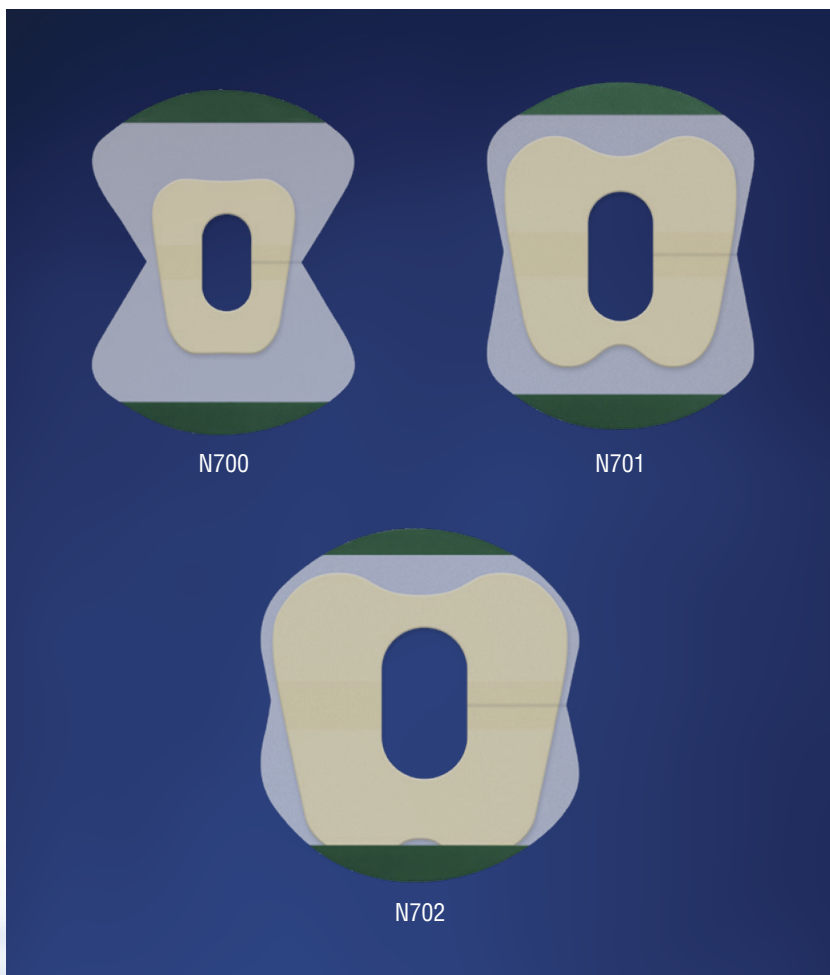

MERKMALE & VORTEILE

- Hautfreundliche NeoBond[®]-Hydrokolloid-Basis
- Sichere Positionierungsflügel, die die Kanülen möglichst wenig belasten und einem Verrutschen vorbeugen
- Für bis zu zwei Katheter
- Flügel können mehrfach geöffnet und wieder verschlossen werden
- Transparente Flügel für bessere Sichtbarkeit
- Ohne Naturkautschuklatex und DEHP-Weichmacher
- Einzeln verpackt

Katalog	Größe	Ca. Gewicht	Mengeneinheit
N700	Mikro	800 or less	20/Kasten
N701	Klein	800-1200 gm	20/Kasten
N702	Groß	1200-2200 gm	20/Kasten

U.S. Patent #5,370,627



NeoBridge®

FIXIERPFLASTER FÜR NABELKATHETER

GEBRAUCHSHINWEIS

NeoBridge dient zur Verankerung und Unterstützung von Nabelkathetern. Zum Gebrauch bei pädiatrischen Patienten (Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder).

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung

Nach Einführen des Katheters Haut gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und trocknen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so rein und trocken wie möglich ist. Auf feuchter oder behaarter Haut haftet NeoBridge nicht einwandfrei. Auch Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftwirkung.

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN.

Anwendung

- 1 Vor dem Abziehen der Kunststoffolie muss der Hydrokolloidkleber aktiv erwärmt werden. Dazu gibt es u. a. die folgenden Möglichkeiten: Mindestens 60 Sekunden zwischen den Handflächen wärmen; 10 - 15 Sekunden an einen Wärmestrahler oder einen chemischen Fersenwärmer halten.
- 2 Weißes Schutzpapier entsorgen, anschließend transparente Kunststoff-Schutzfolie von der Hydrokolloid-Basis ablösen und entsorgen.
- 3 NeoBridge mittig über Katheter schieben. Darauf achten, dass der Schlitz sich auf der rechten Seite befindet und das breitere Ende der Hydrokolloid-Basis zum Kopf des Patienten zeigt.
- 4 Basis auf Haut anbringen und für einwandfreien Halt 60 Sekunden lang andrücken.
- 5 Mattierte Schutzfolie vom oberen Flügelteil ablösen und entsorgen. Flügel nach oben klappen und Katheter am Flügel so befestigen, dass ein Bogen oder ein U entsteht, um möglichst wenig Spannung durch den bzw. die seitlich austretenden Katheter zu erzeugen.

Hinweis: Der bzw. die Katheter sollten den grünen Bereich des Flügels nicht berühren. Bei Verwendung von zwei Kathetern darauf achten, dass an jeder Seite des Flügels ein Katheter austritt.

- 6 Mattierte Schutzfolie vom unteren Flügelteil ablösen und entsorgen. Flügel nach oben klappen und an grünem Bereich des oberen Teils ausrichten. Dann beide Flügel fest aufeinanderdrücken, sodass der bzw. die Katheter zwischen den Klebeflächen eingeschlossen werden.
- 7 Bei Bedarf zur Entfernung oder Neupositionierung des Katheters/der Katheter die Flügel auseinanderziehen und anschließend wieder sicher verschließen.

Entfernung

- 1 NeoBridge gemäß Krankenhausprotokoll oder wenigstens alle 5 Tage erneuern.
- 2 Flügel auseinanderziehen, um Katheter zu entfernen.
- 3 NeoBridge mit Wasser oder Kochsalzlösung durchtränken.
- 4 NeoBridge vorsichtig von der Haut abziehen und die Haut dabei mit Wasser oder Kochsalzlösung abtupfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Nach Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

NeoBridge darf nur verwendet werden, während der Patient sich unter sorgfältiger, direkter Überwachung von medizinischem Fachpersonal befindet.

Bei Hautreizungen unverzüglich entfernen.

Auf feuchter oder behaarter Haut haftet NeoBridge nicht einwandfrei. Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftwirkung.

Zur Reinigung der Haut vor der Anwendung keinen Alkohol verwenden.

Nur für den Einmalgebrauch.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2024 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M747 Rev B 2024.09.20

