


NeoShades[®] Med Mjukt Nackband

OČNÍ ŠTÍTY PRO FOTOTERAPII

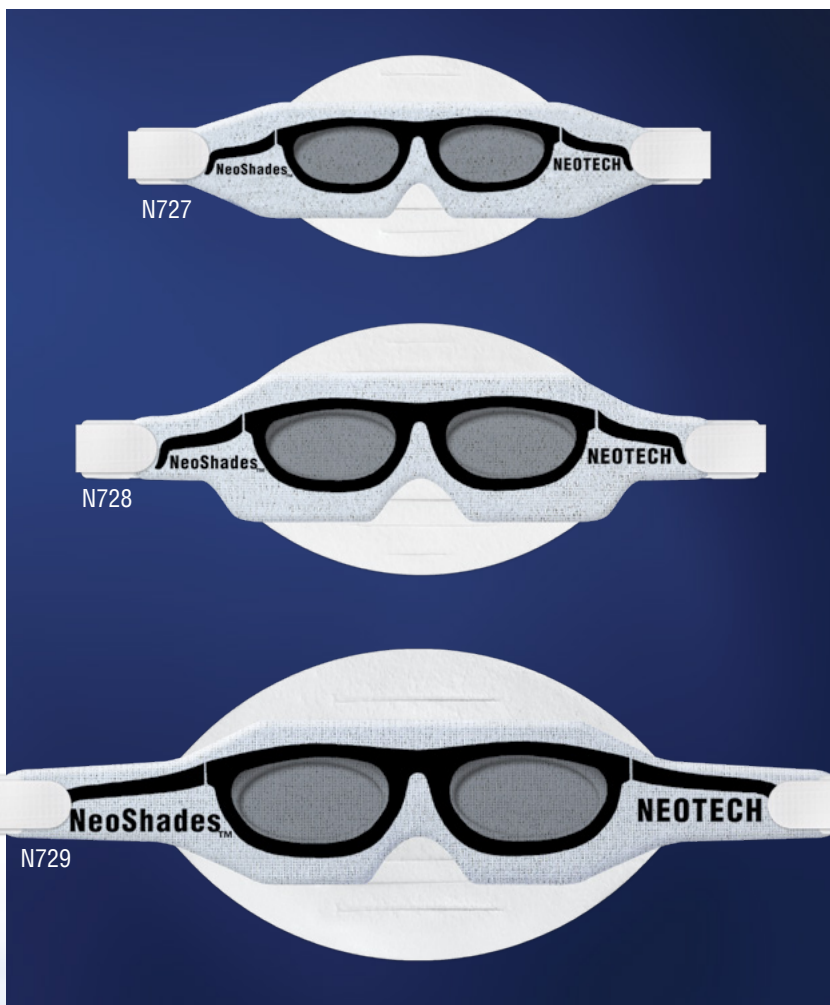

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Mjuka, vadderade ögonskydd med snygg solglasögondesign
- Ögonfickor utformade för patientkomfort och -säkerhet
- Mjukt, patenterat NeoFoam[®] huvudband håller NeoShades på plats
- Justerbart huvudband utformat för att minimera glidning och förhindra anpassning till huvudformen
- Unik huvudbandsform utformad för att säkerställa optimal passform
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Singelpackning

Antal	Punkt	Antal/Enhet
N727	Micro	50/låda
N728	Små	50/låda
N729	Stor	50/låda

Amerikanskt patent nr 8 070 288;
Ytterligare patentansökningar inlämnade



Tillverkad i USA

NeoShades® Med Mjukt Nackband

OČNÍ ŠTÍTY PRO FOTOTERAPII

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoShades® används för att täcka barnets ögon under fototerapi. De är avsedda för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1 Välj rätt storlek.

Ungefärlig dimensionering:
Micro – 28 veckor och yngre
Small – 29-36 veckor
Large – 37 veckor och äldre


2 Placera nackbandet mot bakhuvudet med huvudet mot skummets släta sida.

3 Täck för ögonen med NeoShades.

4 Fäst försiktigt kardborretyget på änden av NeoShades nackband.

Upprepa på motsatt sida.

Obs! Kan klippas till önskad längd.

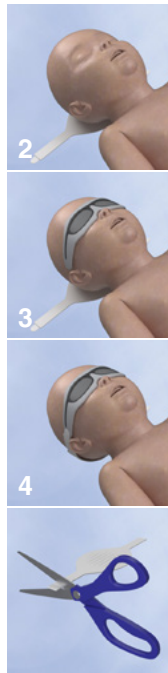

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

NeoShades ögonskydd är inte avsett för användning på vuxna.

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

NeoShades ska endast användas under kontinuerlig, direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Endast avsedd för användning till en patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

CE PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands