

# NeoShades<sup>®</sup> Päähihnalla Varustettuna

## VALOHOIDON SILMIENSUOJAIMET



### OMINAISUUDET JA EDUT

- Pehmeät, pehmustetut silmäsuojat, joissa söpö aurinkolasikuvio
- Okulaaritaskut suunniteltu potilaan mukavuutta ja turvallisuutta varten
- Pehmeä, patentoitu NeoFoam<sup>®</sup>-päähihna pitää NeoShades-suojukset paikallaan
- Säädettävä päähihna suunniteltu vähentämään liukumista ja auttamaan pään muodon hallinnassa
- Ainutlaatuinen päähihnan muoto varmistaa optimaalisen istuvuuden
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Tuote	Määrä/Yksikkö
N727	Mikro	50/Laatikko
N728	Pieni	50/Laatikko
N729	Suuri	50/Laatikko

Yhdysvaltain patenti nro 8 070 288;  
Lisäpatentteja vireillä



Valmistettu USA:ssa

# NeoShades® Päähihnalla Varustettuna

## VALOHOIDON SILMIENSUOJAIMET

### KÄYTTÖAIHEET

NeoShades-suojaimet on tarkoitettu suojaamaan silmiä valohoidon aikana. Ne on tarkoitettu käytettäviksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset).

### KÄYTTÖOHJEET

#### 1 Valitse oikea koko.

Likimääräinen mitoitus:

Mikro – 28 viikkoa ja alle

Pieni - 29–36 viikkoa

Suuri – 37 viikkoa ja yli


#### 2 Aseta päähihna pään taakse niin, että vaahdon sileä puoli on päätä vasten.

#### 3 Peitä silmät NeoShades-suojaimilla.

#### 4 Kiinnitä tarrakangas hellävaroen NeoShades-suojaimiin tulevan päähihnan päähän.

Toista vastakkaisella puolella.

*Huomautus: Hihnat ovat leikattavissa sopivaan kokoon.*

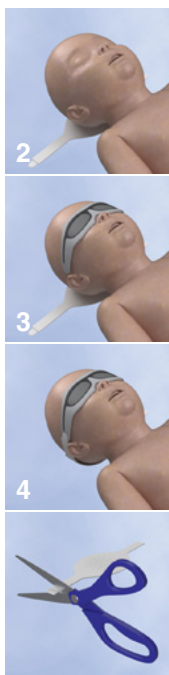

### HUOMIOT JA VAROITUKSET

NeoShades-suojaimia ei ole tarkoitettu käytettäviksi aikuisilla.

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

NeoShades-suojaimia saa käyttää vain, kun potilas on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

Vain yhden potilaan käyttöön.

Certified



Corporation



Valmistettu USA:ssa

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

EC REP

EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands