


## NeoShades® con Lengüetas

Protectores Oculares para Fototerapia

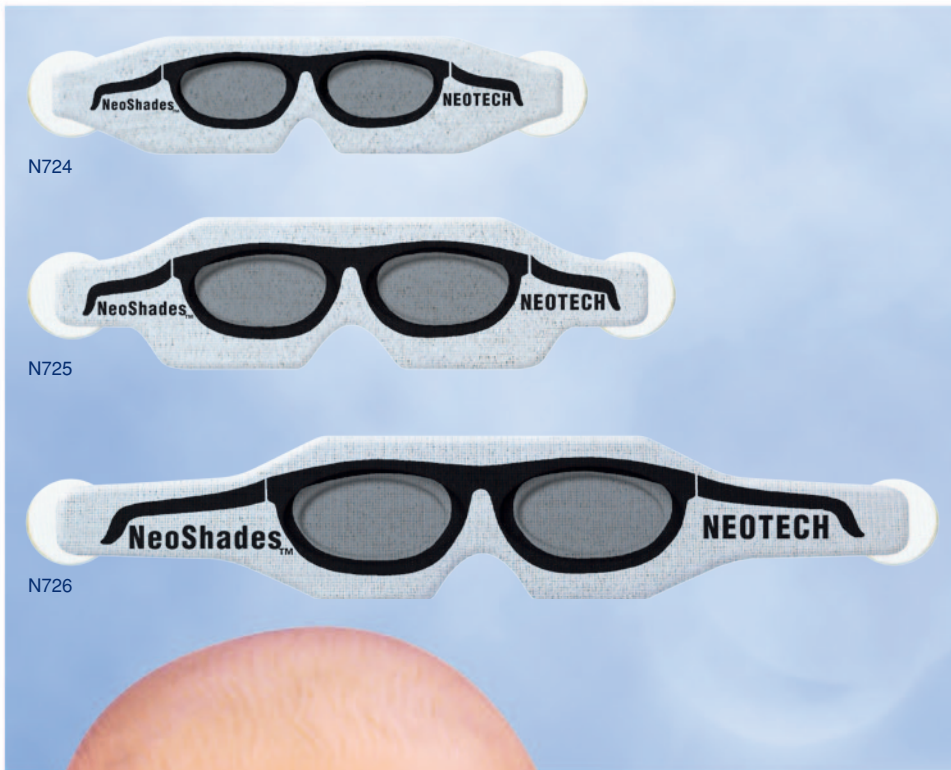

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Material de protección ocular suave y acolchado, con un diseño bonito de gafas de sol
- Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente (N724, N725, N726)
- Las lengüetas hidrocoloides NeoBond® son cómodas para la piel y sostienen las NeoShades en posición
- No hecho con látex de goma natural ni DEHP plastificador
- Empaquetado individualmente

Cat No.	Tamaño	Cant/Unidad
N720	Micro	50/caja
N721	Pequeño	50/caja
N722	Grande	50/caja
<b>With Ocular Pockets</b>		
N724	Micro	50/caja
N725	Pequeño	50/caja
N726	Grande	50/caja



Hecho en EEUU

Patente #D410,021; #8,070,288;  
Otras Patentes Pendientes

# NeoShades® con Lengüetas

## Protectores Oculares para Fototerapia

### INDICACIONES DE USO

Las NeoShades son indicadas para uso como protectores oculares durante sesiones de fototerapia. Han sido creadas para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

##### Paso 1

Seleccione el tamaño correcto.

##### Paso 2

Limpie y seque la piel conforme al protocolo del hospital.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas no se adhieren correctamente a piel húmeda o al cabello. Los aceites y lociones perjudicarán la adhesión.

NO UTILICE ALCOHOL.

#### Aplicación

##### Paso 1

Antes de retirar los papeles de forro, retire cuidadosamente las lengüetas de las NeoShades y caliéntelas en las manos durante 60 segundos. Puede sostenerse también bajo un calentador radiante o de talón de 10 a 15 segundos.

##### Paso 2

Quite y tire los papeles de forro. Coloque las lengüetas en la piel y sosténgalas en posición 60 segundos para que se adhieran correctamente.

##### Paso 3

Cubra los ojos con NeoShades y sujételas lentamente a las lengüetas.

Nota: Deje una porción de la lengüeta expuesta para poder retirarla.

#### Retirada

##### Paso 1

Sostenga el borde de la lengüeta en posición y separe lentamente las NeoShades de la lengüeta.

##### Paso 2

Sature la lengüeta con agua o solución salina.

##### Paso 3

Retire lentamente la lengüeta a la vez que humedece con agua o solución salina.

Repita en el otro lado.

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Bloqueo de luz

99.9%

#### Materiales del producto

NeoShades: nailon, poliuretano

Lengüetas: NeoBond Hydrocolloid, tela de gancho

Hecho con látex de caucho natural: no

Hecho con plastificante DEHP: no

#### Tamaño

N720, N724 Micro: 108 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza <26 cm)

N721, N725 Pequeño: 127 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 26 y 34 cm)

N722, N726 Grande: 178 mm

(se ajusta a una circunferencia de cabeza >34 cm)

#### Envasado

Envasado individual: sí

Tipo de envase: bolsa de polietileno

Caja dispensadora: sí

### CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las NeoShades con lengüetas son contraindicadas para pacientes con deformación facial, infección de la piel o zonas de piel excoriada que podrían impedir la colocación correcta de las lengüetas. No han sido creadas para uso en adultos.

La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o cuando lo ordene un médico.

Solamente deben utilizarse las NeoShades cuando el paciente esté siendo supervisado continua y directamente por profesionales médicos.

Deben retirarse siempre las lengüetas cuando se retiren las NeoShades del paciente. No vuelva a utilizarlas.

Deje de usarlas inmediatamente si se produce irritación de la piel.

Para uso en un solo paciente.

Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 o visite [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy • Valencia, CA 91355, USA



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague  
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands