


Neotech Meconium Aspirator[®]

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE MECONIO

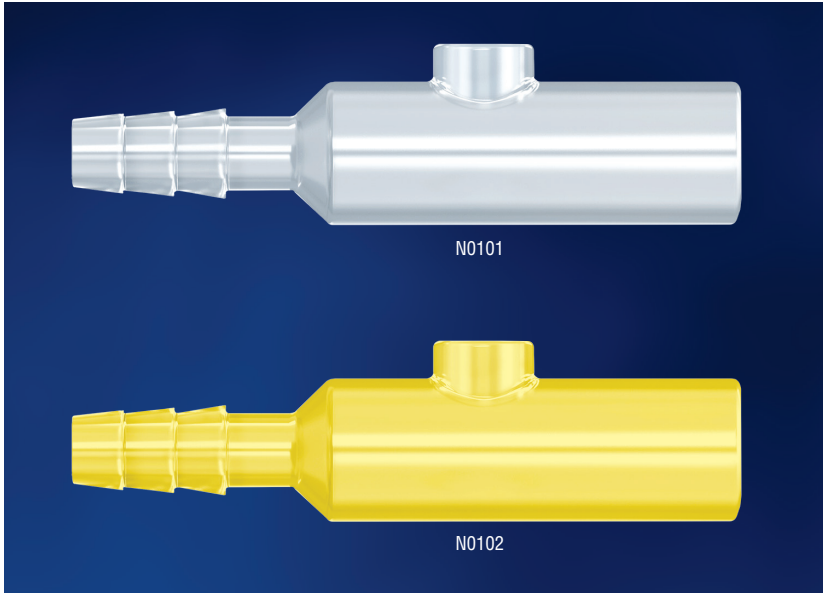


— CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS —

- Diseñado para eliminar la succión bucal de meconio
- Puerto de control de succión para succión intermitente
- Se conecta a la mayoría de los tubos endotraqueales
- Incluido en el Textbook of Neonatal Resuscitation¹
- N0102 (amarillo) permite una identificación más sencilla
- No fabricado con látex de caucho natural o plastificados DEHP
- Envasado individual

1) Textbook of Neonatal Resuscitation, 6ª edición (2011), pág. 43, Figura 2.7

Número	Color	Cant. /Unidad
N0101	Transparente	40/caja
N0102	Amarillo	40/caja

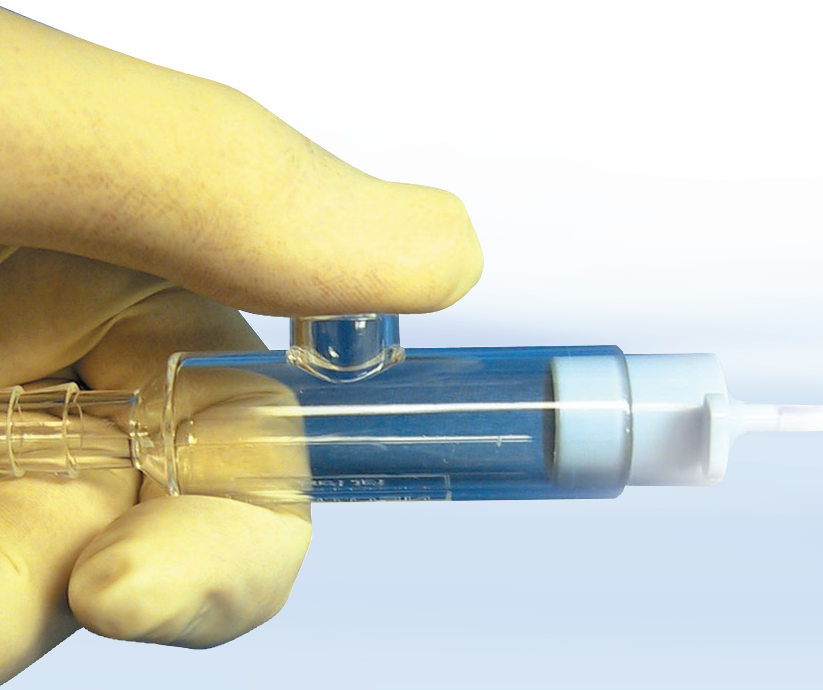

Neotech Meconium Aspirator®

DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE MECONIO

INDICACIONES DE USO

El Neotech Meconium Aspirator está diseñado para su uso como dispositivo de succión para aspirar el meconio de las vías respiratorias superiores de un recién nacido.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Conecte el extremo con púas de Neotech Meconium Aspirator al tubo de succión.
- 2 Defina la presión de succión a 80 mm Hg o menos.
- 3 Intube al paciente con el tubo endotraqueal adecuado.
- 4 Conecte el extremo de 15 mm d.i del Neotech Meconium Aspirator al adaptador del tubo endotraqueal de 15 mm d.e.
- 5 Bloquee el puerto del pulgar con el pulgar para comenzar la succión.
- 6 Succione durante dos segundos o menos seguidos hasta que se retire el meconio por completo. Succione el meconio de forma intermitente.
Nota: para una succión intermitente, desbloquee el puerto del pulgar para detener la succión. Bloquee el puerto del pulgar de nuevo para continuar la succión.
- 7 Continúe la succión mientras se retira el tubo endotraqueal.
- 8 Desechar después de su uso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta de este dispositivo exclusivamente por parte de médicos o bajo prescripción facultativa.

Uso para un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M564 Rev A