


Little Sucker[®] Nasal Tip

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NASAL

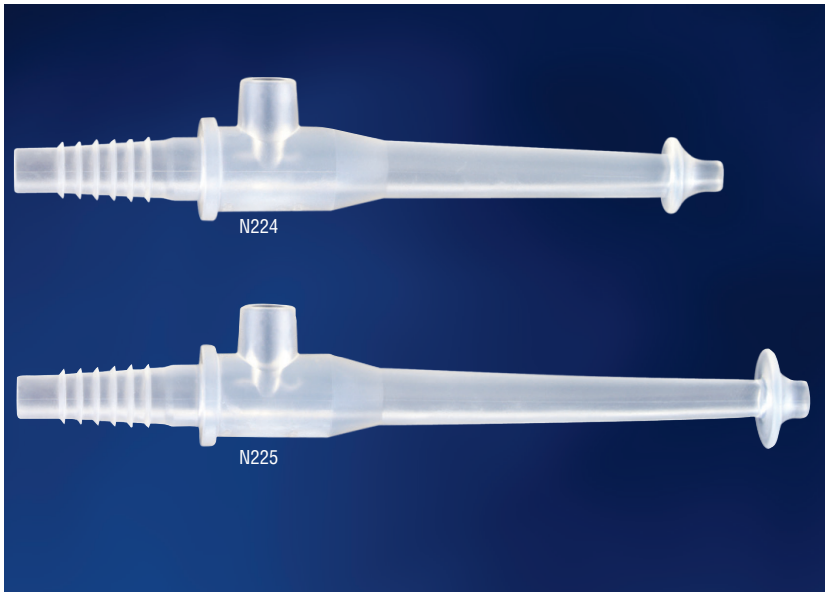

FEATURES & BENEFITS

- Punta especializada diseñada para minimizar traumas potenciales en el tejido
- Diseñado para succionar con una sola mano
- Tapón para el pulgar para una succión intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- No está fabricado con látex natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Artículo	HCPCS	Cant./Unidad
N224	Punta nasal prematuro	A4628	50/caja
N224TP	Prematura nasal 2 piezas	A4628	50/caja
N225	Punta nasal estándar	A4628	50/caja
N225TP	Estándar nasal 2 piezas	A4628	50/caja



Patentes

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269



Hecho en EEUU

Little Sucker® Nasal Tip

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NASAL

INDICACIONES DE USO

La boquilla nasal Little Sucker está indicada para el uso como boquilla en tubos de succión para la aspiración de fluidos de las fosas nasales.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Conecte el extremo con lengüeta de la punta de succión a la línea de succión.
- 2 Ajuste la succión en la presión adecuada según el protocolo hospitalario o recomendación médica.
- 3 Bloquee el tapón para el pulgar para comenzar la succión.
- 4 Succione las fosas nasales con una succión intermitente.
Nota: para una succión intermitente, desbloquee el tapón del pulgar para detener la succión. Bloquee el tapón del pulgar de nuevo para continuar la succión.
- 5 Succione agua estéril a través de la punta de succión después de cada uso.
- 6 Sustituya la punta o la cubierta de succión cada 24 horas o según el protocolo hospitalario; el plazo que sea más breve.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La legislación federal restringe la venta de este dispositivo y solo un médico lo puede vender o solicitar su venta.

Solo para uso nasal.

Introducir la punta de succión en las fosas nasales con demasiada profundidad podría ocasionar un traumatismo en los tejidos.

La punta nasal del Little Sucker debe mantenerse libre de suciedad.

Uso para un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2021 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M661 Rev A