


Little Sucker[®] Nasal Tip

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NASAL

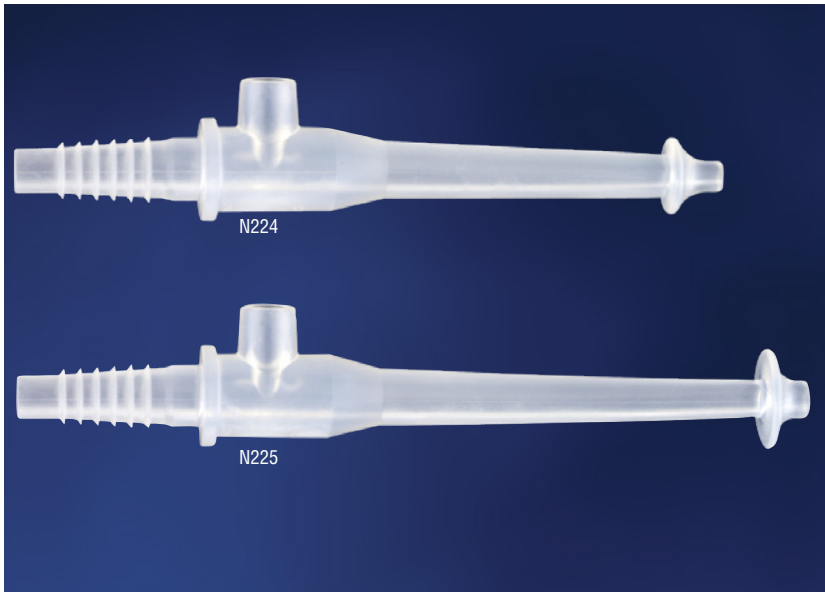

FEATURES & BENEFITS

- Punta especializada diseñada para minimizar traumas potenciales en el tejido
- Diseñado para succionar con una sola mano
- Tapón para el pulgar para una succión intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- No está fabricado con látex natural ni plastificante DEHP
- Empaquetado individualmente

Número	Artículo	HCPCS	Cant./Unidad
N224	Punta nasal prematuro	A4628	50/caja
N224TP	Prematura nasal 2 piezas	A4628	50/caja
N225	Punta nasal estándar	A4628	50/caja
N225TP	Estándar nasal 2 piezas	A4628	50/caja



Patentes

#7,635,361; # D668,757;

#6,958,050; #D474,269



Little Sucker® Nasal Tip

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN NASAL

INDICACIONES DE USO

La boquilla nasal Little Sucker está indicada para el uso como boquilla en tubos de succión para la aspiración de fluidos de las fosas nasales.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Conecte el extremo con lengüeta de la punta de succión a la línea de succión.
- 2 Ajuste la succión en la presión adecuada según el protocolo hospitalario o recomendación médica.
- 3 Bloquee el tapón para el pulgar para comenzar la succión.
- 4 Succione las fosas nasales con succión intermitente. Retire el pulgar de la apertura de pulgar para detener la succión. Vuelva a bloquear la apertura de pulgar para continuar con la succión.
- 5 Succione agua estéril a través de la punta de succión después de cada uso para eliminar los residuos.
- 6 Sustituya la punta o la cubierta de succión cada 24 horas o según el protocolo hospitalario; el plazo que sea más breve.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a un médico o por orden suya.

Solo para uso nasal.

Introducir la punta de succión en las fosas nasales con demasiada profundidad podría ocasionar un traumatismo en los tejidos.

La punta de succión debe permanecer libre de residuos.

Uso para un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Hecho en EEUU

M661 Rev B