


# Little Sucker® y Protector

## DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL Y PROTECTOR

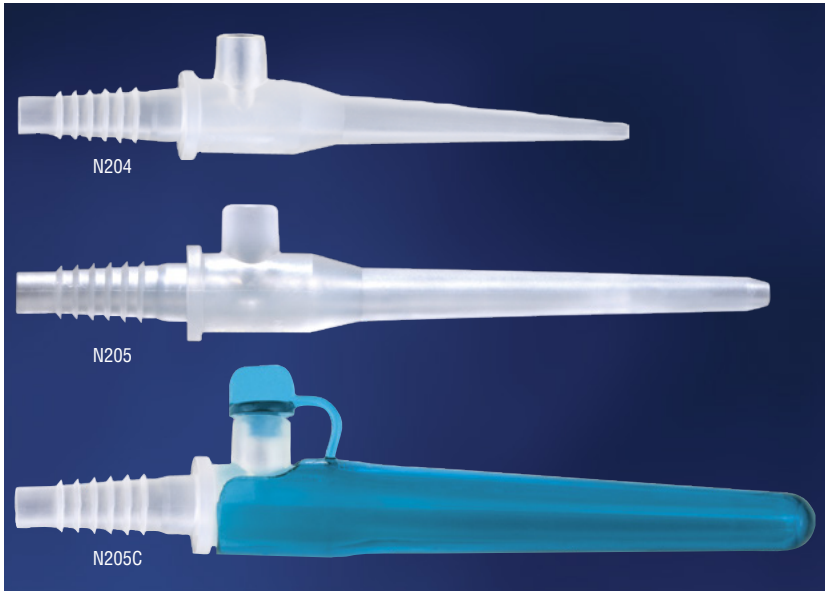

### FEATURES & BENEFITS

#### Little Sucker

- Diseñado para realizar la aspiración con una sola mano
- Boquilla para el pulgar para realizar la aspiración intermitente
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma
- No está fabricado con látex de caucho natural ni plastificante DEHP Empaquetado de manera individual

#### Protector para Little Sucker

- Diseñado para proteger el Little Sucker de daño, suciedad y contaminantes externos
- Color azul fuerte para una mejor visibilidad
- Tapón que reduce el ruido
- No está fabricado con látex natural ni plastificantes DEHP
- Empaquetado de forma individual

Número	Artículo	HCPCS	Cant./Unidad
N204	Prematuro	A4628	50/caja
N204TP	Prematuro 2 piezas	A4628	50/caja
N204C	Prematuro con funda	A4628	50/caja
N205	Estándar	A4628	50/caja
N205C	Estándar con funda	A4628	50/caja
N205TP	Estándar 2 piezas	A4628	50/caja
N215	Funda sola (no se incluye el Sucker)		50/caja

\*Los Little Suckers de 2 piezas no son compatibles con la cubierta

Patentes  
 #7,635,361; #D590,056;  
 #6,958,050; #D474,269;  
 #D655,812



# Little Sucker® y Protector

## DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN ORAL Y NASAL Y PROTECTOR

### INDICACIONES DE USO

La NeoSucker está indicada para el uso como boquilla en tubos de succión para la aspiración de fluidos de la boca y las fosas nasales.

### INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Si la cubierta está en su lugar (aplica a N204C/ N205C), destape la apertura de pulgar y retire la cubierta de la punta de succión.
- 2 Conecte el extremo con lengüeta de la punta de succión a la línea de succión.
- 3 Ajuste la succión en la presión adecuada según el protocolo hospitalario o recomendación médica.
- 4 Bloquee el tapón para el pulgar para comenzar la succión.
- 5 Succione la boca o las fosas nasales con succión intermitente. Retire el pulgar de la apertura de pulgar para detener la succión. Vuelva a bloquear la apertura de pulgar para continuar con la succión.
- 6 Succione agua estéril a través de la punta de succión después de cada uso para eliminar los residuos.
- 7 Cuando corresponda, vuelva a introducir la punta de succión en la cubierta e introduzca el tapón de cubierta en la apertura de pulgar de la punta de succión.
- 8 Sustituya la punta o la cubierta de succión cada 24 horas o según el protocolo hospitalario; el plazo que sea más breve.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a un médico o por orden suya.

Solo para uso oral o nasal.

Introducir la punta de succión en la boca o las fosas nasales con demasiada profundidad podría ocasionar un traumatismo en los tejidos.

La punta o cubierta de succión debe permanecer libre de residuos.

La protección de Little Sucker está diseñada para usar como protección específica para el Little Sucker Oral y Nasal Suction Device. Puede que no se adecue a otros dispositivos de succión. No está diseñado para su uso en el Little Sucker de dos piezas o Little Sucker Nasal Tip (punta nasal del Little Sucker).

Uso para un único paciente.



Para información o muestras GRATIS

**1-800-966-0500 • [neotechproducts.com](http://neotechproducts.com)**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Hecho en EEUU

M662 Rev B