


Little Sucker® et Protection

DISPOSITIF D'ASPIRATION ORAL ET NASAL ET PROTECTION

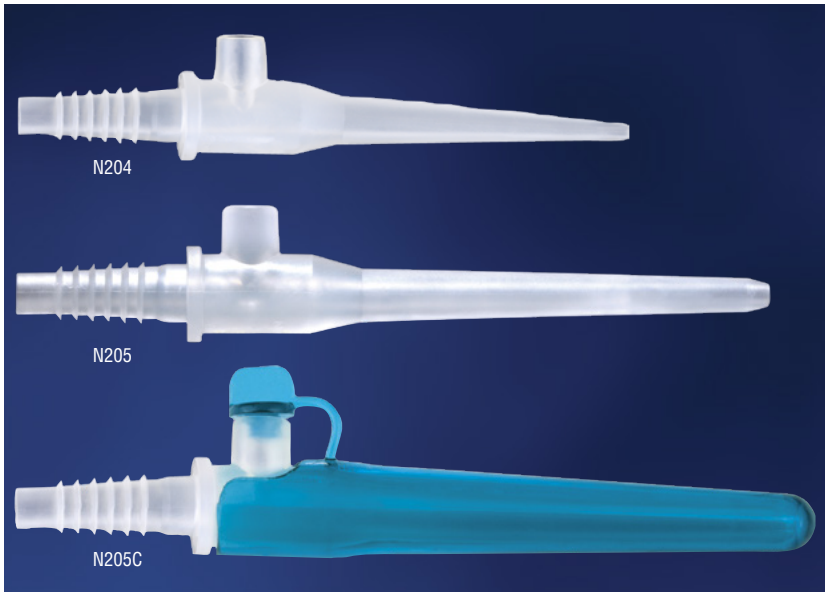

FONCTIONS ET AVANTAGES

Little Sucker®

- Conçu pour aspirer en n'utilisant qu'une seule main
- Orifice pour le pouce pour une aspiration intermittente
- Embout doux et flexible similaire à celui d'un injecteur à poire
- N'est pas fabriqué en latex de caoutchouc naturel ou avec un plastifiant DEHP

Protection Little Sucker®

- Conçue pour protéger le Little Sucker contre les dégâts, les résidus et les contaminants externes
- Bleu vif pour une meilleure visibilité
- Bouchon de l'orifice antibruit
- Sans latex en caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP

N° de catalogue	Article	Unité de quantité
N204	Prématuré	50/boîte
N204C	Prématuré avec couvercle	50/boîte
N204TP	Prématuré 2 pièces*	50/boîte
N205	Standard	50/boîte
N205C	Standard avec couvercle	50/boîte
N205TP	Standard 2 pièces*	50/boîte
N215	Couverture	50/boîte

* Les petits ventouses 2 pièces ne sont pas compatibles avec la housse

Brevet
 #7,635,361; #D590,056;
 #6,958,050; #D474,269;
 #D655,812

Little Sucker® et Protection

DISPOSITIF D'ASPIRATION ORAL ET NASAL ET PROTECTION

INDICATIONS D'UTILISATION

Le Little Sucker est un embout de tuyau d'aspiration destiné à aspirer les liquides provenant de la bouche et des narines.

La protection Little Sucker est indiquée pour protéger l'appareil d'aspiration nasale et orale Little Sucker.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Si le couvercle est en place (pour les modèles N204C/ N205C), retirez le bouchon de l'orifice pour le pouce et sortez l'embout d'aspiration du couvercle.
- 2 Raccordez l'extrémité crantée de Little Sucker à la conduite d'aspiration.
- 3 Réglez l'aspiration sur la pression appropriée conformément au protocole de l'hôpital ou aux recommandations du médecin.
- 4 Obstruez l'orifice avec le pouce pour commencer l'aspiration.
- 5 Aspirez par la bouche ou par les narines par intermittence. Enlevez le pouce de l'orifice pour arrêter l'aspiration. Obstruez à nouveau l'orifice pour le pouce pour continuer l'aspiration.
- 6 Aspirez de l'eau stérilisée par l'embout d'aspiration après chaque utilisation pour éliminer les résidus.
- 7 Le cas échéant, réinsérez l'embout d'aspiration dans le couvercle et mettez le bouchon du couvercle dans l'orifice pour le pouce de l'embout d'aspiration.
- 8 Remplacer la buse d'aspiration ou le couvercle toutes les 24 heures ou conformément au protocole de l'hôpital, selon la première de ces éventualités.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Pour usage oral ou nasal seulement.

L'insertion de l'embout d'aspiration trop loin dans la bouche ou les narines peut causer un traumatisme tissulaire.

L'embout d'aspiration/couvercle d'aspiration doit toujours être exempt de débris.

La protection Little Sucker est conçue pour être utilisée avec l'appareil d'aspiration nasale et orale Little Sucker. Il est possible qu'elle ne soit pas adaptée à d'autres appareils d'aspiration. Elle n'est pas destinée à être utilisée avec le Little Sucker composé de deux éléments ou l'embout nasal Little Sucker.

À usage unique exclusivement.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M672 Rev B