


# Embout Nasal Little Sucker®

## DISPOSITIF D'ASPIRATION NASAL

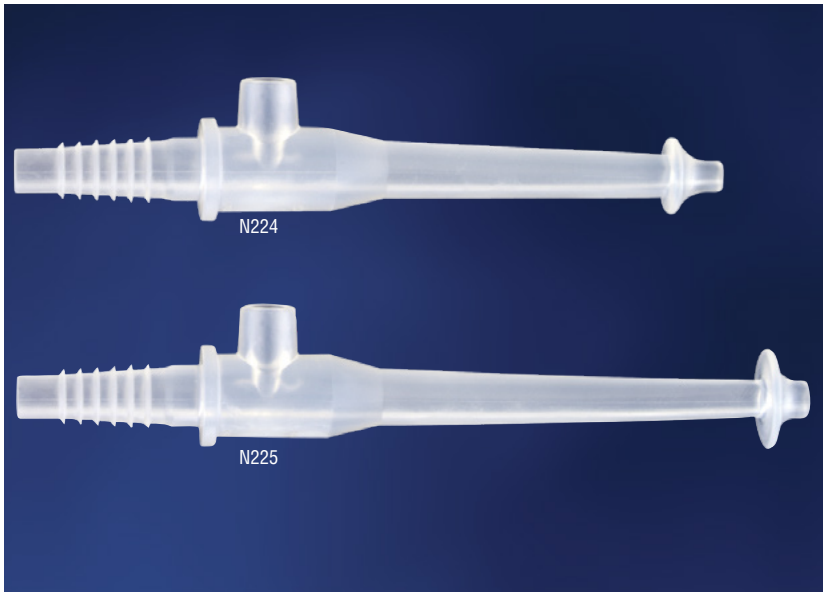

### FONCTIONS ET AVANTAGES

- Embout spécialisé conçu pour réduire les éventuels traumatismes tissulaires
- Conçu pour une aspiration d'une seule main
- Orifice pour aspiration intermittente
- Embout souple et flexible semblable à une seringue à poire
- Sans latex en caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballage individuel

N° de catalogue	Article	Unité de quantité
N224	Embout nasal prématuré	50/boîte
N224TP	Prématuré 2 pièces	50/boîte
N225	Embout nasal standard	50/boîte
N225TP	2 pièces standard	50/boîte



Brevet  
#7,635,361; # D668,757;  
#6,958,050; #D474,269

# Embout Nasal Little Sucker®

## DISPOSITIF D'ASPIRATION NASAL

### INDICATIONS D'UTILISATION

Le Embout Nasal Little Sucker est un embout de tuyau d'aspiration destiné à aspirer les liquides provenant de des narines.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Raccordez l'extrémité crantée de Embout Nasal Little Sucker à la conduite d'aspiration.
- 2 Réglez l'aspiration sur la pression appropriée conformément au protocole de l'hôpital ou aux recommandations du médecin.
- 3 Obstruez l'orifice avec le pouce pour commencer l'aspiration.
- 4 Aspirez par les narines par intermittence. Enlevez le pouce de l'orifice pour arrêter l'aspiration. Obstruez à nouveau l'orifice pour le pouce pour continuer l'aspiration.
- 5 Aspirez de l'eau stérilisée par l'embout d'aspiration après chaque utilisation pour éliminer les résidus.
- 6 Remplacer Embout Nasal Little Sucker toutes les 24 heures ou conformément au protocole de l'hôpital, selon la première de ces éventualités.

### PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

La loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

Pour usage nasal uniquement.

L'insertion de l'embout d'aspiration trop loin dans les narines peut causer un traumatisme tissulaire.

L'embout d'aspiration doit toujours être exempt de débris.

À usage unique exclusivement.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M673 Rev B