


Mentonnière ChinStrap™ de Neotech

ACCESSOIRE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE

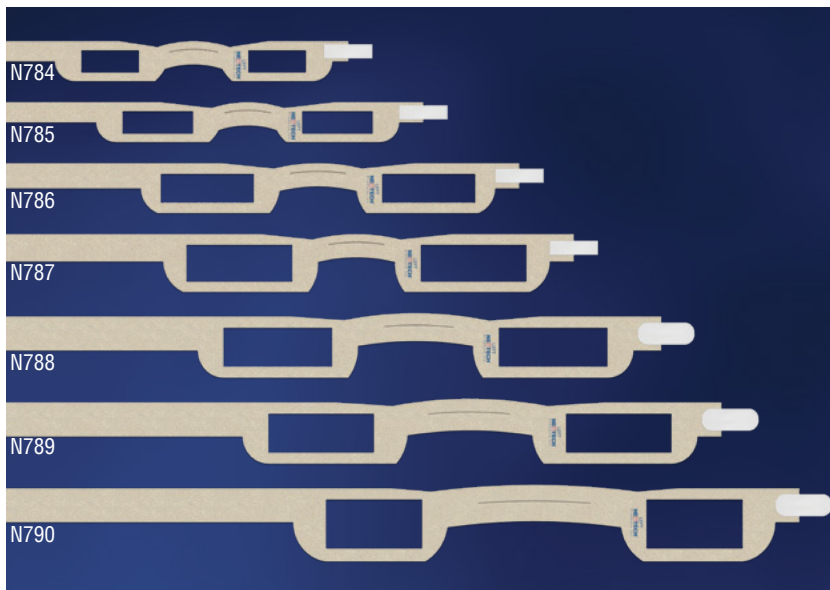

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Matériau NeoFoam® doux, respirant et hypoallergénique permettant d'évacuer la transpiration
- Souplesse permettant de réduire le mouvement de la bouche au minimum
- Forme ajustée et réglable
- Fente au niveau du menton assurant confort et stabilité
- Ouvertures au niveau des oreilles permettant d'éviter le pliage
- Conçu pour réduire les risques d'escarres ou de nécroses
- Matériau spécial permettant d'éviter tout déplacement
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballé individuellement

N° de catalogue	Article	Unité de quantité
N784	Nano	20/boîte
N785	Micro	20/boîte
N786	Petit	20/boîte
N787	Grand	20/boîte
N788	X-Large	20/boîte
N789	Macro	20/boîte
N790	Géant	20/boîte

Brevet #10,342,693



Mentonnière ChinStrap™ de Neotech

ACCESSOIRE D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE

INDICATIONS D'UTILISATION

Le Neotech ChinStrap a pour fonction d'aider à maintenir la bouche du patient fermée pendant la thérapie respiratoire. Il est conçu pour une utilisation chez les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons, enfants et adolescents) et les patients adultes.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1 Sélectionnez la taille appropriée en mesurant la circonférence de la tête à partir du milieu du menton vers la partie postérieure de la tête, en passant au-dessus de l'oreille.



2 Placez la mentonnière ChinStrap de Neotech sur le menton avec les ouvertures en face du cou et le côté blanc et lisse contre la peau.



3 Positionnez le menton à l'intérieur de la fente avec la partie inférieure, plus large, sous le menton et la partie supérieure sur le menton.

4 Tirez les deux extrémités vers la partie postérieure de la tête en s'assurant que les oreilles sont bien positionnées dans les ouvertures prévues à cet effet, puis fixez la languette Velcro doucement sur la sangle. Le côté marqué « GAUCHE » doit être placé au-dessous de l'oreille gauche du patient.



Remarque : la partie excédentaire de la mentonnière peut être coupée et retirée si besoin. Assurez-vous que la sangle n'est pas trop serrée ou qu'elle ne gêne pas les oreilles. La languette Velcro doit se superposer entièrement à la sangle.

5 Remplacez tous les cinq jours ou à la fréquence indiquée par le protocole hospitalier, selon la première éventualité.

Remplacez-la immédiatement en cas d'usure ou de souillure visible.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur ordre d'un médecin.

Interrompez immédiatement l'utilisation en cas d'irritation de la peau.

À usage unique

