

NeoShades[®] mit Klebelaschen

AUGENSCHUTZ FÜR FOTOTHERAPIE



N724



N725



N726



MERKMALE & VORTEILE

- Weich gepolstertes Augenschutzmaterial in niedrigem Sonnenbrillen-Design
- Augentaschen entwickelt für den Komfort und die Sicherheit des Patienten (N724, N725, N726)
- Hautfreundliche NeoBond[®]-Hydrokolloid-Befestigungslaschen halten NeoShades in Position
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt
- Einzeln verpackt

Katalog-Nr.	Artikel	Mengeneinheit
N720	Mikro	50/Kasten
N721	Klein	50/Kasten
N722	Groß	50/Kasten
Mit Augentaschen		
N724	Mikro	50/Kasten
N725	Klein	50/Kasten
N726	Groß	50/Kasten

Patent #8,070,288;
Zusätzliche Patente angemeldet



HERGESTELLT
IN DEN USA

NeoShades® mit Klebelaschen

AUGENSCHUTZ FÜR FOTOTHERAPIE

GEBRAUCHSHINWEIS

NeoShades sind als Augenschutz während einer Fototherapiesitzung einzusetzen. Sie sind für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern) vorgesehen..

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung

- 1 Richtige Größe wählen.

Ungefähre Größenangaben:
Micro – 28 Wochen und jünger
Small – 29 - 36 Wochen
Large – 37 Wochen und älter

- 2 Die Haut an den Schläfen gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und trocknen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so rein und trocken wie möglich ist. Auf feuchter oder behaarter Haut haften die Hydrokolloid-Klebe pads nicht einwandfrei. Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftwirkung.

KEIN ALKOHOL VERWENDEN.

Anwendung

- 1 Vorsichtig die Hydrokolloid-Klebe pads von dem Augenschutz abziehen.

Vor dem Abziehen der Kunststoffolien müssen die Hydrokolloid-Klebe pads aktiv erwärmt werden. Dazu gibt es u. a. die folgenden Möglichkeiten: Für mindestens 60 Sekunden zwischen den Handflächen wärmen; für 10 - 15 Sekunden an einen Wärmestrahler oder für 10-15 Sekunden an einen chemischen Fersenwärmer halten.

- 2 Kunststoffolien abziehen und entsorgen. Hydrokolloid-Klebe pads auf die Schläfen legen und für einwandfreien Halt 60 Sekunden lang andrücken.


- 3 Die Augen mit NeoShades abdecken und den Augenschutz sanft auf die Hydrokolloid-Klebe pads drücken.

Hinweis: Ein Teil der Laschen für leichtere Entfernung freilassen.

Entfernung

- 1 NeoShades Hydrokolloid-Klebe pads auf der Haut gemäß Krankenhausprotokoll oder spätestens alle 5 Tage erneuern.
- 2 Halten Sie den Rand des Hydrokolloid-Klebe pads fest und ziehen Sie NeoShades langsam von dem Pad ab.
- 3 Hydrokolloid-Klebe pad mit Wasser oder Kochsalzlösung tränken.
- 4 Hydrokolloid-Klebe pad langsam von der Haut abziehen und dabei weiter mit Wasser oder Kochsalzlösung befeuchten.

Mit gegenüberliegender Seite wiederholen.

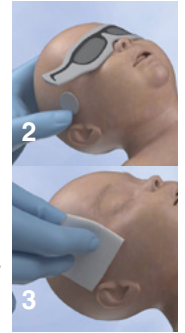

GEGENANZEIGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN

& WARNUNGEN

NeoShades sind bei Patienten mit Gesichtsverformung und infizierten oder wunden Hautbereichen, die eine richtige Platzierung der Laschen verhindern, kontraindiziert. Sie sind nicht für den Einsatz an Erwachsenen vorgesehen.

Nach Bundesgesetz darf dieser Artikel nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

NeoShades sollten nur dann verwendet werden, während der Patient sich unter ständiger, direkter Aufsicht von ausgebildeten Fachleuten befindet.

Überprüfen Sie beim Abnehmen des Augenschutzes stets die Unversehrtheit des Hydrokolloid-Pads, wenn Sie NeoShades intermittierend verwenden. Sollten sich die Hydrokolloid-Pads von der Haut lösen, entfernen Sie sie gemäß der Gebrauchsanweisung und kleben Sie vor der Wiederaufnahme der Lichttherapie neue Hydrokolloid-Pads auf.

Auf feuchter oder behaarter Haut haften die Hydrokolloid-Klebe pads nicht einwandfrei. Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftwirkung.

Zur Reinigung der Haut vor der Anwendung keinen Alkohol verwenden.

Bei Hautreizungen Gebrauch sofort unterbrechen.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.

Es gelten die allgemeinen Transport- und Lagerungsverfahren.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands