


## NeoBar<sup>®</sup>

### ENDOTRACHEALTUBUSHALTER

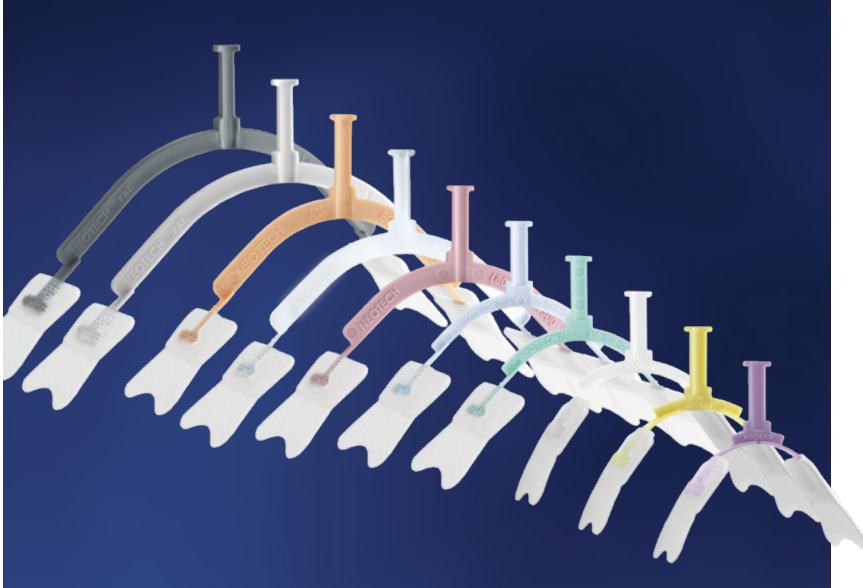

#### MERKMALE & VORTEILE

- Hautfreundliche NeoBond<sup>®</sup>-Hydrokolloid-Befestigungslaschen
- Makro- und Jumbogrößen mit medizinischem Acrykleber erhältlich
- Entwickelt, um Extubationen zu reduzieren, Gaumenverletzungen zu verhindern und die Mundpflege zu verbessern
- Macht die Verwendung von Klebeband an Nase oder Mund überflüssig
- Kann für Notfallentfernung durchtrennt werden
- Farbcodierte Größen
- Ohne Naturkautschuklatex oder DEHP-Weichmacher hergestellt
- Einzeln verpackt

Katalog #	Größe	Farbe	Mengeneinheit
N709	Mini	Violett	5/Kasten
N710	Ultra	Gelb	5/Kasten
N711	Mikro	Weiß	5/Kasten
N712	Klein	Grün	5/Kasten
N713	Groß	Blau	5/Kasten
N714	XL	Rose	5/Kasten
N715H	Makro	Klar	5/Kasten
N716H	Jumbo	Grau	5/Kasten
<b>Mit medizinischem Acrykleber</b>			
N715F	Makro	Pfirsich	5/Kasten
N716F	Jumbo	Kohlenstoff	5/Kasten
<b>Sortiert</b>			
N718 Transport (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			
N719N Sortiert (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Patent  
#D434,496; #6,050,263

### GEBRAUCHSHINWEIS

Das NeoBar eignet sich als Sicherung eines Endotrachealtubus (ET-Tubus). Es ist für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern) vorgesehen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### Vorbereitung

- 1 Nach der Intubation richtige NeoBar-Größe wählen, indem das mitgelieferte NeoBar-Maßband verwendet wird. Mittellinie des Bands am Septum platzieren und zum Ohr rollen. Farbe, die über der Ohrkanalöffnung liegt, entspricht der NeoBar-Größe.
- 2 Um einwandfreie Passform sicherzustellen, NeoBar über Mundmitte zwischen Ober- und Unterlippe platzieren. NeoBar sollte keinen Kontakt mit den Lippen haben. Laschen müssen sich direkt vor dem Ohr befinden.
- 3 Haut nach Krankenhausprotokoll säubern und abtrocknen.

*Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so sauber und trocken wie möglich ist. Laschen haften nicht richtig auf feuchter Haut oder feuchten Haaren. Öle und Lotionen wirken sich negativ auf die Haftung aus.*

KEIN ALKOHOL VERWENDEN.

#### Anwendung

- 1 Vor dem Entfernen der Schutzfolie Laschen 60 Sekunden lang in den Händen aufwärmen. Können auch für 10 bis 15 Sekunden unter Heizstrahler oder Fersenwärmer gehalten werden.
- 2 Schutzfolie entfernen und entsorgen. Laschen vor den Ohren auf Knochen aufbringen und 60 Sekunden lang halten, um gute Haftung sicherzustellen.

Hinweis: Sicherstellen, dass sich der ET-Tubus unter der Plattform befindet, um Druck auf Gaumen und Zahnfleisch zu verringern.

- 3 Zunächst 1,30 cm (0,5 Zoll) weißes oder Gewebepband vollständig um die NeoBar-Plattform wickeln, dann Plattform und Tubus mit Band umwickeln.

#### Entfernung

- 1 NeoBar alle 5 Tage oder nach Krankenhausprotokoll ersetzen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgebend ist.
- 2 Klebeband entfernen, um ET-Tubus von der NeoBar-Plattform zu trennen.

- 3 Laschen mit Wasser oder Kochsalzlösung tränken.
- 4 Laschen langsam von der Haut lösen, während die Haut mit Wasser oder Kochsalzlösung abgetupft wird.

#### Notfallentfernung

Vorsichtig mit einer stumpfen Schere dünnen Teil des NeoBar an Schnittstelle zwischen Leiste und Lasche durchtrennen. NeoBar und befestigten ET-Tubus entfernen. Laschen später entfernen (siehe Abschnitt „Entfernung“).

### GEGENANZEIGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN

#### & WARNUNGEN

NeoBar ist für Patienten mit infizierten oder wunden Hautbereichen, die eine richtige Platzierung der Laschen verhindern, kontraindiziert.

Es ist nicht für den Einsatz an Erwachsenen vorgesehen.

Nach Bundesgesetz darf dieser Artikel nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

NeoBar sollte nur dann verwendet werden, während der Patient sich unter ständiger, direkter Aufsicht von ausgebildeten Fachleuten befindet.

Bei Hautreizungen Gebrauch sofort unterbrechen.

NeoBar sollte nicht die Lippen berühren.

Laschen haften nicht richtig auf feuchter Haut oder feuchten Haaren. Öle und Lotionen wirken sich negativ auf die Haftung aus.

Vor der Verwendung die Haut nicht mit Alkohol reinigen.

Für sofortige Entfernung die GEBRAUCHSANWEISUNG verwenden: Notfallentfernung.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.