


## NeoPulse™

### INVÓLUCRO DESCARTÁVEL DO OXÍMETRO DE PULSO

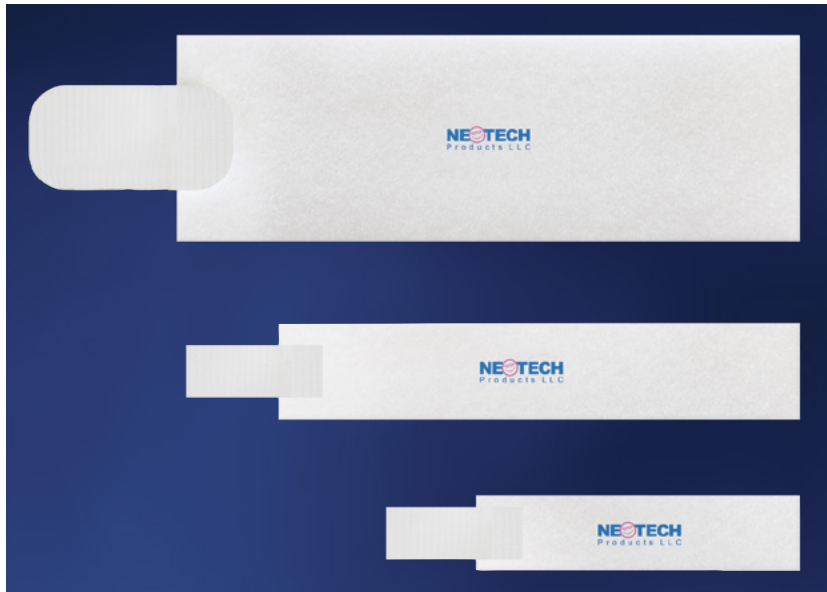

#### — CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- NeoFoam® transpirável macio, respirável e adequado para a pele
- Leve, encaixe perfeito e ajustável
- Criado para conforto e estabilidade
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Cat. #	Tamanho	Dimensões	Unidade de quantidade
N781	Pequena	3/4" x 3"	100/caixa
N782	Grande	1" x 5"	100/caixa
N783	X-Large	2" x 6"	100/caixa

## INVÓLUCRO DESCARTÁVEL DO OXÍMETRO DE PULSO

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoPulse foi concebido para manter um sensor de oxímetro de pulso no lugar. Concebido para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Coloque o sensor do oxímetro de pulso de acordo com o protocolo hospitalar.
- 2 Acondicione o NeoPulse à volta do sensor do oxímetro de pé e de pulso e aperte suavemente o gancho.

*Nota: Pode ser cortado para um ajuste adequado. Certifique-se de que o invólucro não está muito apertado. A aba do gancho deve sobrepor o invólucro por completo.*

- 3 Verifique o pé depois do acondicionamento para garantir uma circulação adequada.
- 4 Substitua o NeoPulse a cada 5 horas ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro. Substitua imediatamente se estiver visivelmente gasto ou sujo.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.