


NeoBar®

REGGITUBO ENDOTRACHEALE

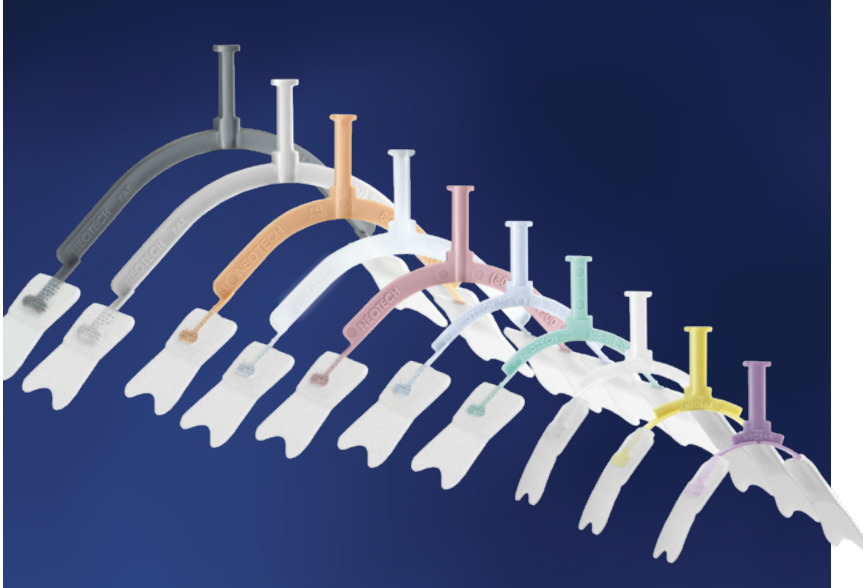

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Le alette NeoBond® sono realizzate in materiale idrocolloidale e rispettano la pelle
- Taglie macro e maxi disponibili con adesivo acrilico a uso medico
- Progettato per ridurre estubazioni, consente di evitare traumi al palato e permette una migliore igiene orale
- Elimina la necessità di applicare nastro adesivo vicino a naso e bocca
- È possibile tagliarlo in caso di rimozione d'emergenza
- Taglie classificate per colore
- Non contiene lattice di gomma naturale o plastificante DEHP
- Confezionato singolarmente

Cat. #	Dimensione	Colore	Qtà/Unità
N709	Mini	Viola	5/scatola
N710	Ultra	Gialla	5/scatola
N711	Micro	Bianca	5/scatola
N712	Piccola	Verde	5/scatola
N713	Larga	Blu	5/scatola
N714	XL	Rosa	5/scatola
N715H	Macro	Chiara	5/scatola
N716H	Jumbo	Grigio	5/scatola
Con adesivo acrilico di grado medico			
N715F	Macro	Pesca	5/scatola
N716F	Jumbo	Carbonio	5/scatola
Assortite			
N718 Trasporto (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			
N719N Assortite (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)			

Brevetto USA
#D434,496; #6,050,263

INDICAZIONI D'USO

NeoBar è indicato per posizionare saldamente i tubi endotracheali. È destinato all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

- 1 Dopo che il paziente viene intubato, selezionare la taglia adatta utilizzando il nastro adesivo in dotazione.

Posizionare la linea centrale del nastro sul setto e avvolgerla all'orecchio. Il colore sopra l'apertura del condotto uditivo corrisponderà alla taglia NeoBar adatta.

- 2 Per un migliore adattamento, posizionare NeoBar sul centro della bocca, tra le labbra superiori e quelle inferiori. NeoBar non deve venire a contatto con le labbra. Le alette devono essere posizionate di fronte all'orecchio.

- 3 Pulire e asciugare la pelle secondo le indicazioni dell'ospedale.

Nota: è importante che la pelle sia il più possibile asciutta e pulita. Le alette non aderiranno correttamente a pelli o a capelli umidi. La presenza di oli e lozioni compromette l'adesione alla pelle.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

- 1 Prima di rimuovere i rivestimenti delle alette, scaldare in mano le alette stesse per 60 secondi. Possono inoltre essere scaldate tramite scaldatiloni o in incubatrice per un intervallo di 10-15 secondi.

- 2 Staccare e gettare i rivestimenti. Applicare le alette sugli zigomi e tenerle premute per 60 secondi per assicurare un'adesione corretta.

Nota: assicurarsi che il tubo endotracheale si trovi al di sotto della piattaforma per ridurre la pressione sul palato e sulle gengive.

- 3 Utilizzare una piccola parte di nastro adesivo bianco o di stoffa per avvolgere la piattaforma NeoBar e successivamente continuare ad applicare il nastro sia su quest'ultima che sul tubo.

Rimozione

- 1 Sostituire il prodotto ogni 5 giorni o secondo le indicazioni dell'ospedale, preferendo l'opzione che preveda una maggior frequenza.
- 2 Rimuovere il nastro per separare il tubo endotracheale dalla piattaforma NeoBar.
- 3 Impregnare le alette di acqua o soluzione salina.
- 4 Rimuovere lentamente le alette dalla pelle e allo stesso tempo tamponare con acqua o soluzione salina.

Rimozione d'emergenza

Facendo attenzione, tagliare una porzione sottile di NeoBar con forbici dalla punta arrotondata nel punto di giuntura tra la barra e l'aletta.

Rimuovere NeoBar e il tubo endotracheale ad esso fissato.

Successivamente rimuovere le alette. (Vedere il paragrafo Rimozione)

— CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI —

NeoBar è controindicato nei pazienti con infezioni o escoriazioni, le quali impedirebbero la giusta adesione delle alette sulla pelle.

Non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o consentita su prescrizione medica.

NeoBar deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Evitare il contatto del prodotto con le labbra.

Le alette non aderiranno correttamente a pelli o a capelli umidi. La presenza di oli e lozioni compromette l'adesione alla pelle.

Non utilizzare alcol per pulire la pelle prima dell'applicazione del prodotto.

Per una rimozione immediata, consultare la sezione ISTRUZIONI PER L'USO: rimozione d'emergenza.

Esclusivamente monouso.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Fabbricato
Negli USA

M695 Rev A