


## Sottogola Neotech ChinStrap™

ACCESSORI PER IL SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE

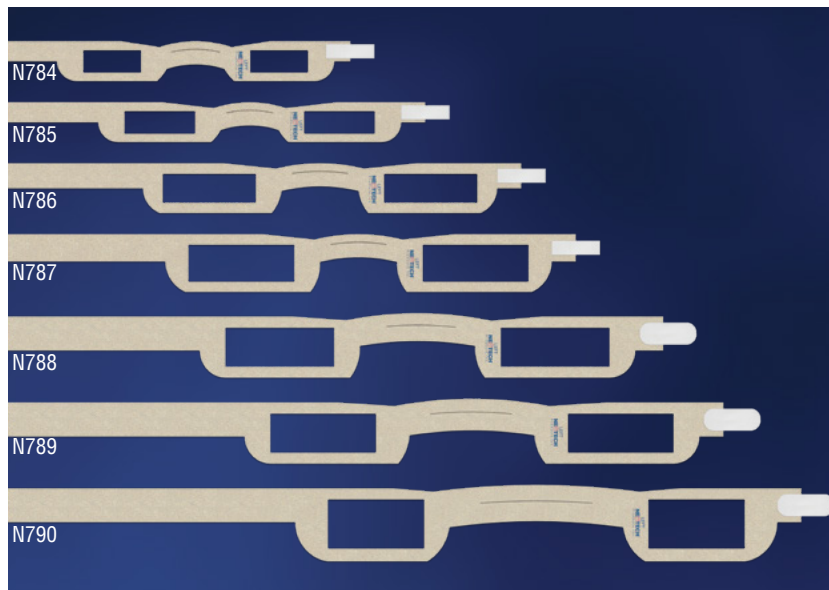

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- NeoFoam® è morbido, traspirante, rispetta la pelle e consente di regolare la sudorazione
- La sua flessibilità permette minimi movimenti della bocca
- Adattabile e regolabile
- Design con fenditura per il mento per garantire comfort e stabilità
- Le aperture per le orecchie prevengono le pieghe
- Progettato per ridurre il rischio di necrosi e ulcere da pressione
- Lo straordinario materiale contribuisce a evitare lo scivolamento
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionato singolarmente

Cat #	Elemento	Qtà/Unità
N784	Nana	20/scatola
N785	Micro	20/scatola
N786	Piccola	20/scatola
N787	Larga	20/scatola
N788	X-Larga	20/scatola
N789	Macro	20/scatola
N790	Jumbo	20/scatola

Brevetto USA #10,342,693

# Sottogola Neotech ChinStrap™

## ACCESSORI PER IL SUPPORTO ALLA RESPIRAZIONE

### INDICAZIONI D'USO

Il sottogola Neotech ChinStrap assicura che la bocca del paziente resti chiusa durante il supporto alla respirazione. È destinato all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

### ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Selezionare la taglia adatta misurando la circonferenza a partire dal centro del mento, passando sopra le orecchie, fino a dietro la testa.
- 2 Posizionare Neotech ChinStrap sul mento con il rientro rivolto verso il collo e la parte bianca e liscia a contatto con la pelle.
- 3 Posizionare la parte più bassa e più ampia del sottogola sotto il mento e quella più alta sulla parte anteriore del mento.
- 4 Tendere il sottogola verso la parte posteriore della testa posizionando le orecchie nelle aperture apposite e fissare delicatamente la linguetta del gancio al prodotto. Il lato contrassegnato da "LEFT" deve essere posizionato sotto l'orecchio sinistro del paziente.
- 5 Sostituire il prodotto ogni 5 giorni o secondo le indicazioni dell'ospedale, preferendo l'opzione che preveda una maggior frequenza.

*Nota: può essere tagliato su misura. Assicurarsi che il sottogola non sia troppo stretto e che non faccia pressione sulle orecchie. La linguetta del gancio deve sovrapporsi completamente al sottogola.*



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M699 Rev A

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Neotech ChinStrap non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Esclusivamente per uso monopaziente.