

# NeoShades<sup>®</sup> con alette

SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA



N724



N725



N726



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Schermi protettivi realizzati in materiale morbido e imbottito, design simile a occhiali da sole
- Tasche oculari progettate per offrire comfort e sicurezza al paziente (N724, N725, N726)
- Le alette NeoBond<sup>®</sup> sono realizzate in materiale idrocolloidale, rispettano la pelle e mantengono NeoShades in posizione
- Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP plastificante
- Confezionato singolarmente

| Cat #                     | Elemento | Qtà/Unità  |
|---------------------------|----------|------------|
| N720                      | Micro    | 50/scatola |
| N721                      | Piccola  | 50/scatola |
| N722                      | Larga    | 50/scatola |
| <b>Con tasche oculari</b> |          |            |
| N724                      | Micro    | 50/scatola |
| N725                      | Piccola  | 50/scatola |
| N726                      | Larga    | 50/scatola |

Brevetto USA #8,070,288;  
Ulteriori brevetti in corso di registrazione



# NeoShades® con alette

## SCHERMI PROTETTIVI PER GLI OCCHI PER FOTOTERAPIA

### INDICAZIONI D'USO

I prodotti NeoShades sono indicati per proteggere gli occhi durante le sedute di fototerapia. Sono destinati all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### Preparazione

- 1 Selezionare la taglia corretta.

Taglia indicativa:

Micro: 28 settimane o meno

Small: 29-36 settimane

Large: 37 settimane o più

- 2 Pulire e asciugare la pelle delle tempie secondo il protocollo ospedaliero.

*Nota: è importante che la pelle sia il più possibile pulita e asciutta. Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.*

NON USARE ALCOL.


#### Applicazione

- 1 Rimuovere con attenzione le alette idrocolloidi dagli schermi protettivi per gli occhi.

Prima di rimuovere il rivestimento plastico, scaldare direttamente le alette adesive idrocolloidi. Le tecniche di riscaldamento includono: tenere tra i palmi delle mani per almeno 60 secondi, tenere vicino a un riscaldatore radiante per 10-15 secondi o tenere a contatto con un dispositivo chimico di riscaldamento per talloni per 10-15 secondi.


- 2 Staccare e gettare via il rivestimento plastico. Posizionare le alette adesive idrocolloidi sulle tempie e tenerle in posizione per 60 secondi per garantire la corretta adesione.
- 3 Coprire gli occhi con NeoShades e fissare con delicatezza alle alette adesive idrocolloidi.

*Nota: lasciare esposta una parte dell'aletta per semplificarne la rimozione.*

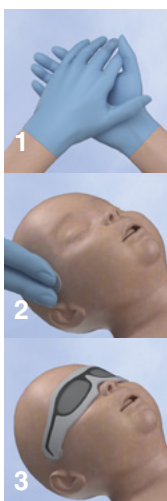

#### Rimozione

- 1 Sostituire le alette adesive idrocolloidi NeoShades sulla pelle ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, se quest'ultimo indica di sostituirle prima.
  - 2 Tenere in posizione il bordo dell'aletta adesiva idrocolloide e separare lentamente NeoShades dalla aletta.
  - 3 Saturare la aletta adesiva idrocolloide con acqua o soluzione fisiologica.
  - 4 Staccare lentamente la aletta adesiva idrocolloide dalla pelle tamponando contemporaneamente con acqua o soluzione fisiologica.
- Ripetere l'azione sul lato opposto.

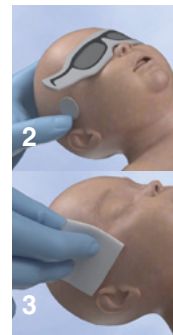

### CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il prodotto è controindicato nei pazienti con deformazioni facciali, infezioni o escoriazioni alla pelle, le quali impedirebbero la giusta adesione delle alette sulla pelle. Il prodotto non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

NeoShades deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

In caso di utilizzo discontinuo di NeoShades, verificare sempre l'integrità delle alette idrocolloidi alla rimozione degli schermi protettivi per gli occhi. Se le alette idrocolloidi si staccano dalla pelle, rimuoverle secondo le istruzioni per l'uso e applicare nuove alette idrocolloidi prima della ripresa della fototerapia.

Le alette adesive idrocolloidi non aderiscono correttamente se posizionate su pelle umida o peli. Oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

Prima dell'applicazione, non usare alcol per detergere la pelle.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e magazzino.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands

CE  
PPE Regulation (EU) 2016/425  
Notified Body: BSI Group (2797),  
Say Building, John M. Keynesplein 9  
1066 EP Amsterdam, Netherlands