


NeoBar[®]

STABILIZATOR RURKI INTUBACYJNEJ

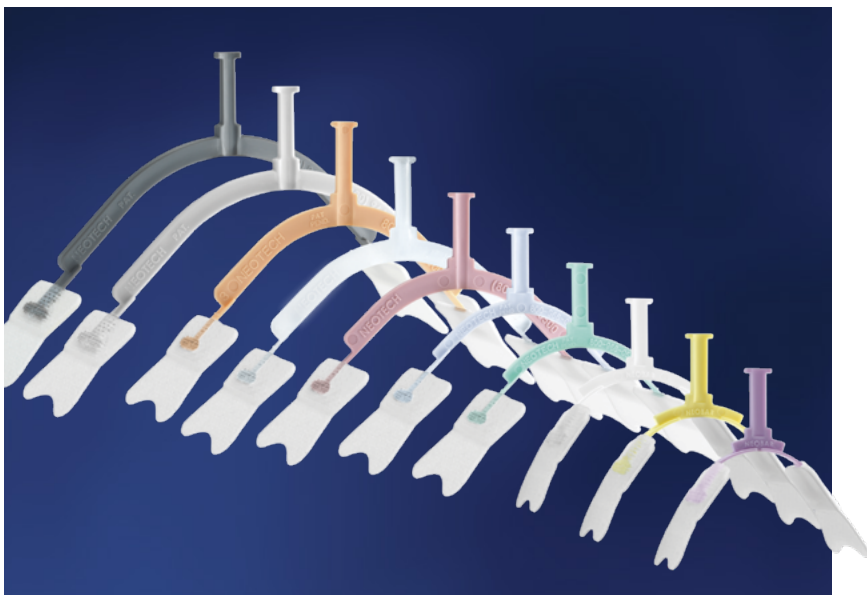

CECHY PRODUKTU

- Hydrokolidowe plastry NeoBond[®] nieszkodliwe dla skóry
- Rozmiary Macro i Jumbo z przylepną warstwą akrylową przeznaczoną do zastosowań medycznych
- Produkt ogranicza ryzyko samoistnej ekstubacji, pomaga zapobiegać urazom podniebienia i zapewnia lepszą higienę jamy ustnej
- Zastępuje taśmę mocowaną w pobliżu nosa lub ust
- Możliwość odcięcia w celu usunięcia w sytuacjach zagrożenia
- Oznaczenie rozmiarów kolorami
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog nr	Rozmiar	Kolor	Ilość/jednostka
N709	Mini	Fioletowy	5/skrzynka
N710	Ultra	Żółty	5/skrzynka
N711	Mikro	Biały	5/skrzynka
N712	Mały	Zielony	5/skrzynka
N713	Wielki	Niebieski	5/skrzynka
N714	XL	Róża	5/skrzynka
N715H	Makro	Jasne	5/skrzynka
N716H	Landara	Szary	5/ skrzynka

Z klejem akrylowym klasy medycznej

N715F	Makro	Brzoskwinia	5/skrzynka
N716F	Landara	Węgiel	5/skrzynka

Mieszany

N718 Transport (1 każdy N709, N710, N711, N712, N713, N714)
 N719N Mieszany (2 każdy N709, N710, N711, N712, N713, N714)

Patent USA
 #D434,496; #6,050,263



ZASTOSOWANIE

Stabilizator NeoBar służy do unieruchamiania rurki intubacyjnej. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

- 1 Po zaintubowaniu pacjenta wybierz odpowiedni rozmiar stabilizatora NeoBar, korzystając z dostarczonej taśmy pomiarowej NeoBar.

Umieść punkt środkowy taśmy na linii przegrody nosowej i rozwiń taśmę w stronę uszu. Kolorowy segment taśmy znajdujący się w centrum ucha reprezentuje rozmiar stabilizatora NeoBar.
- 2 Aby umożliwić prawidłowe przymocowanie, umieść stabilizator NeoBar na środku ust między górną i dolną wargą. Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust. Plastry powinny znajdować się bezpośrednio przed uszami.
- 3 Oczyszczyć i osuszyć skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną prawidłowo zamocowane. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

- 1 Przed usunięciem warstwy ochronnej ogrzewaj plastry w dłoniach przez 60 sekund. Można je również ogrzewać przy użyciu ogrzewacza promiennikowego lub chemicznego przez 10–15 sekund.
- 2 Usuń warstwę ochronną. Umieść plastry przed uszami w obszarze kości jarzmowych i przytrzymaj przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.

Uwaga: Należy się upewnić, że rurka intubacyjna znajduje się poniżej ramki, aby zmniejszyć nacisk na podniebienie lub dziąsła.
- 3 Najpierw owiń 1,2 cm taśmy przylepnej z papieru lub tkaniny całkowicie wokół ramki NeoBar, a następnie kontynuuj owijanie ramki i rurki.

Usuwanie

- 1 Wymieniaj stabilizator Neobar na nowy co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
- 2 Odwiń taśmę, aby odłączyć rurkę intubacyjną od ramki NeoBar.
- 3 Nasącz plastry wodą lub solą fizjologiczną.
- 4 Powoli odklej plastry od skóry, używając wacika nasączonego wodą lub solą fizjologiczną.

Usuwanie w sytuacji zagrożenia

Ostrożnie przetnij cienki segment stabilizatora NeoBar nożyczkami z zaokrąglonymi końcówkami w punkcie zetknięcia ramki z plastrem.

Usuń stabilizator NeoBar i podłączoną rurkę intubacyjną. Następnie usuń plastry. (Zob. Usuwanie).

— PRZECIWWSKAZANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA —

Stabilizator NeoBar nie powinien być stosowany w przypadku infekcji skórnej lub uszkodzenia skóry uniemożliwiającego prawidłowe przymocowanie plastrów.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Stabilizator NeoBar powinien być używany wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną prawidłowo zamocowane. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem produktu.

Jeżeli konieczne jest usunięcie produktu w sytuacji zagrożenia, zob. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: Usuwanie w sytuacji zagrożenia.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Wyprodukowano
w USA

M703 Rev A