


NeoPulse[™]

OPASKA PULSOKSYMetryczNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

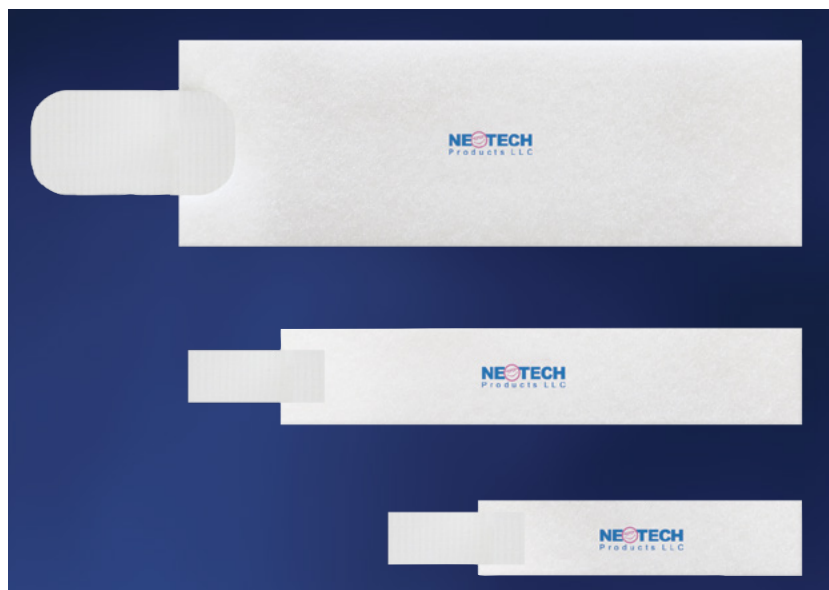

CECHY PRODUKTU

- Miękka, oddychająca, nieszkodliwa dla skóry opaska NeoFoam[®] ułatwia odparowanie potu
- Lekka, dopasowana i regulowana opaska
- Wygodna w użyciu i stabilna
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog nr	Rozmiar	Wymiary	Ilość/Jednostka
N781	Mały	3/4" x 3"	100/skrzynka
N782	Wielki	1" x 5"	100/skrzynka
N783	XL	2" x 6"	100/skrzynka

ZASTOSOWANIE

Opaska NeoPulse służy do mocowania czujnika pulsoksymetru. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Zamocuj czujnik pulsoksymetru zgodnie z procedurami szpitalnymi.
- 2 Owiń opaskę NeoPulse wokół stopy i czujnika pulsoksymetru oraz ostrożnie przymocuj rzep do opaski.

Uwaga: Produkt można przyciąć w celu prawidłowego zamocowania. Należy się upewnić, że opaska nie jest zamocowana zbyt ściśle. Rzep powinien całkowicie nakładać się na opaskę.

- 3 Sprawdź stopę po owinięciu, aby się upewnić, że cyrkulacja powietrza jest dostateczna.
- 4 Wymieniaj opaskę NeoPulse na nową co 5 dni lub częściej, zależnie od procedur szpitalnych. W przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia należy natychmiast wymienić produkt na nowy.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

przy padku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.