


## NeoBar®

### DRŽÁK ENDOTRACHEÁLNÍ KANYLY

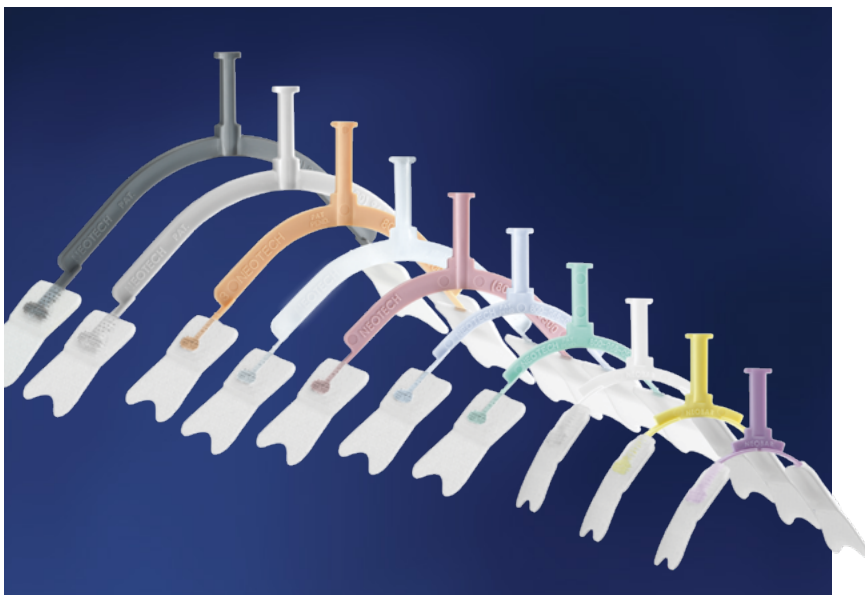

#### VLASTNOSTI A VÝHODY

- Materiál NeoBond® šetrný k pokožce na hydrokoloidní bázi
- K dispozici jsou velké velikosti „makro“ a „jumbo“ s akrylátovým lepidlem s lékařským stupněm čistoty
- Navrženo pro snížení extubace, pomáhá zabraňovat poranění patra a umožňuje lepší péči o dutinu ústní
- Eliminuje nutnost použití pásky v blízkosti nosu nebo úst
- V naléhavém případě lze odříznout
- Barevně odlišené velikosti
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog #	Velikost	Barva	Množství/Jednotka
N709	Mini	Nachový	5/krabice
N710	Ultra	Žlutá	5/krabice
N711	Micro	Bílý	5/krabice
N712	Malý	Zelená	5/krabice
N713	Velký	Modrý	5/krabice
N714	XL	Růžové	5/krabice
N715H	Makro	Průhledná	5/krabice
N716H	Jumbo	Šedá	5/krabice
<b>S akrylovým lepidlem lékařské kvality</b>			
N715F	Makro	Broskev	5/krabice
N716F	Jumbo	Uhlík	5/krabice

#### Roztříděný

N718 Doprava (1 každý N709, N710, N711, N712, N713, N714)

N719N Roztříděný (2 každý N709, N710, N711, N712, N713, N714)

US Patent

#D434,496; #6,050,263



### INDIKACE PRO POUŽITÍ

Držák NeoBar je určen k použití pro zajištění endotracheální kanyly. Je určen pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Příprava

- 1 Pomocí dodávané měřicí pásky NeoBar vyberte po zaintubování pacienta správnou velikost držáku NeoBar. Střední linii pásky položte na přepážku a rozviňte k uchu. Barva, která překrývá otvor zvukovodu, odpovídá velikosti držáku NeoBar.
- 2 Abyste zajistili, že bude držák NeoBar správně sedět, umístěte jej přes střed úst, mezi horní a dolní ret. Držák NeoBar by se neměl rtů dotýkat. Připevňovací proužky musejí být jen v přední části uší.
- 3 Očistěte a osušte pokožku podle zavedených postupů nemocnice.

*Poznámka: Je důležité, aby kůže byla co možná nejčistší a maximálně vysušená. Připevňovací proužky správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají negativní vliv na přilnutí.*

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

#### Použití

- 1 Před odstraněním ochranných fólií zahřívajte připevňovací proužky v ruce po dobu 60 sekund. Lze je také podržet na 10 až 15 sekund pod radiátorem nebo ohřívačem nohou.
  - 2 Sloupněte a vyhodte ochranné fólie. Aplikujte připevňovací proužky na kůži a po dobu 60 sekund je podržte na místě, abyste zajistili správnou přilnavost.
- Poznámka: Přesvědčte se, že endotracheální kanyla je pod platformou, aby se snížil tlak na patro nebo na dásně.*
- 3 Nejprve oviňte 1/2" bílou nebo textilní pásku zcela kolem platformy NeoBar, potom pokračujte jak kolem platformy, tak kolem kanyly.

#### Odstranění

- 1 Držák NeoBar vyměňujte každých 5 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.
- 2 Odviňte pásku a oddělte endotracheální kanylu od platformy NeoBar.
- 3 Nasákněte připevňovací proužky vodou nebo fyziologickým roztokem.
- 4 Pomalu odlupujte proužky z pokožky a přitom otírejte vodou nebo fyziologickým roztokem.

#### Naléhavé odstranění

Opatrně odstříhnete tenkou část držáku NeoBar oblymi nůžkami, a to v místě spojení držáku a připevňovacího proužku. Odstraňte držák NeoBar a připojenou endotracheální kanylu. Připevňovací proužky odstraňte později. (Viz část Odstranění.)

#### KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Držák NeoBar je kontraindikován u pacientů s obličejovou deformací, kožní infekcí nebo s oblastmi s odřenou kůží, které by bránily správnému umístění připevňovacích proužků.

Není určen pro použití u dospělých pacientů.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Držák NeoBar by měl být použit jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým dohledem proškolených zdravotníků.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Držák NeoBar by se neměl rtů dotýkat.

Připevňovací proužky správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají negativní vliv na přilnutí.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Postup okamžitého odstranění je uveden v části NÁVOD K POUŽITÍ: Naléhavé odstranění.

Pouze pro jednoho pacienta.