


NeoPulse™

JEDNORÁZOVÝ PÁS PRO PULZNÍ OXYMETR

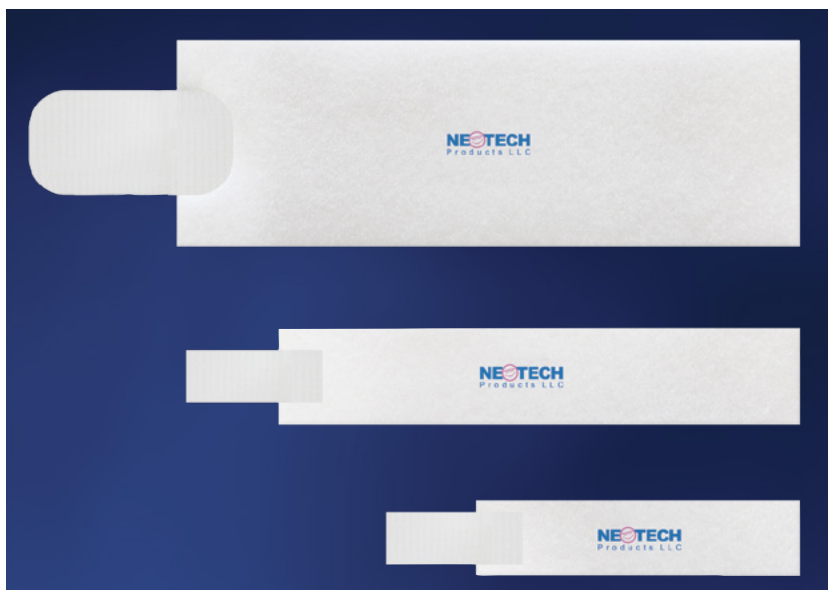

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Měkký, prodyšný materiál NeoFoam®, šetrný k pokožce odvádí pot
- Lehký, padnoucí a nastavitelný
- Navrženo pro pohodlí a stabilitu
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog #	Velikost	Rozměry	Množství/jednotka
N781	Malý	3/4" x 3"	100/krabice
N782	Velký	1" x 5"	100/krabice
N783	XL	2" x 6"	100/krabice



Vyrobeno
v USA

JEDNORÁZOVÝ PÁS PRO PULZNÍ OXYMETR

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Pás NeoPulse je určen pro udržení čidla pulzního oxymetru na svém místě. Je určen pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Čidlo pulzního oxymetru umístěte podle zavedených postupů nemocnice
- 2 Oviňte pás NeoPulse kolem nohy a čidla pulzního oxymetru a jemně přitlačte připevňovací proužek se suchým zipem na pás.

Poznámka: Lze zkrátit tak, aby vše správně sedělo. Přesvědčte se, že pás není příliš těsný. Připevňovací proužek by měl zcela pás překrývat.

- 3 Nohu po ovinutí pásu zkontrolujte a ujistěte se, že je v ní dostatečná cirkulace.
- 4 Pás NeoPulse vyměňujte každých 5 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.

Vyměňte okamžitě, pokud je pás opotřebovaný nebo špinavý

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě jej přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.