

Ochrana očí NeoShades[®] s Připevňovacími Kolečky

OČNÍ ŠTÍTY PRO FOTOTERAPII



N724



N725



N726



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Měkký, polstrovaný materiál s roztomilým designem slunečních brýlí
- Oční oblasti navrženy pro pohodlí a bezpečnost pacienta (N724, N725, N726)
- Hydrokoloidní připevňovací kolečka NeoBond®, šetrná pro kůži, drží ochranu očí NeoShades na svém místě
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Jednotlivě baleno

Katalog #	Položka	Množství/Jednotka
N720	Micro	50/krabice
N721	Malý	50/krabice
N722	Velký	50/krabice
<i>S očními kapsami</i>		
N724	Micro	50/krabice
N725	Malý	50/krabice
N726	Velký	50/krabice

U.S. Patent #8,070,288;
Další patenty čekají na schválení

Ochrana očí NeoShades® s Připevňovacími Kolečky

OČNÍ ŠTÍTY PRO FOTOTERAPII

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Ochrana očí NeoShades je indikována pro použití jako ochrana očí při fototerapeutických sezeních. Jsou určeny pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

- 1 Vyberte správnou velikost.

Přibližná velikost:

Mikro – 28 týdnů a méně

Malá – 29-36 týdnů

Velká – 37 týdnů a více

- 2 Pokožku na spáncích očistěte a osušte dle postupů nemocnice.

Poznámka: Je důležité, aby pokožka byla co nejčistší a nejsušší. Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a masti nepříznivě ovlivňují přilnutí.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Použití

- 1 Opatrně odstraňte hydrokoloidní připevňovací proužky z oční masky.

Před odstraněním plastových fólií se musí hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky aktivně zahřát. Techniky zahřívání zahrnují: podržení mezi dlaněmi po dobu minimálně 60 sekund, podržení v blízkosti sálavého ohřívače po dobu 10-15 sekund nebo podržení proti chemickému ohřívači nohou po dobu 10-15 sekund.

- 2 Sloupněte a vyhodte plastové fólie. Dejte hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky na spánky a po dobu 60 sekund je podržte na místě, abyste zajistili správnou přilnavost.


- 3 Zakryjte oči pomocí oční masky NeoShades a jemně ji připojte k hydrokoloidním přilnavým připevňovacím proužkům.

Poznámka: Část koleček nechte odkrytou, aby bylo možné ochranu snadněji odstranit.

Odstranění

- 1 Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky oční masky NeoShades vyměňujte na kůži každých 5 dní nebo dle nemocničního protokolu, podle toho, co nastane dříve.
- 2 Podržte okraj hydrokoloidního přilnavého připevňovacího proužku na místě a pomalu oddělujte oční masku NeoShades od proužku.
- 3 Saturujte hydrokoloidní přilnavý připevňovací proužek vodou nebo fyziologickým roztokem.
- 4 Pomalu odlupujte hydrokoloidní přilnavý připevňovací proužek z pokožky a přitom otírejte vodou nebo fyziologickým roztokem.

Opakujte na opačné straně.

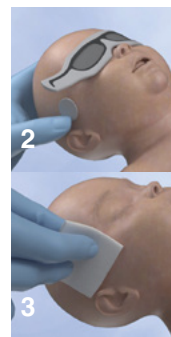

KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Ochrana očí NeoShades s připevňovacími kolečky je kontraindikována u pacientů s obličejovou deformací, kožní infekcí nebo s oblastmi s odřenou kůží, které by bránily správnému umístění koleček. Není určeno pro použití u dospělých pacientů.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Ochrana očí NeoShades by měla být použita jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým dohledem zdravotníků.

Při nepravidelném používání oční masky NeoShades vždy posuzujte integritu hydrokoloidních připevňovacích proužků, kdykoli je oční maska odstraněna. Pokud se hydrokoloidní připevňovací proužky odlepí od pokožky, před obnovením fototerapie je odstraňte podle návodu k použití a aplikujte nové hydrokoloidní připevňovací proužky.


Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a masti nepříznivě ovlivňují přilnutí.

Pro očištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.

Platí obecné postupy pro převoz a uskladnění.

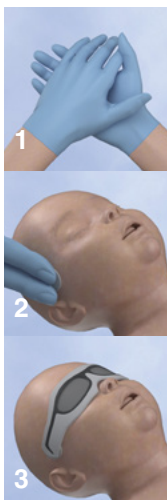

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M718 Rev D 2025.04.15

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands