


# Jednorazowego Użytku NeoGlo<sup>®</sup>

## TRANSILUMINATOR

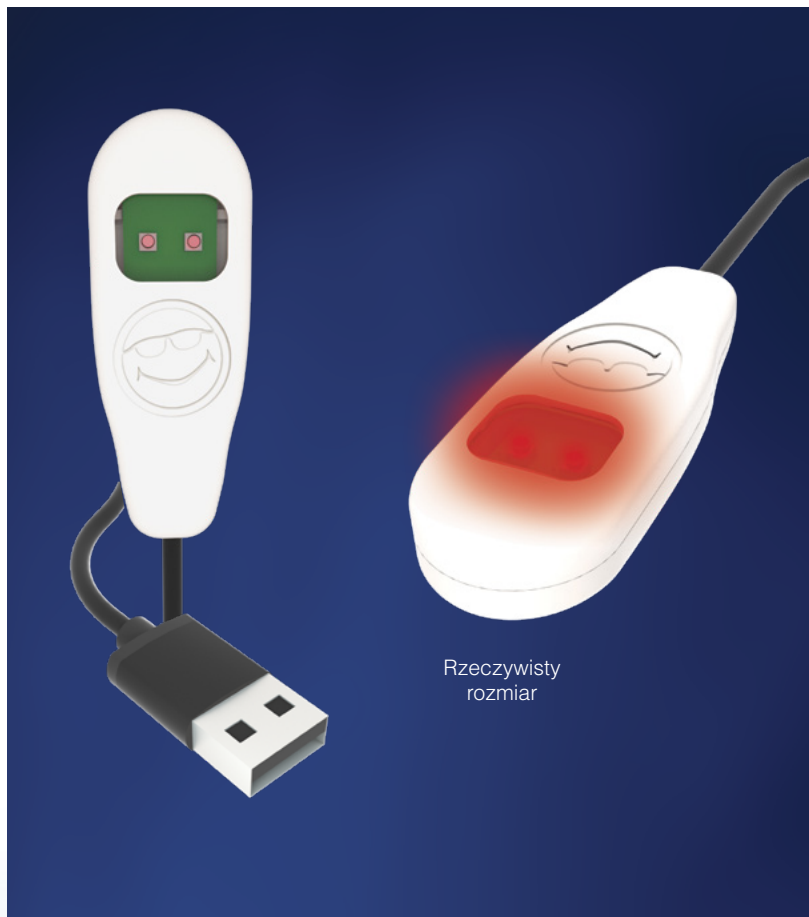

Rzeczywisty rozmiar

### CECHY PRODUKTU

- Stosowanie u jednego pacjenta pozwala na uniknięcie zakażenia krzyżowego
- Jasnoczerwone światłem LED
- Lekka i kompaktowa konstrukcja
- Podświetlanie żył, tętnic i innych struktur wewnętrznych
- Kabel zasilający z połączeniem USB
- Nie są wymagane wewnętrzne baterie
- Kompatybilność z NeoGlo Sleeve dla dodatkowej ochrony przed płynami ustrojowymi
- Przystępna cena
- Produkt wykonany bez użycia kauczuku naturalnego ani zmiękczacza DEHP
- Pakowanie indywidualne

Katalog	Przedmiot	Ilość/jednostka
N5536RD	czerwone światła z 6' przewodem	10/skrzynka



# Jednorazowego Użytku NeoGlo®

## TRANSILUMINATOR

### ZASTOSOWANIE

Produkt jednorazowego użytku Transiluminator NeoGlo to ręczne urządzenie do stosowania u jednego pacjenta stanowiące źródło światła przenikającego tkanki, mające na celu ułatwienie przeprowadzenia badania pacjenta.

### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- 1 Wyjąć urządzenie NeoGlo z opakowania. Włożyć do NeoGlo Sleeve, jeśli jest używany.
- 2 Podłączyć przewód USB do laptopa, przenośnego powerbanka (niedołączony) lub innego źródła zasilania USB.  
  
Uwaga: Podczas podłączania należy upewnić się, że światła są skierowane z dala od oczu wszystkich osób.
- 3 Przytrzymać urządzenie NeoGlo przy skórze lub pod badanym miejscem.  
  
Uwaga: aby podświetlenie było skuteczniejsze, przyciemnić światło w pomieszczeniu.  
  
Przeostroga: unikać ciągłego używania powyżej 10 minut.
- 4 Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- 5 Po każdym użyciu czyścić urządzenie NeoGlo ściereczką nasączoną alkoholem lub CaviWipe™.
- 6 Urządzenie NeoGlo należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi i federalnymi przepisami.

### PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Dłuższe używanie może spowodować wzrost temperatury powierzchni urządzenia NeoGlo. Unikać ciągłego używania przez ponad 10 minut.

Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu skóry z urządzeniem NeoGlo, chyba że pacjent jest pod bezpośrednim nadzorem pracownika opieki zdrowotnej.

Stosować ze szczególną ostrożnością w przypadku wcześniaków, osób z delikatną i osłabioną skórą.

Przewód USB może potencjalnie powodować niebezpieczeństwo uduszenia się.

Nie kierować światła bezpośrednio w stronę oczu.

Nie zanurzać urządzenia NeoGlo w płynach.

Nie sterylizować urządzenia NeoGlo w autoklawie. Para lub duża wilgotność mogą spowodować uszkodzenie układów elektrycznych urządzenia.

Utylizować urządzenie NeoGlo zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektronicznych.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

