


Radiolucent NeoLead[®]

EKG-ELEKTRODER

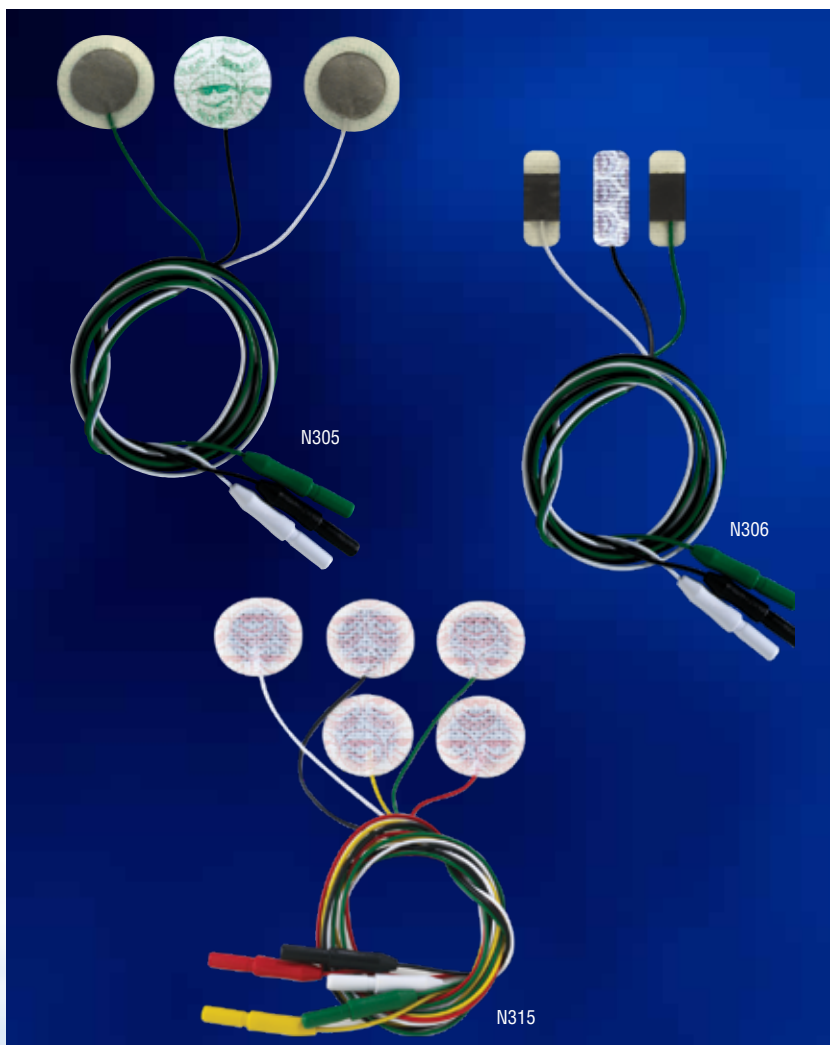

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Fördragna elektroder, som är nästan osynliga på röntgenbilder
- Hydrogelmittdyna
- NeoBond[®] hydrokolloidkant utformad för att:
 - förhindra hydrogel från att läcka ut eller torka i förtid
 - ge sensorisk stabilitet för bättre spårning
 - minimera glidning
- Flerfärgade kablar för enklare identifiering
- N305 – set med tre ledningar
- N315 – set med fem ledningar för flerkanalig, kontinuerlig övervakning
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Set med ledningar i singelpackningar

Micro NeoLead[®]

- Fördragna elektroder, som är nästan osynliga på röntgenbilder
- Hydrogelmittdyna
- NeoBond[®] hydrokolloidändor utformade för att:
 - ge sensorisk stabilitet för bättre spårning
 - minimera glidning
 - minska behovet av extraband eller remmar
- Flerfärgade kablar för enklare identifiering
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)
- Set med tre singelpackningar

Antal	Punkt	Storlek	Antal/Enhet
N305	Radiolucent	1" (26 mm) Cirkel	20 set/låda
N306	Micro	1" x 3/8" (26x10 mm)	20 set/låda
N315	Pediatrisk	1" (26 mm) Cirkel	20 set/låda



Tillverkad i USA

Amerikanskt patent
#6,795,722; #8,798,709

Radiolucent NeoLead®

EKG-ELEKTRODER

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

NeoLead® EKG-elektroder är avsedda för elektrokardiografisk (EKG) övervakning. De är avsedda för barn (nyfödda, spädbarn och barn).

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

Rengör och torka huden enligt gällande riktlinjer på sjukhuset.

Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt. Elektroderna fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.



ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering

1 Innan du tar bort plastskyddet måste hydrokolloidlimmet aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk hälvärmare i 10-15 sekunder.



2 Dra av varje ledning från plastfodralet en åt gången, placera ledningen på huden och håll den på plats i 60 sekunder för att säkerställa korrekt vidhäftning.

Kassera plastskyddet.

Avlägsning

1 Byt NeoLead var 5:e dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.

2 Blöt med vatten eller saltlösning.

3 Dra försiktigt bort ledningen från huden allteftersom huden blöts med vatten eller koksaltlösning.



VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får, enligt amerikansk lag, endast säljas av eller på ordination av läkare.

NeoLead ECG elektroder ska endast användas under kontinuerlig direkt övervakning av utbildad vårdpersonal.

Elektroderna fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan förbandet appliceras.

Använd inte NeoLead (N300, N301) vid röntgen- eller MRundersökningar.

Använd inte Radiolucent NeoLead (N305, N306, N315) vid MRundersökningar.

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

För engångsbruk Återanvänd ej.

Endast avsedd för användning till en patient.