


NeoBridge[®]

NAPAKATETRIN PIDIKE

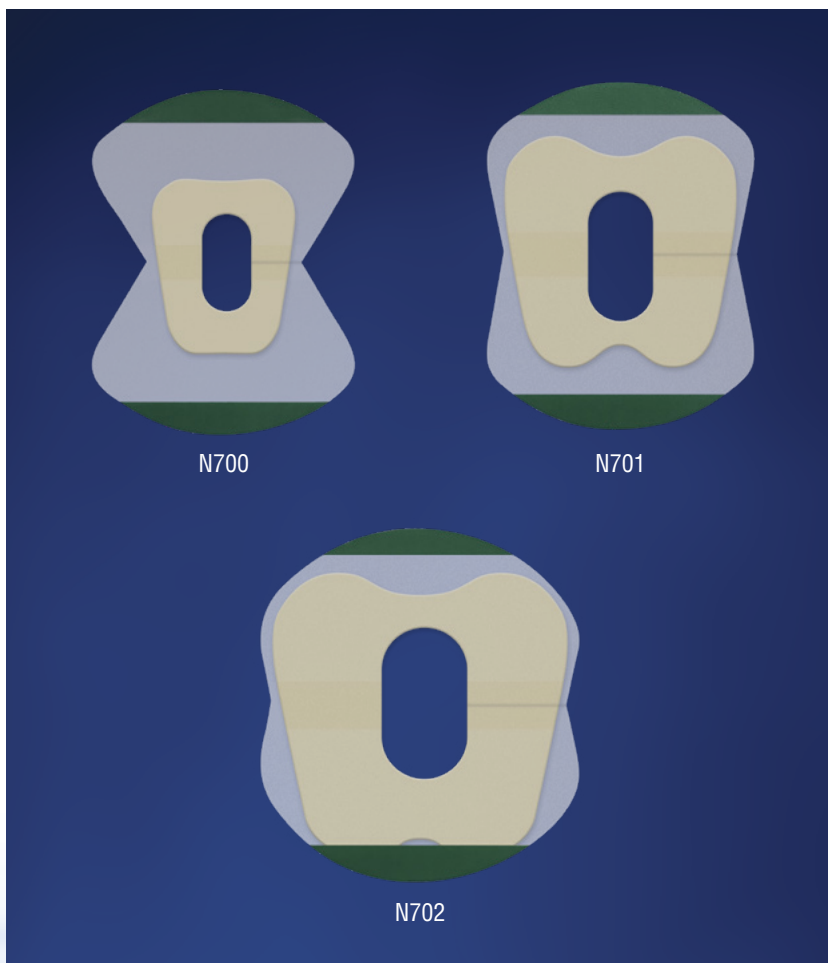

OMINAISUUDET JA EDUT

- Ihoa ärsyttämätön NeoBond[®]-hydrokolloidialusta
- Turvalliset kiinnitysläpät, jotka vähentävät putkien rasitusta ja auttavat estämään irtoamista
- Sopii kahdelle katetrille
- Lämpö on suunniteltu avattavaksi ja suljettavaksi toistuvasti
- Läpinäkyvä läppä parantaa näkyvyyttä
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenintä)
- Yksittäispakattu

Määrä	Koko	Noin Paino	Määrä/Yksikkö
N700	Mikro	800 tai vähemmän	20/laatikko
N701	Pieni	800-1200 gm	20/laatikko
N702	Suuri	1200-2200 gm	20/laatikko



Yhdysvaltain patentti #5,370,627



Kliinikon keksimä



Valmistettu USA:ssa

NeoBridge®

NAPAKATETRIN PIDIKE

KÄYTTÖAIHEET

NeoBridge on tarkoitettu napakatetrien kiinnittämiseen ja tukemiseen. Se on tarkoitettu käytettäväksi lapsipotilailla (vastasyntyneet, vauvat ja lapset).

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu

Kun katetri on asetettu paikalleen, puhdista ja kuivaa iho sairaalan protokollan mukaisesti.

Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. NeoBridge ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/ karvoihin. Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.

Kiinnittäminen

- 1 Ennen muovikalvon irrottamista hydrokolloidiliimaa on lämmitettävä aktiivisesti. Mahdollisia lämmitystekniikoita: pidä liuskoja kämmenten välissä vähintään 60 sekuntia, säteilevän lämpölähteen lähistöllä 10–15 sekuntia tai kemiallista lämmitintä vasten 10–15 sekuntia.
- 2 Hävitä valkoinen paperikalvo, ja sitten irrota ja hävitä kirkas muovikalvo hydrokolloidialustasta.
- 3 Pidä aukko oikealla puolella ja hydrokolloidialustan leveämpi pää kohti potilaan päätä, ja vie katetri NeoBridge-pidikkeen keskiosan läpi.
- 4 Kiinnitä alusta ihoon ja pidä sitä paikallaan 60 sekunnin ajan, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.
- 5 Irrota ja hävitä himmeä kalvo läpän yläpuoliskosta. Nosta läppä ylös ja kiinnitä katetri(t) läppään kaari- tai U-muodossa, jotta läpän sivusta ulos tuleva katetri (tai katetrit) jännittyy mahdollisimman vähän.

Huomautus: Älä ulota katetria (tai katetreja) läpän vihreälle alueelle asti. Jos käytät kahta katetria, laita yksi katetri poistumaan läpän kummaltakin puolelta.

- 6 Irrota ja hävitä himmeä kalvo läpän alapuoliskosta. Nosta läppä ylös kohdistaksesi alapuoliskon vihreän alueen yläpuoliskon vihreän alueen kanssa ja paina niitä lujasti yhteen, jolloin katetri (tai katetrit) jää tarraläppien väliin.

- 7 Vedä läppiä erikseen poistaaksesi katetrin (tai katetrit) ja vaihtaaksesi sen (tai niiden) paikkaa tarvittaessa, kiinnitä sitten sulkemalla.

Poistaminen

- 1 Vaihda NeoBridge 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.
- 2 Vedä läppiä erilleen toisistaan poistaaksesi katetrin (tai katetrit).
- 3 Kyllästä NeoBridge vedellä tai suolaliuoksella.
- 4 Irrota NeoBridge hitaasti ihosta pyyhkien ihoa samalla vedellä taisuolaliuoksella.

HUOMIOT JA VAROITUKSET

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

NeoBridge-pidikettä saa käyttää vain, kun potilas on koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa, suorassa valvonnassa.

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

NeoBridge ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/karvoihin.

Öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.

