


NeoBridge[®]

HOLDER TIL NAVLESTRENGSKATETER

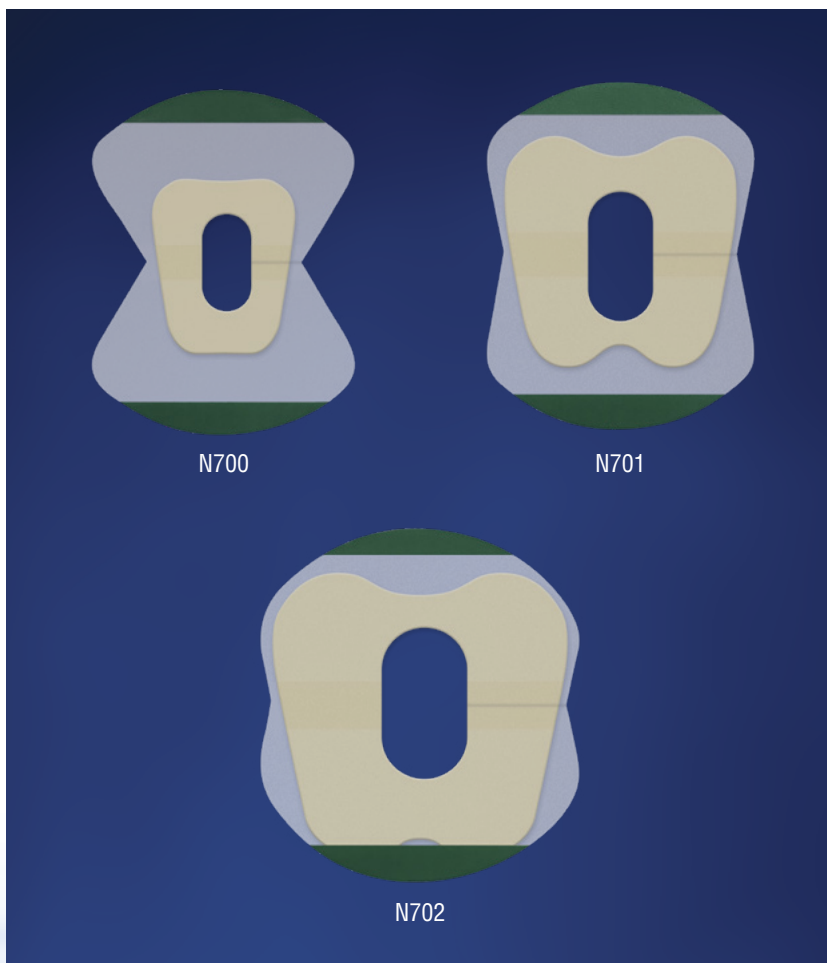

FUNKTIONER OG FORDELE

- Giver mulighed for at give tilskud under amning, hvilket er med til at stimulere en naturlig mælkeproduktion
- Forhindrer ammeafbrydelser, der kan føre til problemer med at lægge barnet til brystet eller med at få mælken til at løbe til
- Kan bruges til at give kolostrum, udmalket mælk, beriget modernmælk eller modernmælkeserstatning, når det er nødvendigt
- Envejsventilen forhindrer tilbagestrømning og hjælper med at maksimere naturlig mælkeproduktion
- Muliggør præcis kontrol over tilskuddets mængde, hastighed og timing
- Giver overflade nok til at lægge babyen til
- Hjælper med at opretholde kontakten hud mod hud
- Tynd medicinsk silikone for en mere naturlig følelse
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP

Antal	Størrelse	Ca. Vægt	Antal/Enhed
N700	Mikro	800 eller mindre	20/boks
N701	Lille	800-1200 gm	20/boks
N702	Stor	1200-2200 gm	20/boks



Amerikansk patent #5,370,627



Kliniker opfundet



Fremstillet i USA

NeoBridge®

HOLDER TIL NAVLESTRENGSKATETER

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoBridge er beregnet til at forankre og understøtte navlestrengskatetre. Den er beregnet til brug på pædiatriske patienter (nyfødte, spædbørn og børn).

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Når kateteret er blevet indsat, skal huden renses og tørres i henhold til hospitalets protokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. NeoBridge klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.

Påsætning

- 1 Inden plastforingen fjernes, skal hydrokolloidklæbemidlet aktivt opvarmes. Opvarmningsteknikker omfatter: hold mellem håndfladerne i mindst 60 sekunder, hold tæt på en strålevarmer i 10-15 sekunder eller hold mod en kemisk hælvarmer i 10-15 sekunder.
- 2 Kassér den hvide papirbeklædning, og fjern og kassér den gennemsigtige plastikbeklædning fra hydrokolloidbasen.
- 3 Med slidsen på højre side og den bredere ende af hydrokolloidbasen vendt mod patientens hoved skal du skubbe kateteret gennem midten af NeoBridge.
- 4 Påfør basen på huden og hold den på plads i 60 sekunder for at sikre korrekt vedhæftning.
- 5 Fjern og kassér foringen fra den øverste halvdel af flappen. Bring flappen op og fastgør kateteret til flappen i en bue- eller U-form for at minimere spændingen med kateteret ud af siden af flappen.
Bemærk: Forlæng ikke kateteret ind i det grønne område af flappen. Hvis du bruger to katetre, skal du have en kateterudgang på hver side af flappen.
- 6 Fjern og kassér foringen fra den nederste halvdel af flappen. Bring flappen op for at flugte det grønne område af den nederste halvdel med det grønne område i den øverste halvdel, tryk dem fast sammen, og omslut kateteret mellem de klæbende flapper.

- 7 Træk flapperne fra hinanden for at fjerne eller flytte kateteret efter behov, og luk derefter for at sikre.

Fjernelse

- 1 Udskift NeoBridge hver 5. dag eller pr. hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.
- 2 Træk flapperne fra hinanden for at fjerne kateteret.
- 3 Mæt NeoBridge med ferskvand eller saltvand.
- 4 Træk langsomt NeoBridge væk fra huden, mens du vasker huden med ferskvand eller saltvand.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

NeoBridge må kun bruges, mens patienten er under konstant, direkte opsyn af uddannet sundhedspersonale.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

NeoBridge klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil påvirke vedhæftningen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden før påføring.

Kun til brug for en enkelt patient.

