


EZ-Hold[®]

SLANG- OCH KANYLHÅLLARE

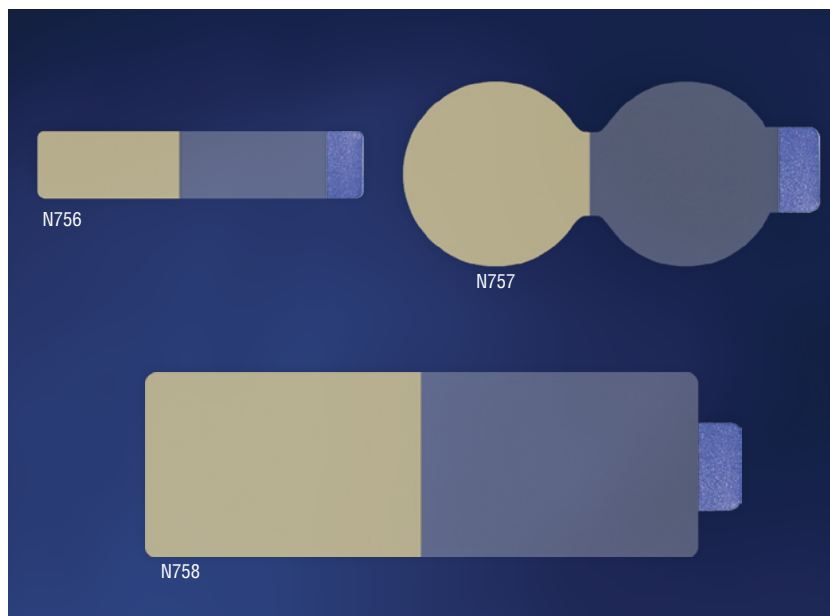

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Hudvänlig NeoBond[®] vidhäftande hydrokolloidbas
- Vikbar flärp utformad för att avlasta påfrestningar på slangarna
- Flärp utformad för att kunna öppnas och stängas upprepade gånger
- Tydlig flärp ger bättre synlighet
- Ministorlek och -form idealisk för förtidigt födda barn
- Innehåller ej naturgummi eller mjukgörare (DEHP)

Antal	Punkt	Antal/Enhet
N756	Mini	100/låda
N757	Standard	100/låda
N758	Extra Large	100/låda



EZ-Hold®

SLANG- OCH KANYLHÅLLARE

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

EZ-Hold används för att fästa och stödja ventilations slangar.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Förberedelser

Rengör och torka huden där EZ-Hold ska placeras enligt gällande riktlinjer på sjukhuset.


Obs! Det är viktigt att huden är så ren och torr som möjligt. EZ-Hold fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

ANVÄND INTE SPRIT.

Applicering


- 1 Innan du tar bort plastskyddet måste hydrokolloidlimmet aktivt värmas upp. Uppvärmningstekniken är enligt följande: håll mellan handflatorna i minst 60 sekunder, håll i närheten av en strålningsvärmare i 10-15 sekunder eller håll mot en kemisk hälvärmare i 10-15 sekunder.
- 2 Kasta det vita pappersskyddet. Skrapa sedan försiktigt bort det genomskinliga tryckta skyddet från hydrokolloidförbandet och kasta det.
- 3 Applicera på huden och håll på plats i 60 sekunder så att det fäster ordentligt.
- 4 Skrapa försiktigt bort det andra matta skyddet och kasta det, och vik därefter flärpen över slangen.

Obs! Lyft flärpen vid behov för att omplacera eller avlägsna slangen.

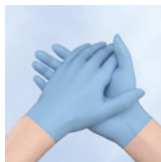

Avlägsning

- 1 Byt EZ-Hold var femte dag eller enligt riktlinjerna på sjukhuset, vilket som infaller först.
- 2 Lyft flärpen för att avlägsna slangen.
- 3 Blöt EZ-Hold med vatten eller saltlösning.
- 4 Skrapa försiktigt bort EZ-Hold från huden allteftersom huden blöts med vatten eller koksaltlösning.

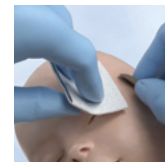

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET

Avlägsna genast om hudirritation uppstår.

EZ-Hold fäster inte ordentligt på fuktig hud eller hår. Även oljor och krämer motverkar vidhäftningen.

Använd inte sprit till att rengöra huden innan förbandet appliceras.

Endast avsedd för användning till en patient.