


EZ-Hold[®]

LETKU- JA KANYYLIPIDIKE

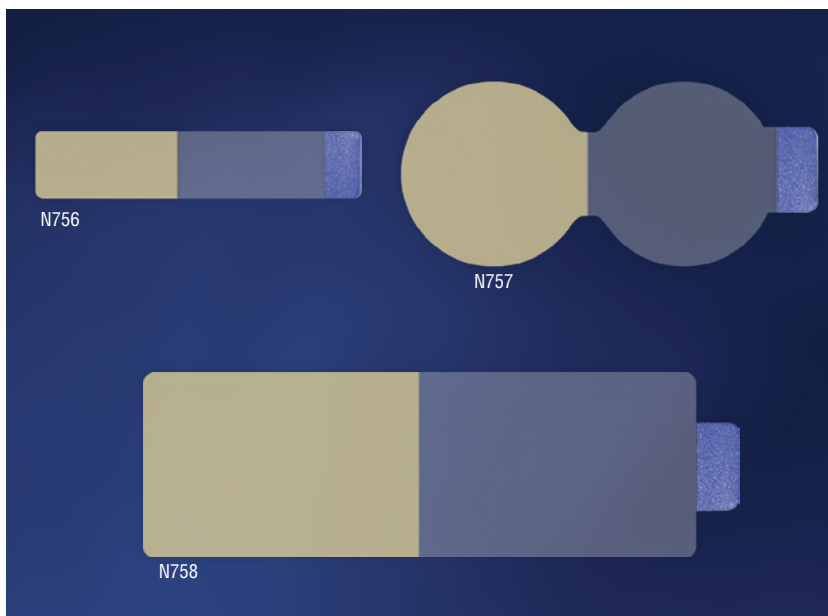

OMINAISUUDET JA EDUT

- Ihoa ärsyttämätön NeoBond[®]-hydrokolloidiliima-alusta
- Päälle taittuva läppä, joka vähentää putkien ainetta
- Läppä on suunniteltu toistuvasti avattavaksi ja suljettavaksi
- Läpinäkyvä läppä parantaa näkyvyyttä
- Pieni koko ja muoto sopii pienille keskosille
- Valmistuksessa ei käytetty luonnonkumia (lateksia) tai DEHP-ftalaattia (pehmenntä)

Määrä	Tuote	Määrä/Yksikkö
N756	Mini	100/laatikko
N757	Vakio	100/laatikko
N758	Erityisen Suuri	100/laatikko

EZ-Hold®

LETKU- JA KANYYLIPIDIKE

KÄYTTÖAIHEET

EZ-Hold on tarkoitettu hengitysletkujen kiinnittämiseen ja tukemiseen.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu

Puhdista ja kuivaa iho, jolle EZ-Hold asetetaan, sairaalan protokollan mukaisesti.

Huomautus: On tärkeää, että iho on mahdollisimman puhdas ja kuiva. EZ-Hold ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/ karvoihin. Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA.



Kiinnittäminen

- 1 Ennen muovikalvon irrottamista hydrokolloidiliimaa on lämmitettävä aktiivisesti. Mahdollisia lämmitystekniikoita: pidä liuskoja kämmenten välissä vähintään 60 sekuntia, säteilevän lämpölähteen lähistöllä 10–15 sekuntia tai kemiallista lämmitintä vasten 10–15 sekuntia.
- 2 Hävitä valkoinen paperikalvo, ja sitten irrota ja hävitä kirkas muovikalvo hydrokolloidialustasta.
- 3 Kiinnitä alusta ihoon ja pidä sitä paikallaan 60 sekunnin ajan, jotta se kiinnittyy varmasti kunnolla.
- 4 Irrota ja hävitä toinen kalvo ja käännä läppä letkun päälle.

Huomautus: Nostaa läppää tarvittaessa, jotta voit vaihtaa letkun paikkaa tai irrottaa sen.



Poistaminen

- 1 Vaihda EZ-Hold 5 päivän välein tai sairaalan protokollan mukaisesti, sen mukaan, kumpi on aiemmin.
- 2 Nosta läppää, jotta voit irrottaa letkun.
- 3 Kyllästä EZ-Hold vedellä tai suolaliuksella.
- 4 Irrota EZ-Hold hitaasti ihosta pyyhkien ihoa samalla vedellä tai suolaliuksella.



HUOMIOT JA VAROITUKSET

Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihoärsytystä.

EZ-Hold ei kiinnity kunnolla kosteaan ihoon tai hiuksiin/ karvoihin.

Myös öljyt ja voiteet heikentävät kiinnitystä.

Älä käytä alkoholia ihon puhdistamiseen ennen kiinnitystä.

Vain yhden potilaan käyttöön.