


EZ-Hold®

SUPPORTO PER TUBO E CANNULA

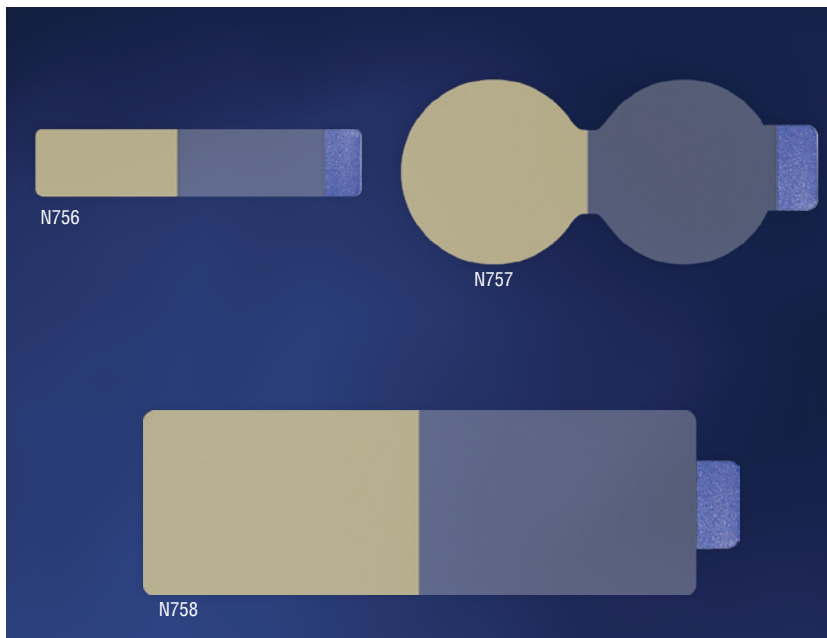

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Base all'idrocolloide NeoBond® non irritante
- Linguetta ripiegata realizzata per evitare sollecitazioni sui tubi
- Linguetta progettata per aperture e chiusure ripetute
- Linguetta trasparente per una migliore visibilità
- Forma e dimensioni ridotte, ideale per grandi prematuri
- Non contiene lattice di gomma naturale o plastificante DEHP

Catalogare	Elemento	Quantità/unità
N756	Mini	100/skrzynka
N757	Standard	100/skrzynka
N758	Extra Grande	100/skrzynka



EZ-Hold®

SUPPORTO PER TUBO E CANNULA

INDICAZIONI PER L'USO

EZ-Hold è indicato per il fissaggio e il supporto di tubi per la respirazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

Pulire e asciugare la pelle dove verrà posizionato EZ-Hold secondo il protocollo ospedaliero.

Nota: è importante pulire e asciugare la pelle il più possibile. Il cerotto EZ-Hold non aderisce correttamente se posizionato su pelle umida o peli. Anche oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

- 1 Prima di rimuovere il rivestimento in plastica, scaldare attivamente l'adesivo idrocolloide. Le tecniche di riscaldamento includono: tenerlo tra i palmi delle mani per almeno 60 secondi, vicino a un dispositivo di riscaldamento radiante per 10-15 secondi oppure a contatto con un dispositivo chimico di riscaldamento per talloni per 10-15 secondi.
- 2 Rimuovere il rivestimento bianco in carta, quindi staccare e rimuovere il rivestimento trasparente stampato dalla base idrocolloide.
- 3 Applicare la base alla pelle e tenerlo in posizione per 60 secondi per assicurare un'aderenza perfetta.
- 4 Staccare e rimuovere il secondo rivestimento satinato e ripiegare il lembo sul tubo.

Nota: sollevare la linguetta per riposizionare o rimuovere il tubo, secondo necessità.

Rimozione

- 1 Sostituire EZ-Hold ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, a seconda dell'intervallo più breve.
- 2 Sollevare la linguetta per rimuovere il tubo.
- 3 Bagnare EZ-Hold con acqua o soluzione salina.
- 4 Staccare lentamente EZ-Hold, tamponando la pelle con acqua o soluzione fisiologica.



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

Il cerotto EZ-Hold non aderisce correttamente se posizionato su pelle umida o peli. Anche oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

Non usare alcol per pulire la pelle prima dell'applicazione.

Esclusivamente per uso monopaziente.

