


EZ-Hold[®]

DRŽÁK HADIČEK A KANYL

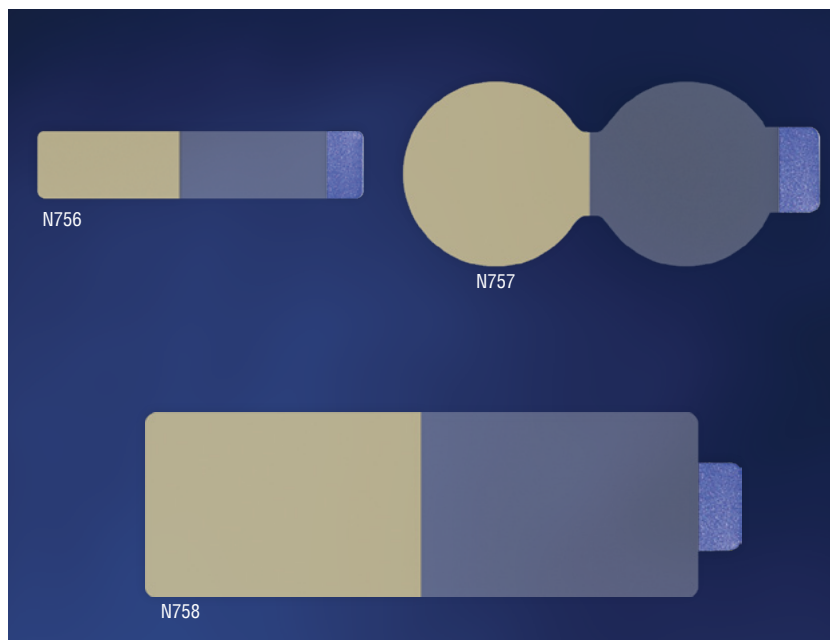

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Materiál NeoBond[®] šetrný k pokožce na hydrokoloidní bázi
- Přehýbací chlopeň navržena tak, aby uvolňovala napětí na hadičkách
- Chlopeň provedená tak, aby ji šlo opakovaně přilepovat a odlepovat
- Průhledná chlopeň umožňuje lepší viditelnost
- Minimalistická velikost i tvar jsou ideální pro malinké předčasně narozené děti
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP

Katalog	Položka	Množství/jednota
N756	Mini	100/krabice
N757	Standard	100/krabice
N758	Extra Velké	100/krabice

EZ-Hold®

DRŽÁK HADIČEK A KANYL

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Držák EZ-Hold je určen pro ukotvení a podporu dýchacích hadic.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

Tam, kde má být umístěn EZ-Hold, očistěte a osušte pokožku dle postupů nemocnice.

Poznámka: Je důležité, aby kůže byla co možná nejčistší a maximálně vysušená. Držák EZ-Hold správně nepřilne na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají také negativní vliv na přilnutí.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Použití

- 1 Před odstraněním plastové fólie se musí hydrokoloidní náplast aktivně zahřát. Techniky zahřívání zahrnují: podržení mezi dlaněmi po dobu minimálně 60 sekund, podržení v blízkosti sálavého ohříváče po dobu 10-15 sekund nebo podržení proti chemickému ohříváči nohou po dobu 10-15 sekund.



- 2 Vyhodte bílý ochranný papírek a potom z hydrokoloidní báze sloupněte a vyhodte průhlednou potišťenou ochrannou fólii.



- 3 Bázi aplikujte na pokožku a držte ji na místě po dobu 60 sekund, abyste zajistili správné přilnutí.




- 4 Sloupněte a vyhodte druhou matnou fólii a ohněte chlopeň přes hadičku.

Poznámka: Chlopeň podle potřeby zvedněte a hadičku přemístěte nebo odstraňte.



Odstranění

- 1 Držák EZ-Hold vyměňujte každých 5 dní nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane dříve.
- 2 Zvedněte chlopeň a vyjměte hadičku.
- 3 Nasákněte držák EZ-Hold vodou nebo fyziologickým roztokem.
- 4 EZ-Hold pomalu sloupněte z pokožky, za stálého otírání pokožky vodou nebo solným roztokem

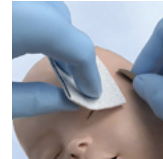

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Držák EZ-Hold správně nepřilne na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají také negativní vliv na přilnutí.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Pouze pro jednoho pacienta.